


PINOF PHYSIO BOOST

# PINOFIT® PHYSIO BOOST MINI



PINOFIT®PHYSIO BOOST MINI | LV

## PINOFIT® PHYSIO BOOST MINI

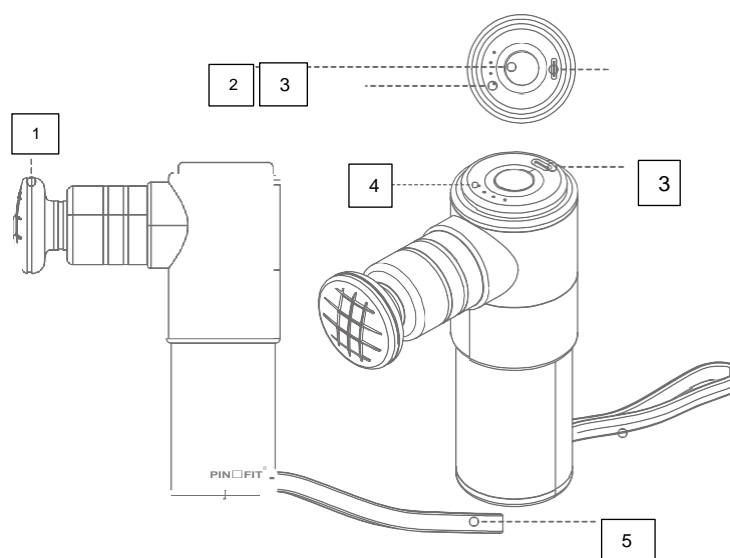

1. Noņemams masāžas stiprinājums
2. Daudzfunkcionāla poga: ON / OFF/ Speed
3. Uzlādes saskarne
4. Akumulatora statusa indikators/ ātruma līmenis
5. Neslīdoša aprobe

**CE** CE marķējums




Izmantojiet tikai sausās iekštelpās



Bīstamās preces jāiznīcina kā speciālie atkritumi.  
Izvēlētās roniskās daļas nedrīkst izmest kā sadzīves atkritumus.

## MASĀŽAS PIEDERUMI

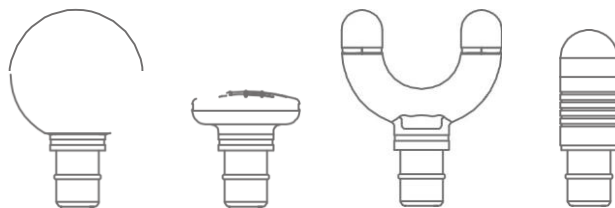

Mazs, apaļš stiprinājums	Plakans stiprinājums	Dakšveida stiprinājums ar noņemamiem silikona spilveniem	Lodes stiprinājums - ar noņemamu konusa spilvenu
Visa ķermeņa masāža	Stimulējoša masāža	Visa ķermeņa masāža Muskuļu masāža	Muskuļu un trigerpunktu masāža

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN FUNKCIJAS

### PHYSIO BOOST MINI

Nominālais ātrums: 900 - 3,200 apgr./min

Četri frekvenču režīmi

maksimālā jauda: 70 W

darbības laiks: apm. 7 h

Tiļpums: aptuveni 50 dB

Svars: apm. 500 g II

aizsardzības klase

Izmēri: apm. 142 x 90 x 44 mm

### BATERIJA

Nominālais spriegums:

12 V DC tips: Li-Ion

Ietilpība: 2,500 mAH

Maksimālais uzlādes laiks: apm. 3h ar

spraudnis, apm. 8 h,

izmantojot USB C tipa

uzlādes kabeli

**Nelietojiet ierīci ilgāk par 10 minūtēm bez pārtraukuma!**



### **VISPĀRĪGI**

Šajā lietošanas instrukcijā ir svarīga informācija par lietošanu, drošību un kopšanu. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet tos, it īpaši pirms pirmās lietošanas, un saglabājiet tos turpmākai atsaucei. Šai lietošanas instrukcijai vienmēr jābūt pieejamai ikvienam, kas lieto produktu.

### **KONTAKTINFORMĀCIJA: PINO PHARMAZEUTISCHE PRAPARATE GMBH**

Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu  
[service@pino-gmbh.de](mailto:service@pino-gmbh.de).

## MŪSDIENĪGA MASĀŽAS IERĪCE

PINOFIT®Physio Boost Mini ir novatoriska vibrācijas masāžas ierīce, kas paredzēta izmantošanai labsajūtas masāžā. Nav medicīnisks produkts - Nav apstiprināts lietošanai kā daļa no fizikālās terapijas vai izrakstītas ārstēšanas.

### SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA:

Tālāk sniegtā drošības pamatinformācija palīdz novērst ķermeņa bojājumus un materiālus zaudējumus:

Pirms ierīces pievienošanas barošanas avotam pārļiecinieties, vai barošanas spriegums ir saderīgs ar norādīto spriegumu ierīces tipa plāksnē.

Ierīce satur litija jonu uzlādējamu akumulatoru. Uzlādējamās baterijas nedrīkst izjaukt, iemest ugunī vai īssavienot. Neizjauciet un nemodificējiet ierīci.

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai sausās iekštelpās. Turiet ierīci prom no siltuma avotiem, šķidrumiem un bērniem. PINOFIT®Physio Boost Mini ir izstrādāts, lai atbalstītu labsajūtas masāžas.

Tas nav piemērots nevienai citai lietošanai.

Lietošanas laikā nespiediet uz ierīci, jo tas var ietekmēt ierīces kalpošanas laiku.

Tādu piederumu izmantošana, kurus ražotājs nav skaidri ieteicis, var izraisīt lietotāja ievainojumus un ierīces bojājumus. Šī iemesla dēļ jāizmanto tikai oriģinālie piederumi

Spiedienu var rasties neatkarīgi no vadības iestatījumiem vai piemērotā spiediena. Regulāri pārbaudiet apstrādātās vietas.



Nekavējoties pārtrauciet lietošanu pie sāpēm vai diskomforta.

Lai novērstu ievainojumus, masējot, turiet pirkstus, matus un citas ķermeņa daļas prom no vārpstas un aplikatora aizmugures.

Nepieskarieties Physio Boost Mini priekšējai daļai, kamēr ierīce darbojas, bez uzstādītajiem masāžas piederumiem. Physio Boost Mini nav paredzēts nepārtrauktai lietošanai. Nelietojiet ierīci ilgāk par 10 minūtēm. Pēc 10 minūšu sesijas ar Physio Boost Mini, pirms turpināt lietošanu, pagaidiet vismaz 5 minūtes.

Nelietojiet ierīci uz kakla, uz sirds, uz galvas vai dzimumorgānu vai ķermeņa atveru rajonā. Nepareiza ierīces lietošana/rīkošanās var kaitēt veselībai. Lietotājs to dara uz savu risku.

Pārliecinieties, ka ierīces ventilācijas atverēs nav putekļu un netīrumu.

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai Physio Boost Mini un masāžas piederumos nav bojājumu (e. ģ. asas malas).

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām, kurām nav fizisko, maņu vai garīgo spēju, vai arī vajadzīgo spēju un/vai zināšanu, lai to varētu droši lietot. Bērni ir jāpieskata, lai viņi nespēlētu ar ierīci.

Ja Jums ir viens vai vairāki no šiem stāvokļiem, pirms Physio Boost Mini lietošanas konsultējieties ar ārstu vai terapeitu: grūtniecība, diabēts ar tādām komplikācijām kā neiropātija vai retinīts, elektrokardiostimulators, nesenas operācijas, epilepsija vai migrēna, spondilolistēze vai spondiloze, nesena locītavu maiņa vai intrauterīna ierīce, metāla tapas vai plāksnes.

---

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms pirmās lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus.

### IERĪCES UZLĀDE

Lai novērstu uzlādējamā akumulatora bojājumus, pirms ierīces pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Pārliecinieties, vai Physio Boost Mini ir izslēgts.

Izmantojiet komplektā iekļauto uzlādes kabeli, lai ierīci savienotu ar elektroīkla adapteri ar USB ligzdu (nav iekļauts komplektā). Statusa displeja gaismas diodes mirgos mainīgā veidā, lai norādītu, ka ierīce tiek uzlādēta. Kad iedegas visas četras gaismas diodes, ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Pēc uzlādes vai pirms lietošanas atvienojiet uzlādes kabeli no ierīces.



## MASĀŽAS STIPRINĀJUMU PIESTIPRINĀŠANA

Izslēdziet Physio Boost Mini un uzmanīgi ievietojiet masāžas stiprinājumu tam paredzētajā atverē, līdz masāžas stiprinājuma apakšpuse ir vienā līmenī ar Physio Boost priekšējo daļu.

Masējiet vēlamo ķermeņa daļu vēlamajā ātrumā un pielieciet nepieciešamo spiedienu.


Pēc ierīces izslēgšanas masāžas stiprinājumu var manuāli noņemt un apmainīt.

## ĀTRUMA REGULĒŠANA

Nospiediet daudzfunkcionālo pogu un turiet to apmēram divas sekundes, līdz displejs nepārtraukti iedegas. Tagad ierīce ir gatava darbam. Īsi nospiediet daudzfunkcionālo pogu, lai iedarbinātu ierīci 1. līmenī. Nospiediet to divreiz, lai pārslēgtos uz 2. līmeni, trīs reizes 3. līmenim un četras reizes 4. līmenim. Vēlreiz nospiediet daudzfunkcionālo pogu, lai pārslēgtos atpakaļ uz 1. līmeni. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet daudzfunkcionālo pogu un turiet to apm. divas sekundes.

Baltās gaismas diodes norāda pašlaik izvēlēto līmeni (1-4).





Nospiediet daudzfunkcionālo pogu un turiet to apm. divas sekundes, līdz baltās gaismas diodes izdziest, lai izslēgtu Physio Boost Mini.

### **PIEZĪMES**

Ja pamanāt baltu atlikumu uz masāžas stiprinājumu vārpstas, to var viegli notīrīt ar mitru drānu un nelielu daudzumu mazgāšanas šķidrums. Šo atlikumu neizraisa kvalitātes defekts, bet gan tehniski nepieciešama smērviela, kas tiek izmantota ierīcē.

### **UZGLABĀŠANAS**

Lai pēc iespējas ilgāk saglabātu uzlādējamā akumulatora pilno ietilpību, jums vajadzētu pilnībā uzlādēt akumulatoru ik pēc 2 līdz 3 mēnešiem, pat ja ierīci neizmantojat. Uzlādējiet akumulatoru vidē no +10 līdz +40 °C. Akumulators vislabāk uzlādēsies istabas temperatūrā. Jo zemāka ir apkārtējā temperatūra, jo īsāks ir darbības laiks.

### **IERĪCES TĪRĪŠANA UN KOPŠANA**

Pirms tīrīšanas ierīcei jābūt pilnībā izslēgtai.

Izmantojiet nedaudz mitru drānu, lai notīrītu virsmu, un mīkstu drānu, lai nosausināt ierīci. Nelietojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus.

Izmantojiet piemērotu, spirtu/ūdeni saturošu dezinfekcijas līdzekli, lai dezinficētu ierīci un piederumus. Regulāri noslaukiet ierīci ar mitru drānu, lai noņemtu dezinfekcijas līdzekļa atlikumus.

Atkarībā no lietošanas intensitātes ierīcei jābūt ieeļļotai ik pēc 3-6 mēnešiem, bet vismaz tad, ja rodas trokšņi. Lai to izdarītu, vienkārši ielieciet kādu smērvielu, e. g. silikona eļļu vai WD-40, starp korpusu un masāžas galviņas turētāju un ieslēdziet ierīci uz apm. 10 sekundēm. Pēc tam izslēdziet ierīci un noslaukiet lieko smērvielu ar absorbējošu audu.



### **UZZTURĒŠANA**

Neatveriet Physio Boost Mini akumulatoru.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nemēģiniet labot to, vai kļūdu, pats izjaucot ierīci. To darot, garantija tiks automātiski anulēta. Remontu drīkst veikt tikai sertificēts elektrotehniķis.

### **UTILIZĀCIJA**

Atsavināšanas gadījumā PINO GmbH var atbrīvoties no ierīces jūsu vietā. Lai to izdarītu, ierīce ir jāatdod PINO GmbH apmaksāta pasta izdevumi ar skaidru pieprasījumu to iznīcināt.

### **ATRUNA**

Mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces lietošanas dēļ.