



AGILOMB SACROILIAC

Ref. TO1106 Sakroiliakāla balsta korsete

APRAKSTS

Jaunākās paaudzes ortopēdiskais medicīniskais atbalsts, kas ir unikāls savā kategorijā. Inovatīvais dizains un elastīgais, 100% elpojošais C6Tex audums ar oglekļa šķiedru (Tenortho ekskluzīvs materiāls) nodrošina lielisku piegulšanu un vienlaikus mugurkaula stabilitāti. Elastīgās siksnas ir īpaši izstrādātas vieglai un kontrolētai nospriegošanai, tādēļ korsete ir piemērota vieglāku jostas un krustu daļas patoloģiju kontrolei. To ir viegli uzvilkt; tā lieliski pieguļ un nodrošina pareizu muguras atbalstu, labsajūtu un komfortu ikdienas aktivitātēs.

RAKSTUROJUMS

- C6Tex audums ar antistatiskām īpašībām: īpašās šķiedras absorbē un izkliedē elektriskos lādiņus.
- Elpojošs, termoregulējošs, bakteriostatisks un hipoalerģisks materiāls; veicina asinsriti un šūnu apgādi ar skābekli, mazinot pienskābes koncentrāciju.
- Priekšējā aizdare ar līplenti. Elastīgās muguras siksnas ļauj individuāli pielāgot spiedienu. Jostas daļu atbalsta pielāgojamas korsetes iekšējās ribas. Vēdera daļu atbalsta slīpas spirālveida ribas.
- Augstums priekšpusē: 13 cm; aizmugurē: 20 cm.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Terapeitiskas, neinvazīvas medicīniskās ierīces stājas problēmu korekcijai.

INDIKĀCIJAS

Pārmērīga slodze saliekšanās un rotācijas laikā • apgrūtināta iegurņa stāvokļa atjaunošanās pēc dzemdībām • atbalsts pēc operācijas • ilgstoša nepareiza poza • artroze • locītavu nestabilitāte • locītavu blokāde • iegurņa apvidus mialģija un tendinopātija • iegurņa gredzena nestabilitāte • strukturālas saslimšanas pēc mugurkaula jostas daļas spondilodēzes • atkārtotu locītavu blokāžu un miotendinopātiju profilakse • kaunuma simfīzes plīsums • sāpju mazināšana ilgstošas sēdēšanas vai stāvēšanas dēļ.

UZVILKŠANA

Nevalkājiet ortozi tieši uz ādas.

1. Pilnībā atveriet korseti, turot īkšķa cilpu uz augšu.
2. Priekšpusē ir trīs līplentes aizdares: viena lielāka vēdera daļā un divas mazākas, slīpas sānos.
3. Vispirms pielāgojiet līplentes siksnas, piestiprinot tās pie sānu slīpajām aizdarēm.
4. Uzvelciet korseti un aizveriet lielo vēdera līplentes aizdari tik cieši, lai korsete būtu pareizi nostabilizēta.
5. Satveriet līplentes siksnas un velciet līdz lielajai vēdera aizdarei; nostipriniet tās centrālajā daļā.
6. Pareizai novietošanai pārliecinieties, ka korsetes apakšējā mala aizmugurē atrodas sēžas apvidus vidū.



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho



AGILOMB SACROILIAC

Ref. TO1106 Sakroiliakāla balsta korsete

LIETOTĀJI UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Tenortho ierīces parasti ir paredzētas pieaugušajiem un personām, kas vecākas par 12 gadiem. Izstrādājumu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim (skatīt instrukcijas sadaļu "Indikācijas"). Dažas ierīces, kurām ir bērnu izmēri vai kuras izgatavo pēc individuāliem mēriem, var lietot arī bērniem no 3 gadu vecuma. Grūtniecēm jāievēro piesardzība un jākonsultējas ar ārstu pirms tādu ierīču lietošanas, kas var ietekmēt dzemdes apvidu (kakla apkakles ar krūšu un muguras stabilizatoriem, jostas daļas atbalsta jostas, korsetes, plecu un gūžas ortozes u. c.). Īpaša uzmanība un rūpīgs ārsta izvērtējums nepieciešams, lietojot ortozes, kas var ietekmēt elpošanu pacientiem ar saslimšanām vai elpošanas grūtībām (hiperekstensijas ortozes, korsetes, kakla apkakles, plecu ortozes u. c.). Izstrādājumu ar magnetoterapiju (TO1308MG - TENOMAG) nedrīkst lietot grūtnieces un personas ar implantētām ierīcēm (elektrokardiostimulatoriem, defibrilatoriem vai fiksētiem implantiem). Skatiet magnetoterapijas ierīces ražotāja lietošanas instrukciju.

KOPŠANA

Ja iespējams, pirms mazgāšanas izņemiet šinas un metāla karkasus. Mazgājiet ar rokām siltā ūdenī ar maigām ziepēm; pēc tam izskalojiet tīrā ūdenī. Žāvējiet tālu no siltuma avotiem. Ja rodas problēmas vai nepieciešams nomainīt nolietotas daļas, sazinieties ar ortopēdijas tehniķi. Neizmetiet izstrādājumu apkārtējā vidē.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ierīce nedrīkst radīt spiedienu uz traumētām vai pietūkušām ķermeņa daļām. Ja rodas šaubas par uzlikšanu, konsultējieties ar ortopēdijas tehniķi. Nevalkājiet ierīci atklātas liesmas tuvumā.

VESELĪBAS UZRAUDZĪBA

Lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības uzraudzību un pēc iespējas drošāku Tenortho izstrādājumu lietošanu, par visām nopietnām nevēlamām reakcijām, kas rodas izstrādājuma lietošanas laikā, ziņojiet, nosūtot e-pastu uz: ufficiotecnico@tenortho.com

Par notikumu ziņojiet arī kompetentajām iestādēm.

BRĪDINĀJUMI

Ierīces lietošana jānorāda vai jāizraksta ārstam, un tā jāuzliek ortopēdijas tehniķim, kurš ir kompetentais speciālists gan ierīces uzlikšanā, gan informēšanā par drošu lietošanu. Ierīce jāuzliek īpaši rūpīgi, lai nodrošinātu efektivitāti, panesamību un pareizu darbību. Par jebkādam konstrukcijas vai citām izmaiņām jālemj ārstam, un tās jāveic ortopēdijas tehniķim. Izstrādājumu ieteicams lietot individuāli. Tieša ierīces saskare ar ādu īpaši jutīgām personām var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Nelieciet izstrādājumu uz bojātas ādas. Nepanesamības gadījumā nekavējoties sazinieties ar ārstu.

UTILIZĀCIJA

Neizmetiet izstrādājumu apkārtējā vidē. Utilizējiet to saskaņā ar pašvaldībā un/vai valstī spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Izstrādājums nerada kontaminācijas risku.

GARANTĪJA


Tenortho apliecina, ka izstrādājums ir izgatavots pareizi, izmantoti augstākās kvalitātes materiāli, veikti visi nepieciešamie testi un tas atbilst spēkā esošajiem standartiem un normatīvajiem aktiem. Tenortho apņemas novērst visus uzņēmumam attiecināmos izstrādājumu defektus, kvalitātes trūkumus vai neatbilstības, kas radušās 6 (sešu) mēnešu laikā no izstrādājumu piegādes un par kuriem paziņots nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas. Tenortho var izvēlēties bojāto izstrādājumu salabot vai nomainīt. Garantijas ietvaros nomainītajiem vai salabotajiem izstrādājumiem tiek piemērota tāda pati 6 (sešu) mēnešu garantija no remonta vai nomaiņas dienas. Par neatbilstībām, uz kurām attiecas likumā noteiktā garantija, netiek uzskatīti defekti vai bojājumi, ko izraisījuši nejauši notikumi vai lietotāja rīcība (piemēram, bet ne tikai, neuzmanība, netīrīšana vai nepareiza tīrīšana), izstrādājumu lietošana neatbilstoši paredzētajam mērķim vai parasts nolietojums. Saglabājiet iepakojumu, etiķetes un pirkuma čeku, lai nodrošinātu pareizu partijas izsekojamību.




Mazgāt ar rokām
siltā ūdenī



Nežāvēt veļas
žāvētājā

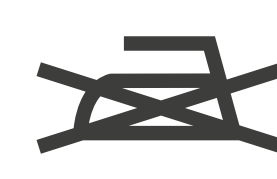

Negludināt

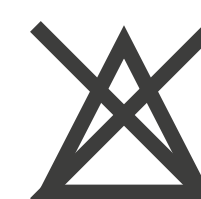

Nebalināt



Izstrādājums atbilst ES Regulai 745/2017 - Izdots 04/2021 - Red. 0
Sertificēts uzņēmums: kvalitātes sistēma atbilst ISO 9001:2015 un ISO 13485:2016



Ražotājs

REF

Artikula numurs

LOT

Partijas numurs



Medicīniska ierīce