



G-Back+

Ref. TO1206 Puscieta krūšu un jostas daļas korsete ar grafēnu un apgriezta virziena plecu siksnām



LIETOTĀJI UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Tenortho ierīces parasti ir paredzētas pieaugušajiem un personām, kas vecākas par 12 gadiem. Izstrādājumu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim (skatīt instrukcijas sadaļu "Indikācijas"). Dažās ierīcēs, kurām ir bērnu izmēri vai kuras izgatavo pēc individuāliem mēriem, var lietot arī bērniem no 3 gadu vecuma. Grūtniecēm jāievēro piesardzība un jākonsultējas ar ārstu pirms tādu ierīču lietošanas, kas var ietekmēt dzemdes apvidu (kakla apkakles ar krūšu un muguras stabilizatoriem, jostas daļas atbalsta jostas, korsetes, plecu un gūžas ortozes u. c.). Īpaša uzmanība un rūpīgs ārsta izvērtējums nepieciešams, lietojot ortozes, kas var ietekmēt elpošanu pacientiem ar sasilšanās vai elpošanas grūtībām (hiperekstensijas ortozes, korsetes, kakla apkakles, plecu ortozes u. c.). Izstrādājumu ar magnetoterapiju (TO1308MG - TENOMAG) nedrīkst lietot grūtnieces un personas ar implantētām ierīcēm (elektrokardio stimulatoriem, defibrilatoriem vai fiksētiem implantiem). Skatiet magnetoterapijas ierīces ražotāja lietošanas instrukciju.

KOPŠANA

Ja iespējams, pirms mazgāšanas izņemiet šinas un metāla karkasus. Mazgājiet ar rokām siltā ūdenī ar maigām ziepēm; pēc tam izskalojiet tīrā ūdenī. Žāvējiet tālu no siltuma avotiem. Ja rodas problēmas vai nepieciešams nomainīt nolietotas daļas, sazinieties ar ortopēdijas tehniķi. Neizmetiet izstrādājumu apkārtējā vidē.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ierīce nedrīkst radīt spiedienu uz traumētām vai pietūkušām ķermeņa daļām. Ja rodas šaubas par uzlikšanu, konsultējieties ar ortopēdijas tehniķi. Nevalkā jiet ierīci atklātas liesmas tuvumā.

VESELĪBAS UZRAUDZĪBA

Lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības uzraudzību un pēc iespējas drošāku Tenortho izstrādājumu lietošanu, par visām nopietnām nevēlamām reakcijām, kas rodas izstrādājuma lietošanas laikā, ziņojiet, nosūtot e-pastu uz: ufficiotecnico@tenortho.com

Par notikumu ziņojiet arī kompetentajām iestādēm.

BRĪDINĀJUMI

Ierīces lietošana jānorāda vai jāizraksta ārstam, un tā jāuzliek ortopēdijas tehniķim, kurš ir kompetentais speciālists gan ierīces uzlikšanā, gan informēšanā par drošu lietošanu. Ierīce jāuzliek īpaši rūpīgi, lai nodrošinātu efektivitāti, panesamību un pareizu darbību. Par jebkādam konstrukcijas vai citām izmaiņām jālemj ārstam, un tās jāveic ortopēdijas tehniķim. Izstrādājumu ieteicams lietot individuāli. Tieša ierīces saskare ar ādu īpaši jutīgām personām var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Nelieciet izstrādājumu uz bojātas ādas. Nepanesamības gadījumā nekavējoties sazinieties ar ārstu.

UTILIZĀCIJA

Neizmetiet izstrādājumu apkārtējā vidē. Utilizējiet to saskaņā ar pašvaldībā un/vai valstī spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Izstrādājums nerada kontaminācijas risku.

GARANTĪJA


Tenortho apliecina, ka izstrādājums ir izgatavots pareizi, izmantoti augstākās kvalitātes materiāli, veikti visi nepieciešamie testi un tas atbilst spēkā esošajiem standartiem un normatīvajiem aktiem. Tenortho apņemas novērst visus uzņēmumam attiecināmos izstrādājumu defektus, kvalitātes trūkumus vai neatbilstības, kas radušās 6 (sešu) mēnešu laikā no izstrādājumu piegādes un par kuriem paziņots nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas. Tenortho var izvēlēties bojāto izstrādājumu salabot vai nomainīt. Garantijas ietvaros nomainītajiem vai salabotajiem izstrādājumiem tiek piemērota tāda pati 6 (sešu) mēnešu garantija no remonta vai nomaiņas dienas. Par neatbilstībām, uz kurām attiecas likumā noteiktā garantija, netiek uzskatīti defekti vai bojājumi, ko izraisījuši nejauši notikumi vai lietotāja rīcība (piemēram, bet ne tikai, neuzmanība, netīrīšana vai nepareiza tīrīšana), izstrādājumu lietošana neatbilstoši paredzētajam mērķim vai parasts nolietojums. Saglabājiet iepakojumu, etiķetes un pirkuma čeku, lai nodrošinātu pareizu partijas izsekojamību.



Mazgāt ar rokām
siltā ūdenī



Nežāvēt veļas
žāvētājā

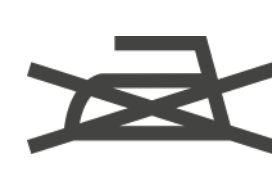

Negludināt



Nebalināt



Izstrādājums atbilst ES Regulai 745/2017 - Izdots 04/2021 - Red. 0
Sertificēts uzņēmums: kvalitātes sistēma atbilst ISO 9001:2015 un ISO 13485:2016



Ražotājs

REF

Artikula numurs

LOT

Partijas numurs



Medicīniska ierīce



G-Back+

Ref. TO1206 Puscieta krūšu un jostas daļas korsete ar grafēnu un apgriezta virziena plecu siksnām



APRAKSTS

Jaunākās paaudzes ortopēdiskais medicīniskais atbalsts, kas ir unikāls savā kategorijā. Inovatīvais dizains un audums ar grafēna membrānu nodrošina lielisku piegulšanu un vienlaikus stingru mugurkaula stabilizāciju. Elastīgās siksnas ir īpaši izstrādātas vieglai un kontrolētai nospriegošanai, tādēļ korsete ir piemērota vieglāku muguras patoloģiju kontrolei. To ir viegli uzvilkt; tā lieliski pieguļ un nodrošina pareizu muguras atbalstu, labsajūtu un komfortu ikdienas aktivitātēs.

RAKSTUROJUMS

- Audums ar grafēna membrānu un antistatiskām īpašībām: īpašās vadītspējīgās šķiedras absorbē un izkliedē elektriskos lādiņus.
- Elpojošs, termoregulējošs, bakteriostatisks un hipoalerģisks materiāls.
- Priekšējā aizdare ar līplenti. Elastīgās, rombveida muguras siksnas ļauj individuāli pielāgot spiedienu. Jostas daļu atbalsta pielāgojamas korsetes iekšējās ribas. Vēdera daļu atbalsta slīpas spirālveida ribas.
- Apgriezta virziena plecu siksnas nodrošina lielāku plecu vilkmi no priekšpusēs uz aizmuguri un palīdz iztaisnot muguru stāvus pozīcijā.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Terapeitiskas, neinvazīvas medicīniskās ierīces stājas problēmu korekcijai.

INDIKĀCIJAS

Osteoporoze • osteomalācija • krūšu daļas kifoze • osteolīze • mugurkaula krūšu un jostas daļas skriemeļu lūzumu sekas • muguras sāpes.

UZVILKŠANA

Nevalkājiēt ortozi tieši uz ādas.

1. Pilnībā atveriet korseti.
2. Priekšpusē ir trīs līplentes aizdares: viena lielāka vēdera daļā un divas mazākas, slīpas sānos.
3. Vispirms pielāgojiet līplentes siksnas, piestiprinot tās pie sānu slīpajām aizdarēm.
4. Uzvelciet korseti un aizveriet lielo vēdera līplentes aizdaru tik cieši, lai korsete būtu pareizi nostabilizēta.
5. Satveriet līplentes siksnas un velciet līdz lielajai vēdera aizdarei; nostipriniet tās centrālajā daļā.
6. Vispirms nostipriniet apakšējās līplentes siksnas, pēc tam plecu siksnas.
7. Pareizai novietošanai pārliecinieties, ka korsetes apakšējā mala aizmugurē atrodas sēžas apvidus vidū.
8. Satveriet plecu siksnas zem pleciem un pēc tam pārlieciet tās pāri pleciem. Sakrustojiet siksnas cilpā, kas piestiprināta korsetes mugurdaļas augšējā centrālajā daļā. Nostipriniet plecu siksnas ar īpašajām līplentes siksnām pie centrālās vēdera līplentes aizdares.

MADE

IN ITALY

tenortho

Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho