




ASPEN EVERGREEN™ 621 SI

JOSTA

SAKROILIĀLĀ ORTOZE

Lietošanas instrukcija

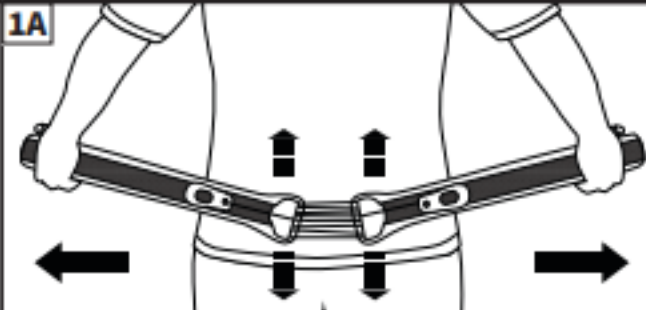

LATVIEŠU

1. NOVIETOŠANA

A. Novietojiet ortozi aptuveni 2,5 cm (1 collas) attālumā zem gurnu platākās daļas (sakroiliālās locītavas līmeņi). Centrējiet abus mugurējos paneļus un novietojiet tos simetriski uz muguras.
B. Pārlieciet ortozes galus vienu pār otru un, piespiežot aizdari, nostipriniet ortozi.

2. SAVILKŠANA

Lai nodrošinātu kompresiju, satveriet savilkšanas cilpas ar īkšķiem un rādītājpirkstiem.

3. PIELĀGOŠANA

Kad sasniegta vēlāmā kompresija, piestipriniet savilkšanas cilpas pie sānu paneļu līpošās aizdares cilpiņu materiāla.

IZMĒRU TABULA		
Izmērs	Apkārtmērs (collas)	Apkārtmērs (cm)
S (mazs)	25-41	64-104
M (vidējs)	35-50	89-127
L (liels)	45-60	114-152

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Sakrālā apvidus stabilizācijas nodrošināšanai.

INDIKĀCIJAS

Kaunuma simfizes disfunkcija; sakroiliālās locītavas disfunkcija; hroniska sakroiliālā apvidus atbalsta nepieciešamība; muguras lejasdaļas saišu sastiepumi un muskuļu pārslodze; sakroiliālās locītavas fiksācijas operācija (artrodēze); bumbiervida muskuļa sindroms; iegurņa muskuļu sāpes; sakroiliālās sāpes; sāpes muguras lejasdaļā; sakroileīts; artrīts; išiass.

KONTRINDIKĀCIJAS

Paaugstināta jutība vai alerģija pret jebkuru ortozes materiālu. Limfātisko audu pietūkums, ko izraisa asinsrites traucējumi. Pacienti, kuriem saskaņā ar medicīniskiem norādījumiem ortozes lietošana nav atļauta.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET INSTRUKCIJU. Pirms ierīces uzlikšanas jāapgūst tās pareiza lietošana. Šie norādījumi ir tikai vadlīnijas, nevis medicīniski ieteikumi. Ja jums ir nopietna saslimšana, pirms izstrādājuma lietošanas noteikti konsultējieties ar kvalificētu veselības aprūpes speciālistu. Lai izstrādājums darbotos efektīvi, tas pareizi jāpielāgo. Noteiktos gadījumos šo izstrādājumu var nozīmēt ārsts. Papildu informāciju skatiet ierobežotās garantijas noteikumos.

KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Mazgāt tikai ar rokām 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Žāvēt gaisā. Nelietot balinātāju vai citas ķīmiskas vielas.

MATERIĀLI

Neilons, poliesteris, HDPE, PVC, poliuretāns, UHMWPE.

NESATUR DABĪGĀ KAUCUKA LATEKSU.

UTILIZĀCIJA

Izstrādājumu var droši utilizēt saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

ZIŅOŠANA

Par jebkuru nopietnu negadījumu saistībā ar šīs ierīces lietošanu ziņojiet savas valsts kompetentajai iestādei un ražotājam, kas norādīts šajā dokumentā.

IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantē sākotnējam šī izstrādājuma pircējam, ka izstrādājumam nav materiālu un izgatavošanas defektu. Garantijas pārkāpuma gadījumā Aspen Medical Products, LLC vienīgais pienākums ir salabot vai nomainīt bojāto izstrādājumu vai tā daļu(-as).

Aspen Medical Products, LLC nav saistību saskaņā ar šo ierobežoto garantiju, ja:
(a) izstrādājums nav iegādāts no Aspen Medical Products, LLC vai tā pilnvarota izplatītāja;
(b) izstrādājums ir pārveidots;
(c) izstrādājumā ievietotas detaļas, ko nav piegādājis Aspen Medical Products, LLC; vai
(d) izstrādājums netiek lietots saskaņā ar Aspen Medical Products, LLC lietošanas instrukciju.

IEPRIEKŠ MINĒTAIS IR VIENĪGAIS UN EKSKLUZĪVAIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS IZSTRĀDĀJUMA DARBĪBAS TRAUCĒJUMU VAI DEFektu GADĪJUMĀ. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ATSAKĀS NO VISĀM CITĀM TIESĀM VAI NETIESĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI KONKRĒTĀM MĒRĶIM. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANAS VAI IR AR TO SAISTĪTI, IR IEROBEŽOTI AR TĀ PIRKUMA CENU. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDU VEIDU NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM.

Šī garantija piešķir jums konkrētas juridiskas tiesības. Jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.

Jūsu reģiona pilnvaroto izplatītāju saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma.



MEDICĪNISKA IERĪCE



VIENAM PACIENTAM • VAIRĀKKĀRTĒJAI LIETOŠANAI



UZMANĪBU



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Pat. aspenmp.com/patents

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200
©2021 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.
EG00690 revised 06/2021