

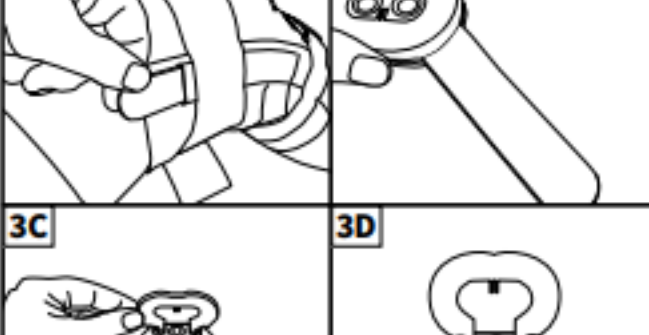
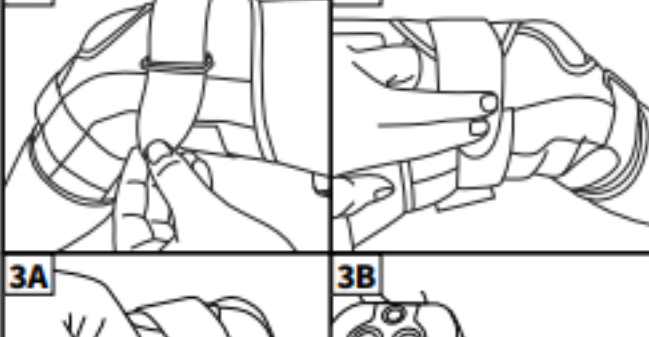
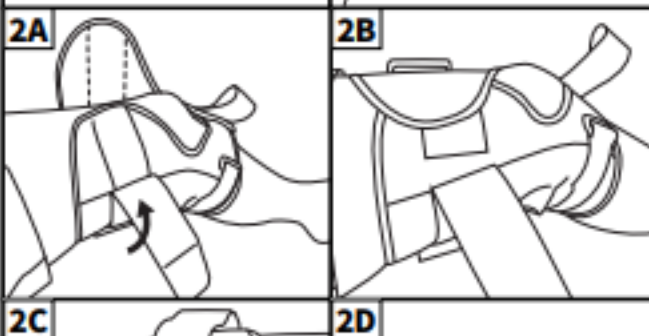
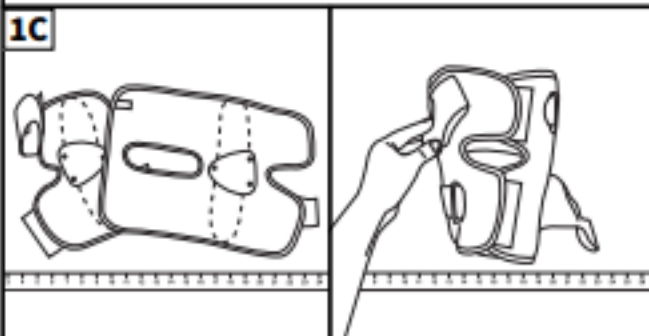
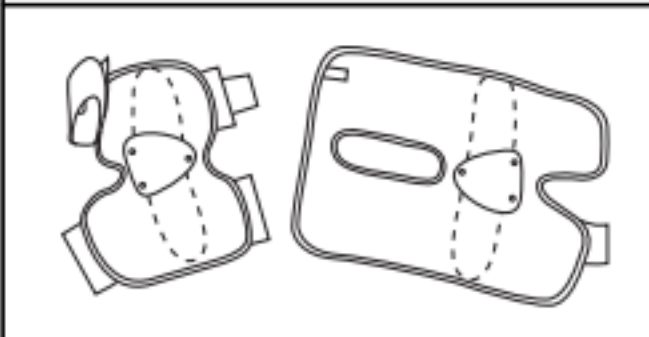


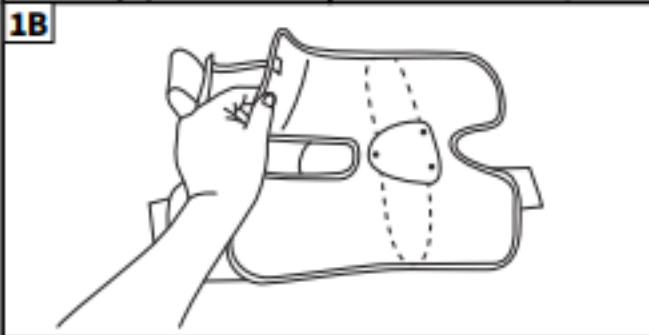

ASPEN® UNIVERSAL ROM KNEE

CEĻA ORTOZE

Lietošanas instrukcija

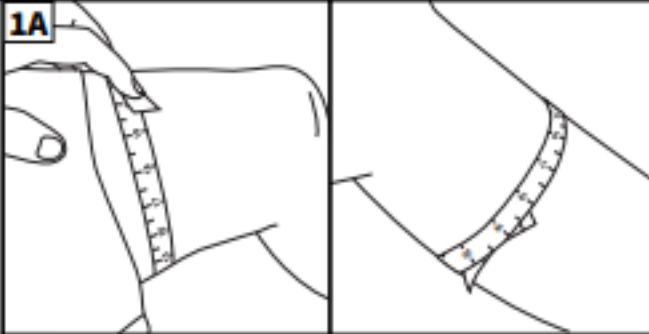

LATVIEŠU

1. IZMĒRA PIELĀGOŠANA

- A.** Lai pareizi pielāgotu ortozes izmēru, izmēriet augšstilba un apakšstilba apkārtmēru aptuveni 15 cm (6 collas) attālumā no ceļa kauliņa centra.
- B.** Atveriet ortozes priekšējos atlokus un izklājiet ortozi uz līdzenas virsmas. Atvienojiet ortozes kreiso un labo daļu, kā parādīts attēlā.
- C.** Pievienojiet kreiso un labo daļu atpakaļ tā, lai ortoze atbilstu augšstilba un apakšstilba mērījumiem. Nostipriniet āķīšu un cilpiņu aizdāri.

2. UZLIKŠANA

- A.** Atveriet ortozi un novietojiet to aiz ceļa.
- B.** Aptiniet augšējo atloku ap augšstilbu un apakšējo atloku ap apakšstilbu. Pārliedzieties, ka ceļa kauliņš ir centrēts ir centrēts ortozē pieguļ ērti. Atlokiem pietiekami jāpārklājas, lai aizdares āķīši nesaskartos ar pacienta ādu.
- C.** Sākot ar apakšējo siksnu, izvelciet siksnas ar āķīšu un cilpiņu aizdāri caur D veida gredzeniem un pievelciet līdz vēlamajam atbalsta līmenim.
- D.** Nostipriniet āķīšu un cilpiņu aizdāri. Aizmugurējās siksnas var pielāgot papildu komfortam.

3. ŠARNĪRA PIELĀGOŠANA

- A.** Lai pielāgotu šarnīru, izņemiet to no ortozes augšdaļas. To bieži ir vieglāk izdarīt, kad ortoze nav uzlikta pacientam.
- B.** Izmantojiet cietu virsmu, lai pielāgotu šarnīra balstu formu un nodrošinātu maksimālu komfortu un atbalstu.
- C.** Lai pielāgotu kustību apjomu, paceliet šarnīra vāciņu.
- D.** Ievietojiet tapas atbilstoši vēlamajam saliekšanas un iztaisnošanas leņķim. Ievietojiet šarnīru atpakaļ tā kabatā.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Ceļa stabilizācijai frontālajā plaknē, vienlaikus pieļaujot saliekšanu un iztaisnošanu sagitālajā plaknē noteiktajā kustību apjomā.

INDIKĀCIJAS

Ceļa nestabilitāte locītavas vajīguma dēļ.

KONTRINDIKĀCIJAS

Paaugstināta jutība vai alerģija pret jebkuru ortozes materiālu. Limfātisko audu pietūkums, ko izraisa asinsrites traucējumi. Pacienti, kuriem saskaņā ar medicīniskiem norādījumiem ortozes lietošana nav atļauta.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET INSTRUKCIJU. Pirms ierīces uzlikšanas jāapgūst tās pareiza lietošana. Šie norādījumi ir tikai vadlīnijas, nevis medicīniski ieteikumi. Ja jums ir nopietna saslimšana, pirms izstrādājuma lietošanas noteikti konsultējieties ar kvalificētu veselības aprūpes speciālistu. Lai izstrādājums darbotos efektīvi, tas pareizi jāpielāgo. Noteiktos gadījumos šo izstrādājumu var nozīmēt ārsts. Papildu informāciju skatiet ierobežotās garantijas noteikumos.

KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Mazgāt tikai ar rokām 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Žāvēt gaisā. Nelielot balinātāju vai citas ķīmiskas vielas.

MATERIĀLI

Neilons, acetāls, alumīnijs, neoprēns, poliuretāna šķiedra (Lycra), termoplastisks elastomērs.

NESATUR DABĪGĀ KAUCUKA LATEKSU.

UTILIZĀCIJA

Izstrādājumu var droši utilizēt saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

ZIŅOŠANA

Par jebkuru nopietnu negadījumu saistībā ar šīs ierīces lietošanu ziņojiet savas valsts kompetentajai iestādei un ražotājam, kas norādīts šajā dokumentā.

IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantē sākotnējam šī izstrādājuma pircējam, ka izstrādājumam nav materiālu un izgatavošanas defektu. Garantijas pārkāpuma gadījumā Aspen Medical Products, LLC vienīgais pienākums ir salabot vai nomainīt bojāto izstrādājumu vai tā daļu(-as).

Aspen Medical Products, LLC nav saistību saskaņā ar šo ierobežoto garantiju, ja:

- (a) izstrādājums nav iegādāts no Aspen Medical Products, LLC vai tā pilnvarota izplatītāja;
- (b) izstrādājums ir pārveidots;
- (c) izstrādājumā ievietotas detaļas, ko nav piegādājis Aspen Medical Products, LLC; vai
- (d) izstrādājums netiek lietots saskaņā ar Aspen Medical Products, LLC lietošanas instrukciju.

IEPRIEKŠ MINĒTAIS IR VIENĪGAIS UN EKSKLŪZĪVAIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS IZSTRĀDĀJUMA DARBĪBAS TRAUCĒJUMU VAI DEFEKTU GADĪJUMĀ. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ATSAKĀS NO VISĀM CITĀM TIESĀM VAI NETIESĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI KONKRĒTAM MĒRĶIM. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANAS VAI IR AR TO SAISTĪTI, IR IEROBEŽOTI AR TĀ PIRKUMA CENU. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDU VEIDU NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM.

Šī garantija piešķir jums konkrētas juridiskas tiesības. Jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.

Jūsu reģiona pilnvaroto izplatītāju saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma.

MD MEDICĪNISKA IERĪCE

1P VIENAM PACIENTAM - VAIRĀKKĀRTĒJAI LIETOŠANAI

! UZMANĪBU



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands