

KAKLA ORTOZE

Lietošanas instrukcija



MD MEDICĪNISKA IERĪCE

1 PERSON FOR USE - VAIRĀKKĀRTĒJAI LIETOŠANAI

! UZMANĪBU




Pat. aspenmp.com/patents

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200
©2023 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.
RC0009Y revised 03/2023

GUĻŪS UZ MUGURAS

VERTIKĀLĀ STĀVOKLĪ

LATVIEŠU

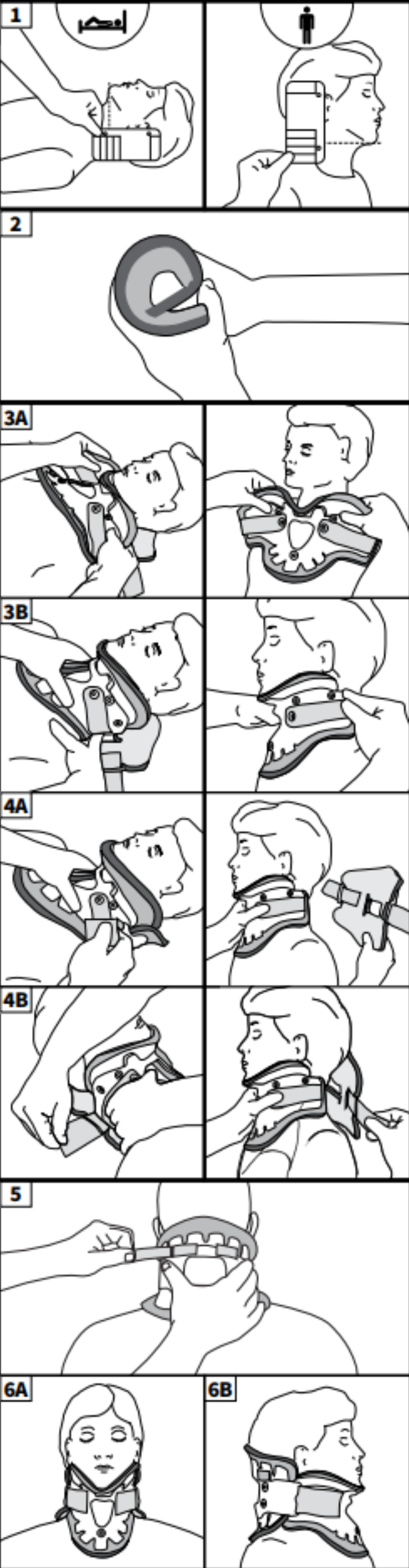

1. IZMĒRA IZVĒLE
Turiet galvu vēlamajā stāvoklī. Novietojiet izmēra noteikšanas mērierīci pie galvas pleca muskuļa augstākā punkta līmenī. Novelciet iedomātu līniju no zoda apakšējās malas līdz mērierīcei un izvēlieties ortozes izmēru.

2. SĀKOTNĒJĀ FORMAS PIEŠĶIRŠANA
Saritiniēt aizmugurējo paneli.

3. PRIEKŠĒJĀ PANEĻA NOVietoŠANA
A. Atlieciet priekšējā paneļa sānus uz āru. Novietojiet zoda balstu tieši zem zoda. Parasti zodam jāsniedzas pāri plastmasas malai.
B. Virziet priekšējā paneļa sānus uz augšu pāri plecu muskuļiem ap kaklu.

4. PRIEKŠĒJĀ PANEĻA NOSTIPRINĀŠANA
A. Turot priekšējo paneli ar vienu roku, centrējiet aizmugurējo paneli un piestipriniet tā abas puses pie priekšējā paneļa.
B. Ar vienu roku noturiet priekšējo paneli vietā, velciet aizmugurējā paneļa siksnas uz āru un nostipriniet tās ortozes priekšpusē. Atkārtojiet pēc vajadzības, lai nodrošinātu pareizu piegulšanu.

5. PIELĀGOŠANA
Pievelciet pakauša atbalsta siksnu (Occipital Support Strap™), piespiežot aizmugurējo paneli kaklam un velkot, līdz sikсна vairs nav vaļīga.
PIEZĪME. Pacientiem, kuri guļ uz muguras, pakauša atbalsta sikсна nav jāpievelk.

6. PAREIZA PIEGULŠANA
A. Pacienta zodam jāatrodas vienā līmenī ar ortozes zoda balsta galu. Iekšējais stienis trahejas atveres zonā nedrīkst skart elpceļus. Ja tas notiek, pielāgojiet nākamā izmēra ortozi.
B. Ortozei jābūt nostiprinātai bez vaļīguma. Aizmugurējām panelīm jābūt centrētam. Skatoties no priekšpuses, aizmugurējām siksnām jāatrodas simetriski.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS
Mugurkaula kakla daļas kustību ierobežošanai.

INDIKĀCIJAS
Dekompresijas procedūras; lūzumu ārstēšana; pēcoperācijas stabilizācija; kakla pātagas cirtiena trauma; saišu un muskuļu sastiepumi; cervikogēnas galvassāpes; kakla starpskriemeļu disku sindroms; muskuļu un skeleta sāpes; radikulopātija.

KONTRINDIKĀCIJAS
Paaugstināta jutība vai alerģija pret jebkuru ortozes materiālu. Limfātisko audu pietūkums, ko izraisa asinsrites traucējumi. Pacienti, kuriem saskaņā ar medicīniskiem norādījumiem ortozes lietošana nav atļauta.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET INSTRUKCIJU. Pirms ierīces uzlikšanas jāapgūst tās pareiza lietošana. Šie norādījumi ir tikai vadlīnijas, nevis medicīniski ieteikumi. Ja jums ir nopietna saslimšana, pirms izstrādājuma lietošanas noteikti konsultējieties ar kvalificētu veselības aprūpes speciālistu. Lai izstrādājums darbotos efektīvi, tas pareizi jāpielāgo. Noteiktos gadījumos šo izstrādājumu var nozīmēt ārsts. Papildu informāciju skatiet ierobežotās garantijas noteikumos.

KOPŠANAS NORĀDĪJUMI
Mazgāt tikai ar rokām 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Žāvēt gaisā. Nelietot balinātāju vai citas ķīmiskas vielas.

MATERIĀLI
HDPE, neilons, poliuretāns, kokvilna.

NESATUR DABĪGĀ KAUČUKA LATEKSU.

UTILIZĀCIJA
Izstrādājumu var droši utilizēt saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.

ZIŅOŠANA
Par jebkuru nopietnu negadījumu saistībā ar šīs ierīces lietošanu ziņojiet savas valsts kompetentajai iestādei un ražotājam, kas norādīts šajā dokumentā.

IEROBEŽOTA GARANTĪJA
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantē sākotnējam šī izstrādājuma pircējam, ka izstrādājumam nav materiālu un izgatavošanas defektu. Garantijas pārkāpuma gadījumā Aspen Medical Products, LLC vienīgais pienākums ir salabot vai nomainīt bojāto izstrādājumu vai tā daļu(-as).

Aspen Medical Products, LLC nav saistību saskaņā ar šo ierobežoto garantiju, ja:
(a) izstrādājums nav iegādāts no Aspen Medical Products, LLC vai tā pilnvarota izplatītāja;
(b) izstrādājums ir pārveidots;
(c) izstrādājumā ievietotas detaļas, ko nav piegādājis Aspen Medical Products, LLC; vai
(d) izstrādājums netiek lietots saskaņā ar Aspen Medical Products, LLC lietošanas instrukciju.

IEPRIEKŠ MINĒTAIS IR VIENĪGAIS UN EKSKLUZĪVAIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS IZSTRĀDĀJUMA DARBĪBAS TRAUCĒJUMU VAI DEFEKTU GADĪJUMĀ. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ATSAKĀS NO VISĀM CITĀM TIESĀM VAI NETIESĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI KONKRĒTAM MĒRĶIM. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA PAR ZAUDĒJUMIEM, KAS IZRIET NO ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA LIETOŠANAS VAI IR AR TO SAISTĪTI, IR IEROBEŽOTI AR TĀ PIRKUMA CENU. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDU VEIDU NEJAUSIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM.

Šī garantija piešķir jums konkrētas juridiskas tiesības. Jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.

Jūsu reģiona pilnvaroto izplatītāju saraksts ir pieejams pēc pieprasījuma.