



ASPEN VISTA® CERVICAL COLLAR & ASPEN VISTA® TX COLLAR


KAKLA ORTOZE



ASPEN VISTA CERVICAL COLLAR



ASPEN VISTA TX COLLAR

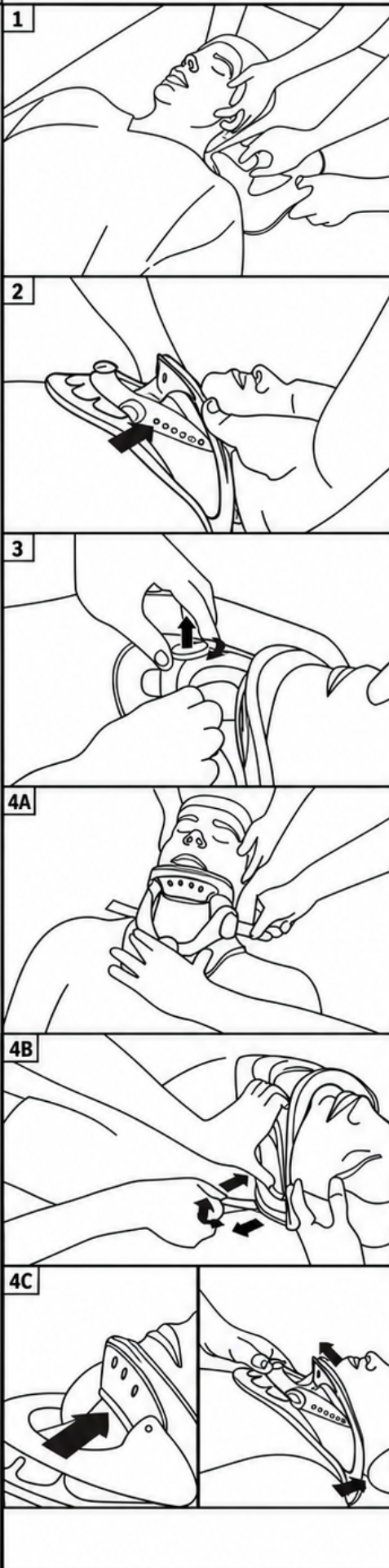

LATVIEŠU

1. SAGATAVOŠANA

Turot galvu neitrālā stāvoklī, novietojiet aizmugurējo paneli uz gultas un pabīdiet to zem pacienta kakla. Siksām jāatrodas starp pacienta ausīm un trapeceveida muskuli.

2. UZLIKŠANA

Priekšējā panelim jāatrodas zemākajā iespējamajā pozīcijā. Atvīzot priekšējā panela sānu daļas, novietojiet apakšējo malu atslēgas kaula līmenī pie krūšu kaula. Novietojiet sānu daļas augšup un uz trapeceveida muskuļiem. Zods drīkst nepieskarties zoda atbalstam.

3. IZMĒRA PIELĀGOŠANA

Turot ortozī pie krūškurvja, izvelciet regulēšanas ripu, lai to atbloķētu. Grieziet ripu pulksteņrādītāja virzienā, lai paceltu zoda atbalstu. Kad tas balsta zodu, atļaidiet ripu; tā automātiski nofiksēsies.

4. PIEVILKŠANA

- A. Turot priekšējo paneli vietā, piestipriniet siksas abās pusēs.
- B. Lai pievilktu, uzlieciet pirkstus uz ortozes un velciet aizmugurējās siksas pa vienai; pārmaiņus pievelciet katru pusi, līdz ortoze pieguļ cieši un simetriski. Priekšējais panelis ir veidots tā, lai vajadzības gadījumā tā malas pārklātos.
- C. Pārbaudiet, vai zoda atbalsta aizmugurējā mala nespiež uz rīkli. Ja tā spiež, paceliet aizmugurējā panela malas uz augšu un atbrīvojiet tās no trapeceveida muskuļiem.

IETEIKUMI

1. Pacienta zodam jāatrodas tuvu zoda atbalsta priekšējai malai, bet atbalsta aizmugurējā mala nedrīkst spiest uz pacienta rīkli.
2. Lai nodrošinātu drošu piegulšanu, novērsiet vaļīgumu starp priekšējo un aizmugurējo paneli.
3. Ja pacients maina ķermeņa stāvokli, var būt nepieciešams pielāgot ortozes augstumu un aizmugurējās siksas.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Kakla mugurkaula daļas kustību ierobežošanai.

INDIKĀCIJAS

Dekompresijas procedūras, lūzumu ārstēšana, stabilizācija pēc operācijas, kakla pātagas cirtiena trauma, sastiepumi, cervikogēnas galvassāpes, kakla disku sindroms, balsta un kustību aparāta sāpes, radikulopātija.

KONTRINDIKĀCIJAS

Paaugstināta jutība vai alerģija pret jebkuru ortozes materiālu. Asinsrites traucējumu izraisīta tūska limfātiskajā sistēmā. Pacienti, kuri medicīnisku norādījumu dēļ nedrīkst valkāt ortozī.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET INSTRUKCIJU. Pirms ortozes uzlikšanas jāapgūst tās pareiza lietošana. Šie norādījumi ir tikai vadlīnijas un nav medicīniski ieteikumi. Ja jums ir nopietns veselības stāvoklis, stingri iesakām pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar licencētu veselības aprūpes speciālistu. Pareiza pielāgošana ir būtiska izstrādājuma efektivitātei. Noteiktos apstākļos šo izstrādājumu var nozīmēt ārsts. Papildu informāciju skatiet ierobežotās garantijas noteikumos.

KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Mazgāt ar rokām tikai 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Žāvēt gaisā. Nelietot balinātāju vai citas ķīmikālijas.

MATERIĀLI

ABS, neilons, HDPE, polikarbonāts, Delrin, poliuretāns, kokvilna.

NAV IZGATAVOTS NO DABISKĀ KAUČUKA LATEKSA.

UTILIZĀCIJA

Izstrādājumu var droši utilizēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

ZIŅOŠANA

Par jebkuru nopietnu ar šīs ierīces lietošanu saistītu negadījumu ziņojiet gan savas valsts kompetentajai iestādei, gan ražotājam (norādīts šajā dokumentā).

IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Uz Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, attiecas garantija, ka sākotnējam pircējam šim izstrādājumam nav materiālu un ražošanas defektu. Vienīgais pienākums, kas Aspen Medical Products, LLC var rasties saistībā ar šo garantiju, ir bojātā izstrādājuma vai tā daļas remonts vai nomaina pēc Aspen Medical Products, LLC ieskatiem.

Šī garantija neattiecas uz:

- (a) bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas lietošanas, negadījuma vai nolaidības dēļ;
- (b) izstrādājumiem, kurus ir pārveidojis kāds cits, nevis Aspen Medical Products, LLC;
- (c) izstrādājumiem, kas nav uzstādīti, lietoti vai uzturēti saskaņā ar Aspen Medical Products, LLC sniegtajām instrukcijām.

ŠĒIT IZKLĀSTĪTĀ GARANTĪJA IR EKSKLŪZĪVA UN AIZSTĀJ VISAS CITAS GARANTĪJAS, TIESĀS VAI NETIESĀS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDU NETIEŠO GARANTĪJU PAR TIRDZNECĪBU VAI PIEMEROTĪBU KONKRĒTAM MĒRBIŅAM. NE ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NE TĀ SAISTĪTIE LĪDZĒKĀRĒJĀKĀJĀKĀJĀ NAV ATBILDīgi PAR JEBKĀDIEM TIEŠĒM, NETIEŠĒM, NEJAUŠĒM, IZRIETOŠĒM VAI SODEJOSĒM ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS SAISTĪBĀ AR ŠĀ PRODUKTA IZMANTOŠANU.

Šī garantija jums piešķir noteiktas juridiskas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas dažādās jurisdikcijās atšķiras. Pēc pieprasījuma ir pieejams pilns izplatītāju saraksts.

MD MEDICĪNISKA IERĪCE

-1 VIENAM PACIENTAM,
ATKĀRTOTAI LIETOŠANAI

! UZMANĪBU



EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Pat. aspenmp.com/patents

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com +1-800-295-2776 +1-949-681-0200

©2021 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.

AC00286 revised 04/2021