
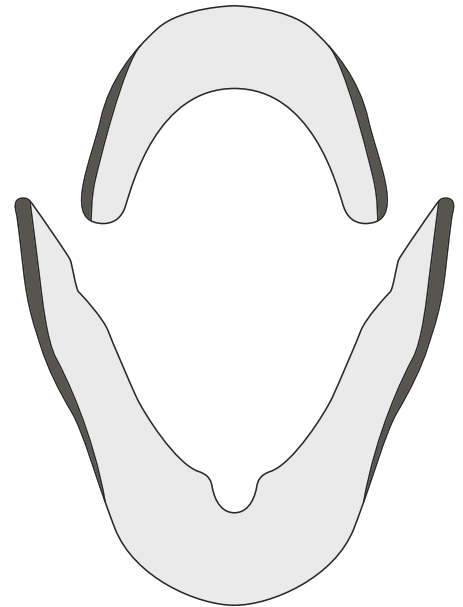




Aspen Vista® kakla ortozes polsterējuma nomaiņas un mazgāšanas instrukcija

Polsterējuma noņemšana

Lai noņemtu kakla ortozes priekšējās daļas polsterējumus, vienkārši atdāliet tos no lipaizdares stiprinājuma punktiem, kas tos piestiprina pie plastmasas.

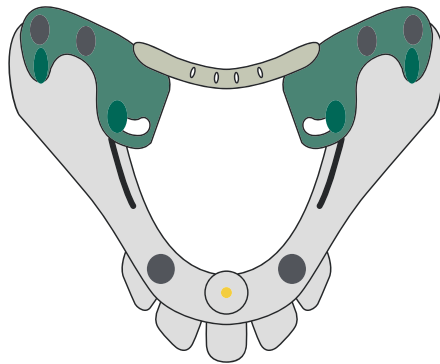

Lai noņemtu aizmugurējā paneļa polsterējumu, vispirms izveriet šiksas abās pusēs. Lai to izdarītu, izveriet šiksas caur polsterējuma spraugām un pēc tam caur spraugām plastmasas ārējā malā.

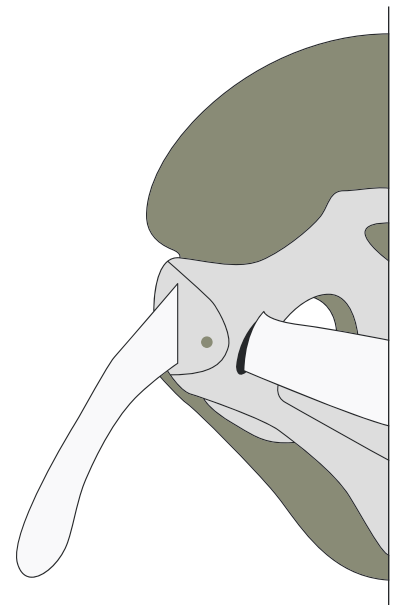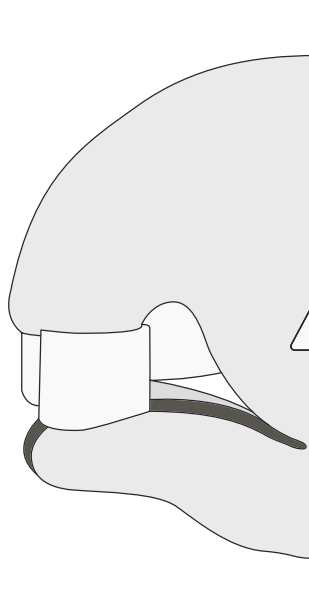

Polsterējuma mazgāšana


Aspen Vista kakla ortozes polsterējumus mazgājiet ar rokām, izmantojot ziepes un ūdeni. Rūpīgi izskalojiet ziepes. Saudzīgi izspiediet lieko ūdeni. Ļaujiet nožūt gaisā (parasti 6-8 stundas).

Nemazgājiet polsterējumus veļas mašīnā un nežāvējiet veļas žāvētājā.


Polsterējuma ievietošana

Visu polsterējumu zaļajai pusei jābūt vērstai pret plastmasu un piestiprinātai pie lipaizdares stiprinājuma punktiem, bet baltajai pusei - pret pacientu.

Lai piestiprinātu polsterējumu ortozes priekšējā daļā, pareizi savietojiet apakšējo (lielāko) polsterējumu ar attiecīgajiem lipaizdares stiprinājuma punktiem un ortozes apaļo plastmasas elementu.

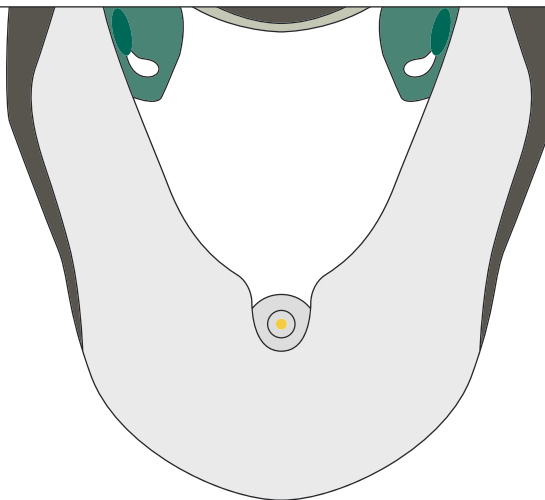

Piestiprinot augšējo polsterējumu, pārliecinieties, ka tas nosedz plastmasas detaļu priekšējās un aizmugurējās malas.

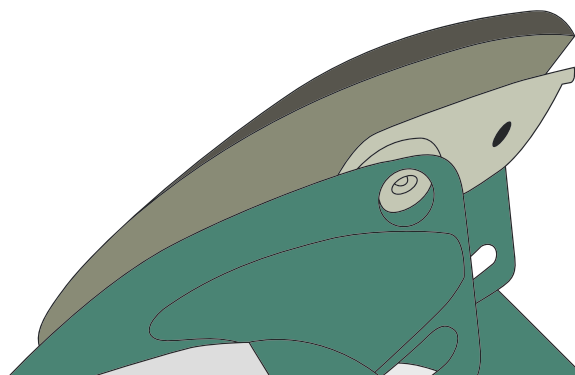

Lai ievietotu aizmugurējo polsterējumu, vispirms piestipriniet tā zaļo pusi pie aizmugurējā panela lipaizdares stiprinājuma punktiem. Kad polsterējums ir savietots ar plastmasu, izveriet siksnas atpakaļ caur polsterējuma un plastmasas spraugām.

