


Aspen[®]
MEDICAL PRODUCTS
HORIZON PRO 456 TLSO

MUGURKAULA KRŪŠU, JOSTAS
UN KRUSTU DAĻAS ORTOZE

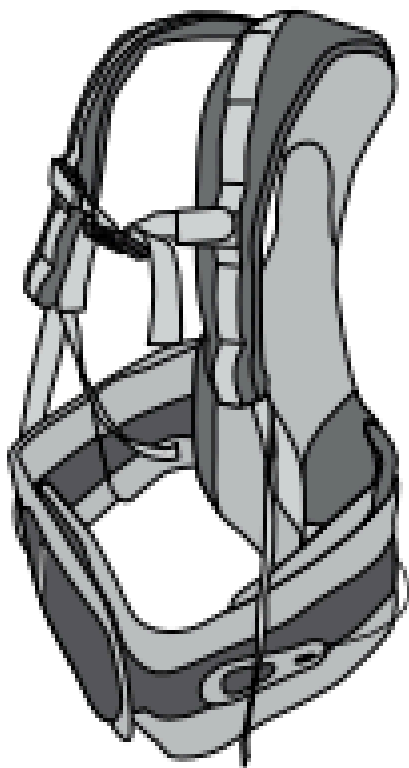

MD

MEDICĪNISKA IERĪCE

1

VIENAM PACIENTAM, ATKĀRTOTAI LIETOŠANAI

!

UZMANĪBU



EC


REP

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands


Pat. aspenmp.com/patents

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200
©2023 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.
LB0084B revised 03/2023


1A

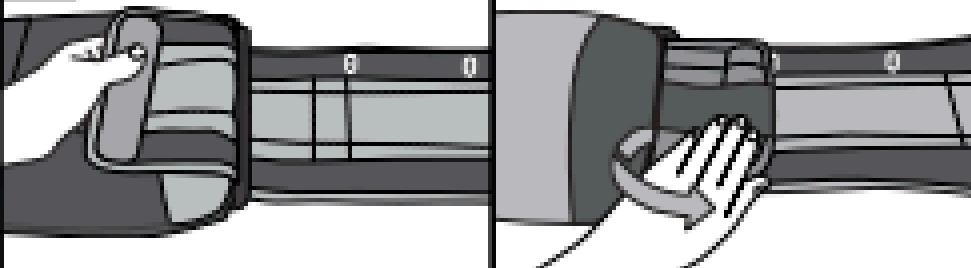



1B

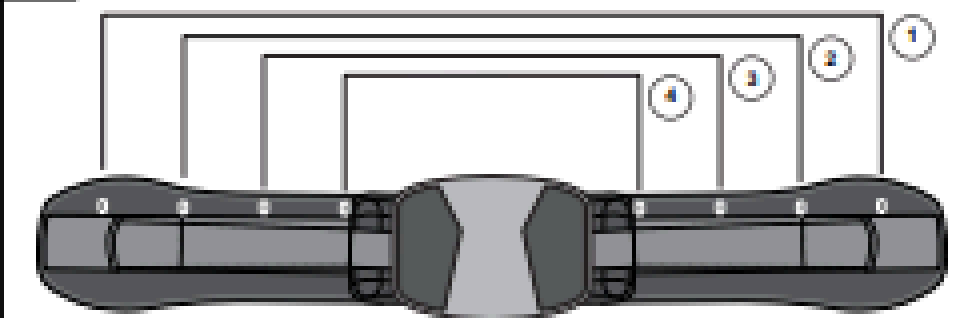


2A

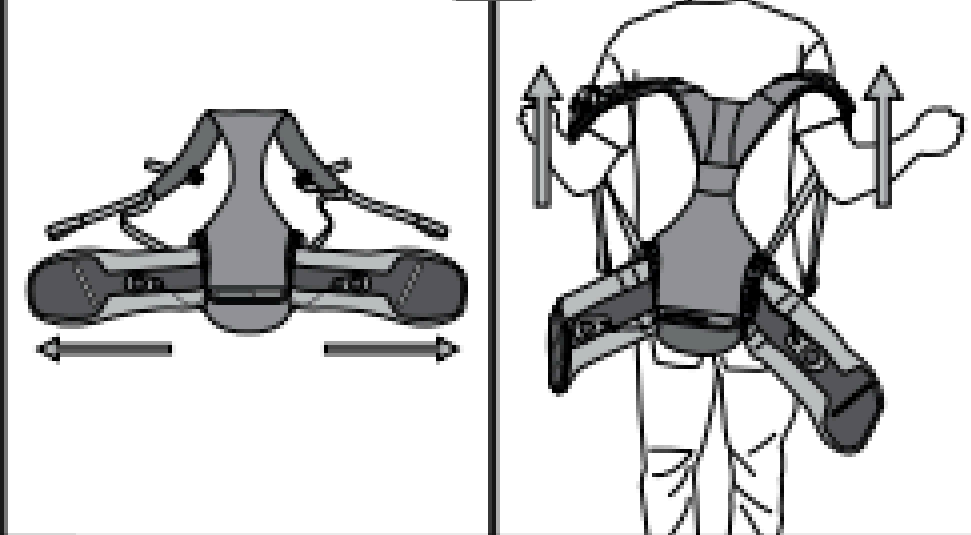


3A

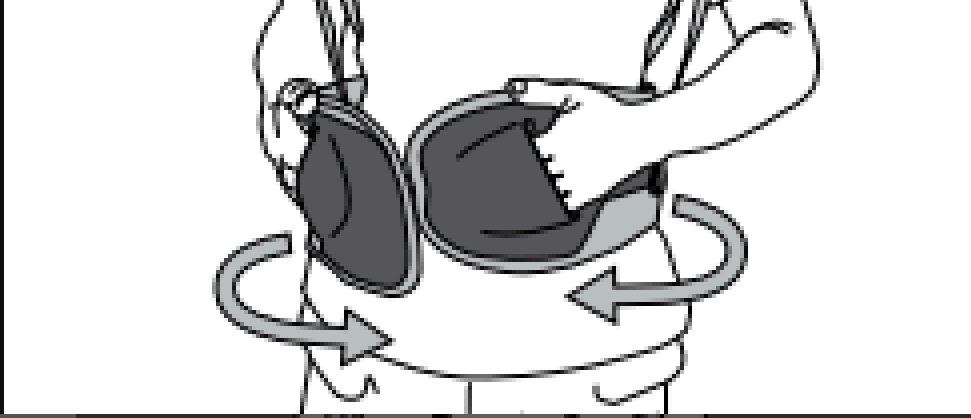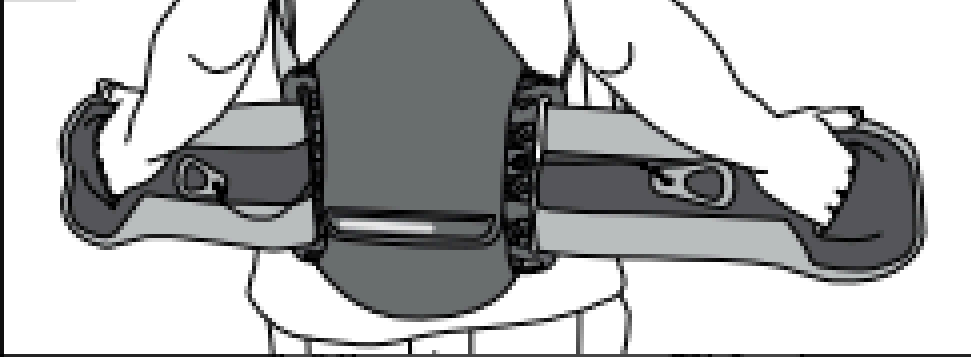


3B

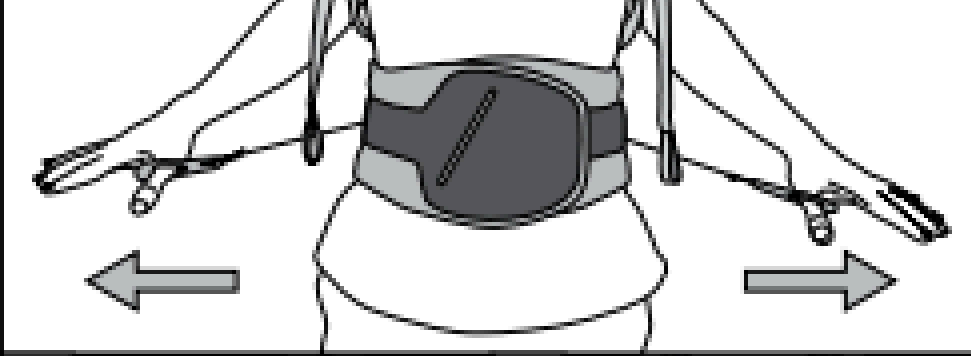


4A

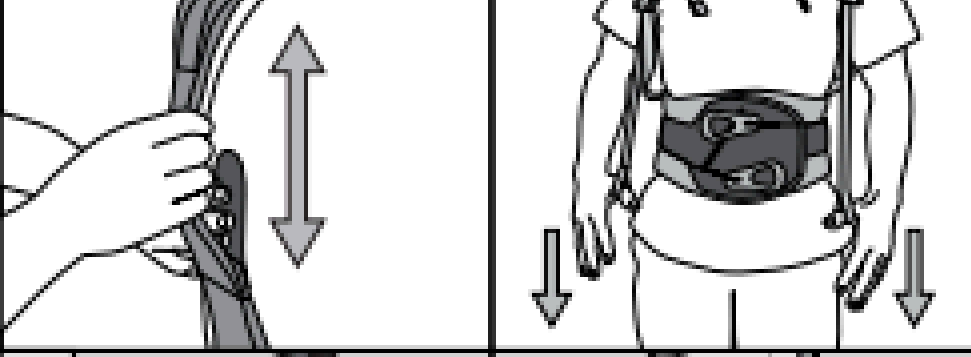

4B

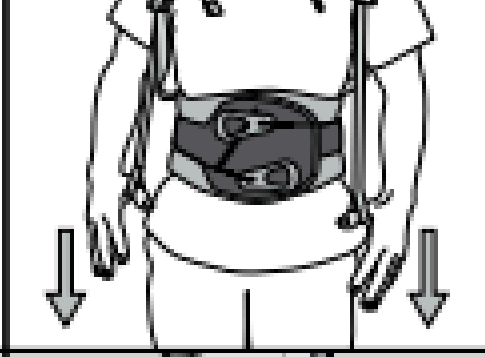

4C

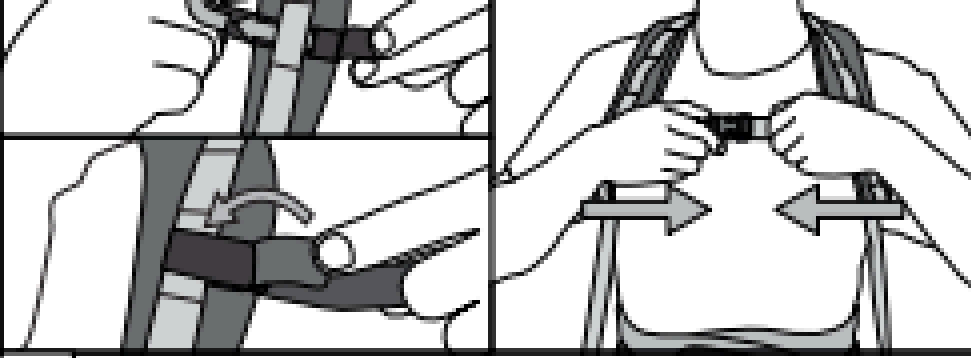

5



LATVIEŠU VALODA

1. IZMĒRA PIELĀGOŠANA

A. Lai mainītu Horizon izmēru, katrā pusē atļipiniet sānu paneļa iekšējo galu. Pielāgojiet vajadzīgajam izmēram un piestipriniet atpakaļ.
B. Horizon ortozes izmēri ir tuvi standarta bikšu izmēriem. Izmēru diapazoni ir tikai orientējoši. Pareizā izmēra izvēlē nozīmē ir jūsu pieredzei un individuālajam izvērtējumam.

IZMĒRU TABULA

Izmērs	Apkārtmērs	
1	24-34 collas	61-86 cm
2	32-40 collas	81-102 cm
3	38-46 collas	97-117 cm
4	44-50 collas	112-127 cm

2. SAGATAVOŠANA

Novietojiet savilkšanas cilpas uz jostas 2 collu (5 cm) attālumā no plastmasas daļas Horizon 456 aiz mugurē. Velciet jostas galus pretējos virzienos, līdz josta ir pilnībā izstiepta.

3. UZLIKŠANA

A. Uzlieciet pilnībā izstieptu ortozi, novietojot muguras paneli centrā un zem uz muguras. Cieši aplieciet ortozi ap vēderu, labajai pusei pārklājot kreiso.

PIEZĪME. Pareizi uzliktas ortozes augšējai un apakšējai malai cieši jāpieguļ. Ja ir sprauga, uzlieciet ortozi atkārtoti un mainiet galu leņķi, lai abas malas cieši piegulētu. Dažiem pacientiem gali jānovieto izteikti slīpi.

B. Ievietojiet īkšķus savilkšanas cilpās. Velciet cilpas uz āru, prom no ortozes. Sasniedzot vajadzīgo kompresiju, nostipriniet cilpu āķīšu pusi uz līplentes cilpiņu materiāla.

4. REGULĒŠANA

A. Pielāgojiet augstumu ar aiz mugurējo regulēšanas paneli. Plecu daļas savienojumam jāatrodas pacienta C7 skriemeļa līmenī.

B. Pavelciet un pievelciet plecu siksnas, līdz tās pareizi pieguļ.

C. Aizsprādzējiet un pievelciet krūšu sprādzi, lai atvirzītu plecu siksnas no padusēm; dažiem pacientiem tas var būt ērtāk.

PIEZĪME. Pēc sākotnējās pielāgošanas lūdziet pacientam apsēsties, pēc tam piecelties un, ja vajadzīgs, pielāgojiet ortozi atkārtoti.

5. PĀRVEIDOŠANAS IESPĒJAS

Šo izstrādājumu var būtiski pārveidot speciālists ar atbilstošām zināšanām. Papildinformācija: www.aspenmp.com/education/product-modifications.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Mugurkaula krūšu, jostas un krustu daļas kustību ierobežošanai un stabilizācijai.

INDIKĀCIJAS

Atbalsts pēc operācijas; degeneratīva starpskriemeļu disku slimība; diska protrūzija vai trūce; lūzumu ārstēšana; spondilolīze; spondilolistēze; mugurkaula kanāla stenoze; kifoze; spondilozē (osteoartrīts/degeneratīva locītavu slimība).

KONTRINDIKĀCIJAS

Paaugstināta jutība vai alerģija pret kādu no ortozes materiāliem. Asinsrites traucējumu izraisīts limfātisko audu pietūkums. Pacienti, kuriem saskaņā ar medicīniskajiem norādījumiem ortozi valkāt nedrīkst.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET INSTRUKCIJU. Pirms ierīces uzlikšanas jāsaņem atbilstoša apmācība tās lietošanā. Šie norādījumi ir vadlīnijas, nevis medicīniski ieteikumi. Ja jums ir nopietna saslimšana, pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar kvalificētu veselības aprūpes speciālistu. Izstrādājuma efektivitātei nepieciešama pareiza pielāgošana. Noteiktos apstākļos šo izstrādājumu var nozīmēt ārsts. Papildinformāciju skatiet ierobežotās garantijas nosacījumos.

KOPŠANA

Mazgāt tikai ar rokām 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Žāvēt gaisā. Nelietot balinātāju vai citas ķīmiskas vielas.

MATERIĀLI

Neilons, poliesteris, HDPE, PVC, poliuretāns, UHMWPE.

NESATUR DABISKĀ KAUCŪKA LATEKSU.

UTILIZĀCIJA

Izstrādājumu var droši izmantot atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.

ZIŅOŠANA

Par jebkuru nopietnu negadījumu saistībā ar ierīces lietošanu ziņojiet savas valsts kompetentajai iestādei un ražotājam, kas norādīts šajā dokumentā.

IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantē sākotnējam pircējam, ka izstrādājumam nav materiālu un izgatavošanas defektu. Garantijas pārkāpuma gadījumā uzņēmuma vienīgais pienākums ir salabot vai nomainīt bojāto izstrādājumu vai tā daļu(-as).

Aspen Medical Products, LLC nav pienākumu saskaņā ar šo ierobežoto garantiju, ja:

- (a) izstrādājums nav iegādāts no uzņēmuma vai tā pilnvarotā izplatīšanas kanālā;
- (b) izstrādājums ir pārveidots;
- (c) tajā ievietotas daļas, kuras nav piegādājis Aspen Medical Products, LLC; vai
- (d) tas netiek lietots atbilstoši uzņēmuma lietošanas instrukcijai.

Iepriekš minētais ir vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis izstrādājuma darbības traucējuma vai defekta gadījumā. Aspen Medical Products, LLC saskaņā ar šo vai jebkuru netieši izteiktu garantiju neatbild par tiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem. Šī garantija aizstāj visas citas tieši vai netieši izteiktas garantijas, tostarp garantiju par piemērotību pārdošanai vai konkrētam mērķim vai lietojumam, kā arī visus uzņēmuma pienākumus vai atbildību par zaudējumiem, kas rodas izstrādājumu lietošanas rezultātā vai saistībā ar to; uzņēmums no tiem atsakās un tos izslēdz.

Šī garantija piešķir jums konkrētas juridiskas tiesības. Jums var būt arī citas tiesības, kas dažādās vietās atšķiras.

Pilnvaroto izplatītāju saraksts jūsu apvidū pieejams pēc pieprasījuma.