





ASPEN VISTA® CTO
ASPEN VISTA® CTO4

MUGURKAULA KAKLA UN
KRŪŠU DAĻAS ORTOZE

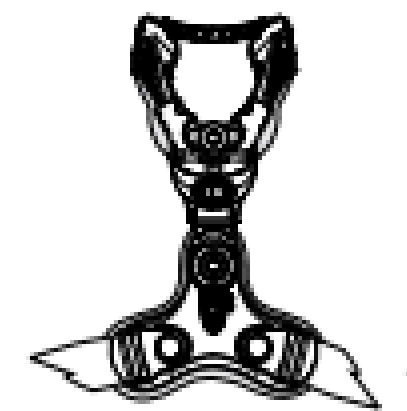


ASPEN VISTA CTO PRIEKŠĒJĀ DAĻA

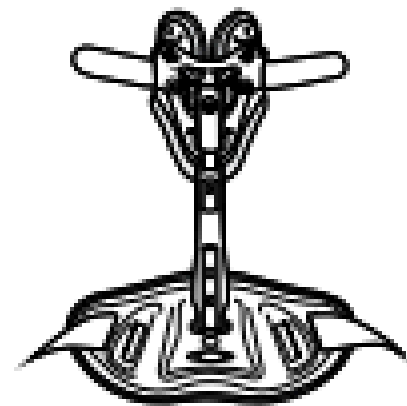

ASPEN VISTA CTO4 AIZMUGURĒJĀ
DAĻA



ASPEN VISTA MULTIPOST MUGURAS
PANELIS

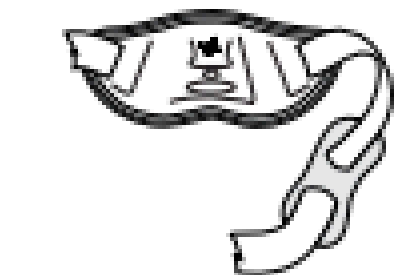

ASPEN VISTA CTO AIZMUGURĒJĀ
DAĻA



MEDICĪNISKA IERĪCE



VIENAM PACIENTAM, ATKĀRTOTAI LIETOŠANAI




UZMANĪBU



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Amnhem
The Netherlands

Pat. aspenmp.com/patents

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200
©2023 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.
AC0080G revised 03/2023

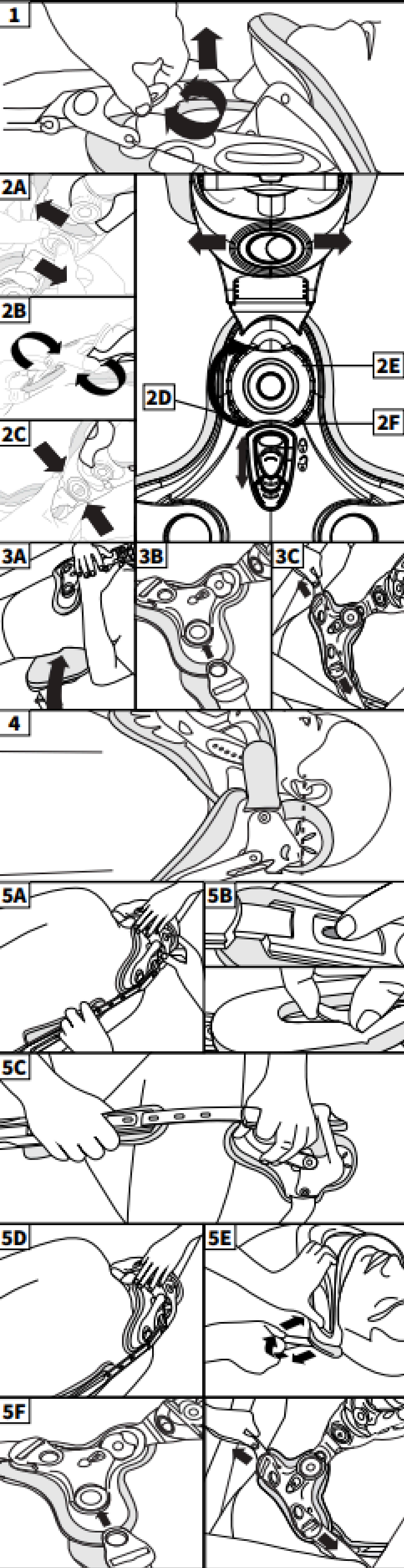

LATVIEŠU VALODA

1. VISTA REGULĒŠANA

Pavelciet un pagrieziet regulatoru, lai pielāgotu Vista kakla ortozes augstumu (skatiet Vista instrukcijas vietnē www.aspenmp.com).

2. CTO KRŪŠKURVJA DAĻAS REGULĒŠANA

- A. Nospiediet pogu un pavelciet daļas vienu no otras, atbrīvojot leņķa regulēšanas savienojumu.
B. Nosakiet vēlamu individuālo leņķi.
C. Saspieties savienojuma daļas kopā, lai fiksētu izvēlēto leņķi.
D. Nospiediet papildu fiksatoru zem dzeltenā galvenā fiksatora. Pēc tam pabīdīet dzelteno galveno fiksatoru uz leju, lai atļautu augstuma regulēšanu.
E. Grieziet regulatoru, līdz krūškurvja daļa atrodas vēlamajā pozīcijā. Pielāgojot ortozī pacientam, kurš guļ uz muguras, krūškurvja daļa jānovieto pēc iespējas zemāk.
F. Pabīdīet dzelteno pogu uz augšu, lai nofiksētu galveno fiksatoru.

3. MUGURAS JOSTAS DAĻAS PANEĻA NOVIEĻOŠANA

- A. Pabīdīet muguras paneli zem mugurkaula jostas daļas.
B. Piestipriniet muguras panela klipšus krūškurvja daļas sānos.
C. Vienmērīgi velciet siksnas, līdz muguras panelis ir cieši nostiprināts. Pielāgojiet siksnu polsterējumu komfortam.

4. MULTIPOST UZLIKŠANA

Novietojiet MultiPost kakla ortozī un pielāgojiet tās augstumu, lai tā vislabāk piegulētu (skatiet MultiPost instrukcijas vietnē www.aspenmp.com).

5. CTO 4 AIZMUGURĒJĀS DAĻAS UZLIKŠANA

PIEZĪME. Saglabājot neitrālu novietojumu un nodrošinot pienācīgu atbalstu, pagrieziet pacientu uz sāniem kā vienotu veselumu. Ja MultiPost kakla ortoze jau ir uzlikta, noņemiet to un piestipriniet aizmugurējo statni saskaņā ar Vista CTO 4 papildinājuma komplekta instrukcijām.

- A. Novietojiet aizmugurējo mezglu un kakla ortozes aizmugurējo paneli uz pacienta.
B. Lai pielāgotu garumu, nospiediet pogu. Aizmugurē ar otru roku atlieciet fiksatoru, lai to pilnībā atbrīvotu. Pārbrīdīet statni uz augšu vai leju.
C. Ja nepieciešams, salieciet metāla statni, pielāgojot to kifozei.
PIEZĪME. Pēc katras regulēšanas pārļiecinieties, ka regulēšanas pogas ir nofiksētas.
D. Pagrieziet pacientu kā vienotu veselumu atpakaļ uz muguras.
E. Pievelciet abas kakla ortozes siksnas, kā norādīts Vista MultiPost instrukcijās.
F. Iesprādzējiet jostas daļas siksnas krūškurvja daļā un pievelciet, līdz ortoze cieši un ērti piegul.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Mugurkaula kakla daļas kustību ierobežošanai.

INDIKĀCIJAS

Dekompresijas procedūras; lūzumu ārstēšana; stabilizācija pēc operācijas; kakla pātagas cirtiena trauma; saišu un muskuļu sastiepumi; cervikogēnas galvassāpes; kakla daļas diska sindroms; muskuļu un skeleta sāpes; radikulopātija.

KONTRINDIKĀCIJAS

Paaugstināta jutība vai alerģija pret kādu no ortozes materiāliem. Asinsrites traucējumu izraisīts limfātisko audu pietūkums. Pacienti, kuriem saskaņā ar medicīniskajiem norādījumiem ortozī valkāt nedrīkst.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET INSTRUKCIJU. Pirms ierīces uzlikšanas jāņem atbilstoša apmācība tās lietošanā. Šie norādījumi ir vadlīnijas, nevis medicīniski ieteikumi. Ja jums ir nopietna saslimšana, pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar kvalificētu veselības aprūpes speciālistu. Izstrādājuma efektivitātei nepieciešama pareiza pielāgošana. Noteiktos apstākļos šo izstrādājumu var nozīmēt ārsts. Papildinformāciju skatiet ierobežotās garantijas nosacījumos.

KOPŠANA

Mazgāt tikai ar rokām 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Žāvēt gaisā. Nelietot balinātāju vai citas ķīmiskas vielas.

MATERIĀLI

ABS, neilons, HDPE, polikarbonāts, Delrin, poliuretāns, kokvilna, alumīnijs.

NESATUR DABISKĀ KAUCŪKA LATEKSU.

UTILIZĀCIJA

Izstrādājumu var droši izlietēt atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.

ZIŅOŠANA

Par jebkuru nopietnu negadījumu saistībā ar ierīces lietošanu ziņojiet savas valsts kompetentajai iestādei un ražotājam, kas norādīts šajā dokumentā.

IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantē sākotnējam pircējam, ka izstrādājumam nav materiālu un izgatavošanas defektu. Garantijas pārkāpuma gadījumā uzņēmuma vienīgais pienākums ir salabot vai nomainīt bojāto izstrādājumu vai tā daļu(-as).

Aspen Medical Products, LLC nav pienākumu saskaņā ar šo ierobežoto garantiju, ja:
(a) izstrādājums nav iegādāts no uzņēmuma vai tā pilnvarotā izplatīšanas kanālā;
(b) izstrādājums ir pārveidots;
(c) tajā ievietotas daļas, kuras nav piegādājis Aspen Medical Products, LLC; vai
(d) tas netiek lietots atbilstoši uzņēmuma lietošanas instrukcijai.

Iepriekš minētais ir vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis izstrādājuma darbības traucējuma vai defekta gadījumā. Aspen Medical Products, LLC saskaņā ar šo vai jebkuru netieši izteiktu garantiju neatbild par tiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem. Šī garantija aizstāj visas citas tieši vai netieši izteiktas garantijas, tostarp garantiju par piemērotību pārdošanai vai konkrētām mērķim vai lietojumam, kā arī visus uzņēmuma pienākumus vai atbildību par zaudējumiem, kas rodas izstrādājumu lietošanas rezultātā vai saistībā ar to; uzņēmums no tiem atsakās un tos izslēdz.

Šī garantija piešķir jums konkrētas juridiskas tiesības. Jums var būt arī citas tiesības, kas dažādās vietās atšķiras.

Pilnvaroto izplatītāju saraksts jūsu apvidū pieejams pēc pieprasījuma.