




ASPEN VISTA®
LOWER SPINE

MUGURKAULA JOSTAS UN
KRUSTU DAĻAS ORTOZE

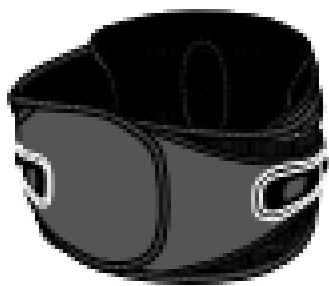

ASPEN VISTA 627 JOSTAS ORTOZE



ASPEN VISTA 631 LSO LoPro



ASPEN VISTA 637 LSO



MEDICĪNISKA IERĪCE



VIENAM PACIENTAM, ATKĀRTOTA LIETOŠANAI











UZMANĪBU



EMERGO EUROPE
Westervoortsewijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Pat. aspenmp.com/patents

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200
©2023 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.
PR0064F revised 03/2023

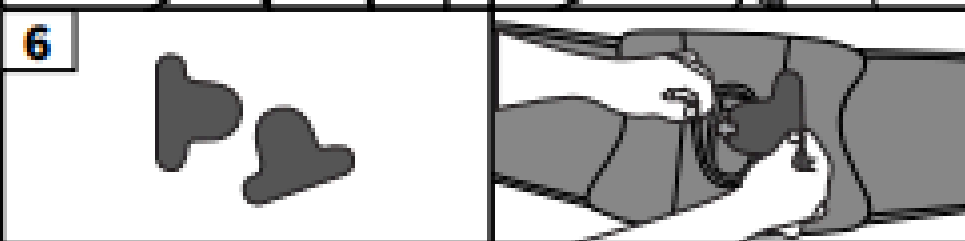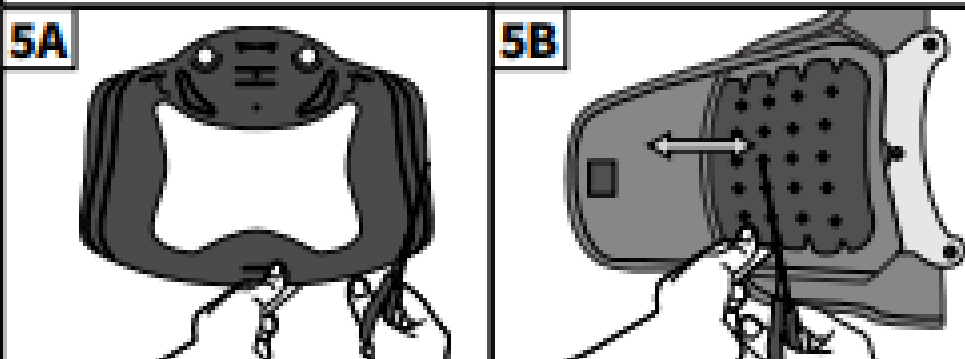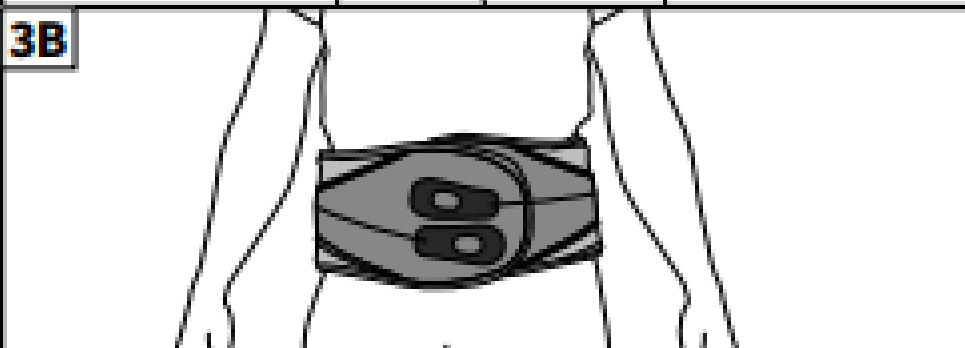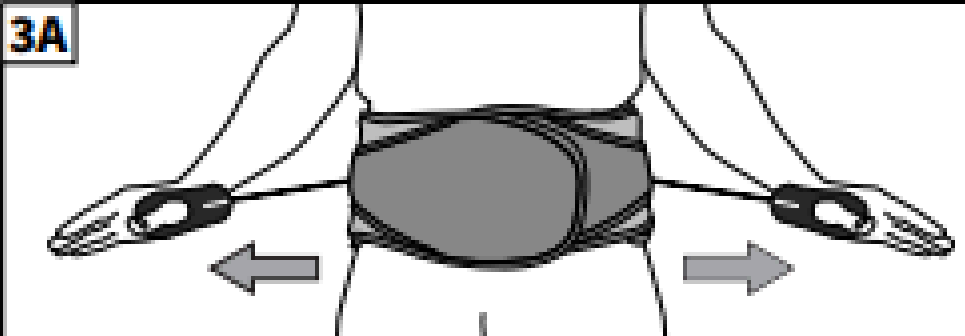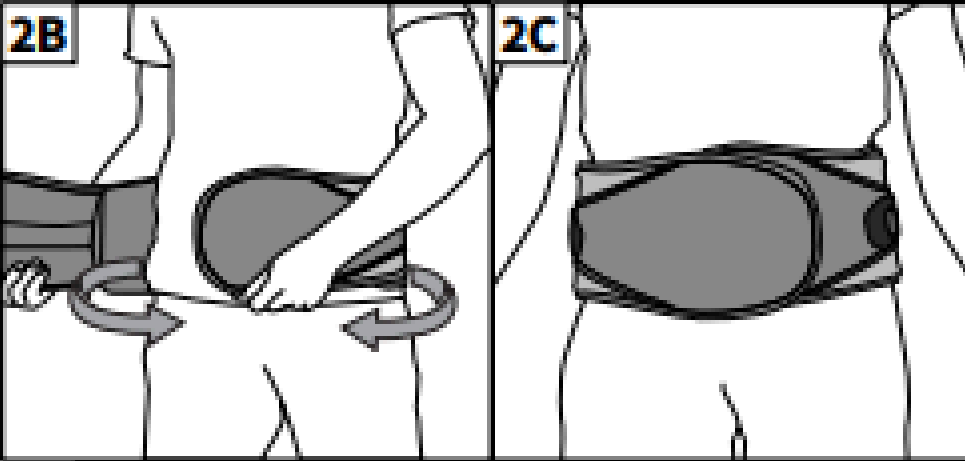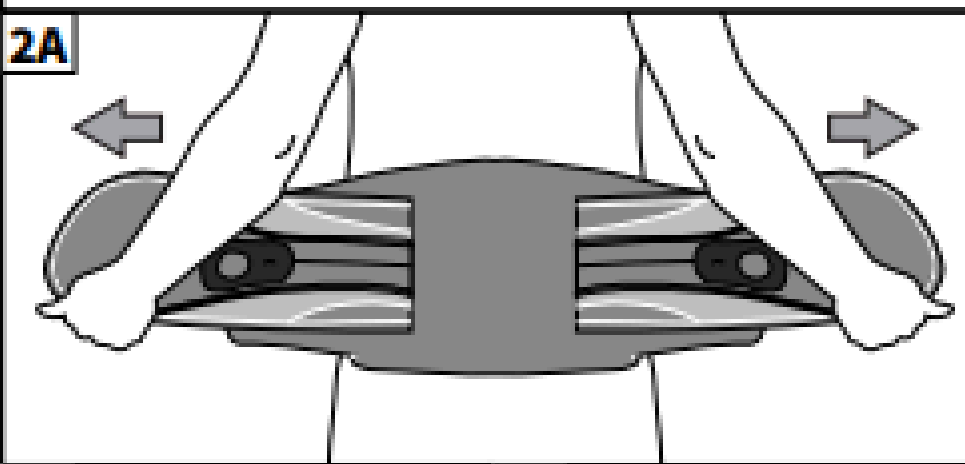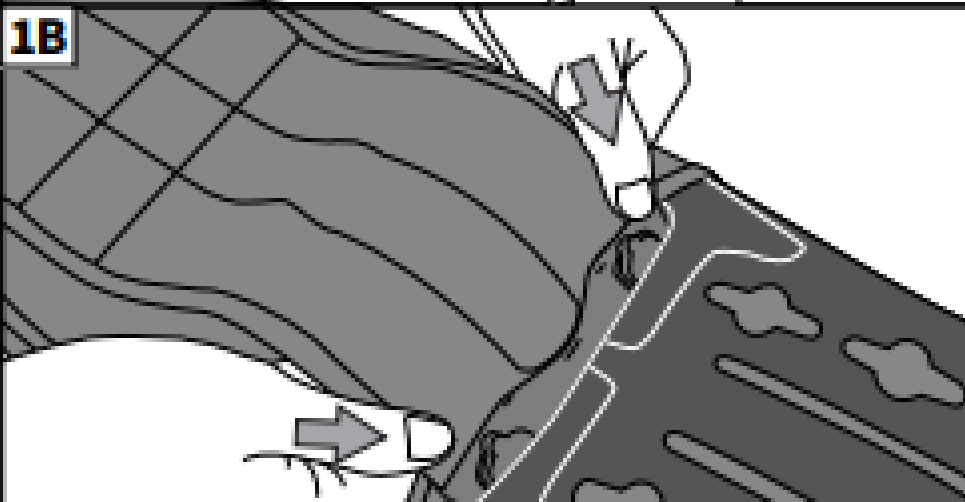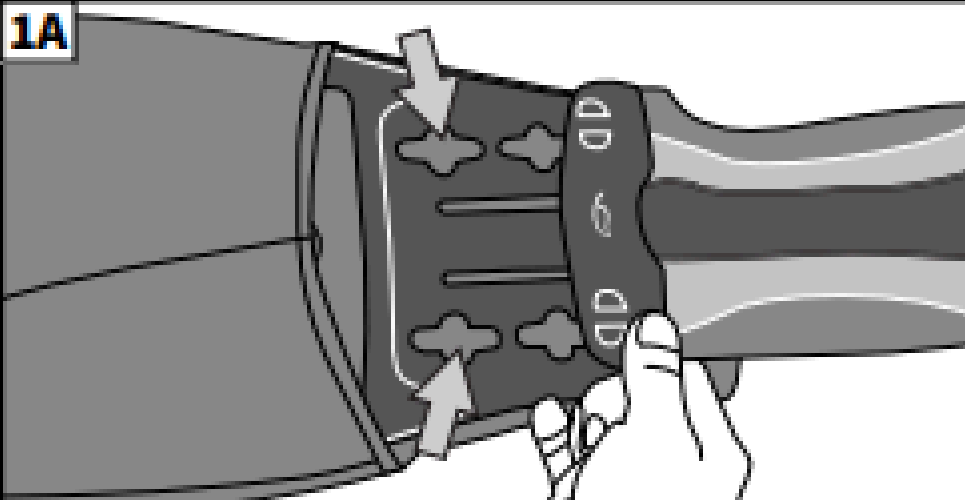

LATVIEŠU VALODA

1. JOSTAS IZMĒRA PIELĀGOŠANA

- A. Ievietojiet jostas stiprinājuma tapas atbilstošajās izmēra regulēšanas mehānisma atverēs.
B. Mazākiem izmēriem izbīdīt sānu paneli caur izmēra regulēšanas spraugu un pēc tam no apakšpuses ievietojiet tapas atbilstošajās regulēšanas atverēs.
C. Sasniedzot pareizo izmēru, stingri pavelciet, lai tapas nofiksētos.

IZMĒRU TABULA

Izmērs	Apkārtmērs	
X-SMALL (XS)	26-31 collas	66-78 cm
SMALL (S)	30-37 collas	76-94 cm
MEDIUM (M)	36-43 collas	91-109 cm
LARGE (L)	42-49 collas	107-124 cm
X-LARGE (XL)	48-55 collas	122-140 cm
XX-LARGE (XXL)	54-60 collas	137-152 cm

2. NOVIETOŠANA

- A. Novietojiet aizmugurējo paneli muguras centrā tik zem, cik tas ir ērti.
B. Cieši aplieciet jostas kreiso pusi ap ķermeni uz priekšu.
C. Atkārtojiet ar labo pusi un ieelpas laikā saspiediet līplentes aizdāri, lai panāktu ciešu piegulšanu.
PIEZĪME. Pārliedzinieties, ka ortozes augšējā un apakšējā mala cieši pieguļ. Vajadzības gadījumā novietojiet galus slīpi.

3. SAVILKŠANA

- A. Spēcīgi velciet prom no ķermeņa. Pievelciet stingrāk, nekā nepieciešams, un tad atbrīvojiet līdz piemērotai piegulšanai. Pēc vajadzības velciet kreiso cilpu, lai savilktu apakšējo daļu, un labo cilpu, lai savilktu augšējo daļu.
B. Piestipriniet savilkšanas cilpas pie līplentes cilpiņu materiāla, lai saglabātu kompresiju.

4. PĀRVEIDOŠANAS IESPĒJAS

Šo izstrādājumu var būtiski pārveidot speciālists ar atbilstošām zināšanām. Papildinformācija: www.aspenmp.com/education/product-modifications.

5. PANEĻU PIELĀGOŠANA

- A. Ja nepieciešams, samaziniet aizmugurējā paneļa kopējo platumu: izņemiet to no pārvalka un apgrieziet līdz vajadzīgajam izmēram pa griešanas līnijām.
B. Sānu paneļu novietojumu pārvalkā var pielāgot vai paneļus apgriezt, lai tie atrastos pie pacienta ķermeņa viduslīnijās.

6. LORDO POLSTERI

Ja nepieciešams komfortam, izņemiet Lordo polsterus.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Mugurkaula jostas un krustu daļas kustību ierobežošanai.

INDIKĀCIJAS

Atbalsts pēc operācijas; novājināta rumpja muskulatūra; postlaminektomijas sindroms; ķirurģiskas un neķirurģiskas dekompresijas procedūras; deģeneratīva starpskriemeļu disku slimība; diska protrūzija vai trūce; nespecifiskas sāpes muguras lejasdaļā; hroniskas sāpes muguras lejasdaļā; lūzumu ārstēšana; spondilolīze; spondilolistēze; mugurkaula kanāla stenoze; saišu un muskuļu sastiepumi; spondilozē (osteoartrīts/deģeneratīva locītavu slimība); fāsešu locītavu sindroms; sakroiliakālās locītavas disfunkcija; sakroileīts; radikulopātija; injekcijas; radiofrekvences ablācija; jostas daļas daudzšķautņainā muskuļa atrofija.

KONTRINDIKĀCIJAS

Paaugstināta jutība vai alerģija pret kādu no ortozes materiāliem. Asinsrites traucējumu izraisīts limfātisko audu pietūkums. Pacienti, kuriem saskaņā ar medicīniskajiem norādījumiem ortozi valkāt nedrīkst.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET INSTRUKCIJU. Pirms ierīces uzlikšanas jāsaņem atbilstoša apmācība tās lietošanā. Šie norādījumi ir vadlīnijas, nevis medicīniski ieteikumi. Ja jums ir nopietna saslimšana, pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar kvalificētu veselības aprūpes speciālistu. Izstrādājuma efektivitātei nepieciešama pareiza pielāgošana. Noteiktos apstākļos šo izstrādājumu var nozīmēt ārsts. Papildinformāciju skatiet ierobežotās garantijas nosacījumos.

KOPŠANA

Mazgāt tikai ar rokām 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Žāvēt gaisā. Nelietot balinātāju vai citas ķīmiskas vielas.

MATERIĀLI

Acetāls, poliesteris, ABS, tērauds, alumīnijs, UBL, EVA, neilons, silikons, poliuretāns.

NESATUR DABISKĀ KAUČUKA LATEKSU.

UTILIZĀCIJA

Izstrādājumu var droši utilizēt atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.

ZIŅOŠANA

Par jebkuru nopietnu negadījumu saistībā ar ierīces lietošanu ziņojiet savas valsts kompetentajai iestādei un ražotājam, kas norādīts šajā dokumentā.

IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantē sākotnējam pircējam, ka izstrādājumam nav materiālu un izgatavošanas defektu. Garantijas pārkāpuma gadījumā uzņēmuma vienīgais pienākums ir salabot vai nomainīt bojāto izstrādājumu vai tā daļu(-as).

Aspen Medical Products, LLC nav pienākumu saskaņā ar šo ierobežoto garantiju, ja:
(a) izstrādājums nav iegādāts no uzņēmuma vai tā pilnvarotā izplatīšanas kanālā;
(b) izstrādājums ir pārveidots;
(c) tajā ievietotas daļas, kuras nav piegādājis Aspen Medical Products, LLC; vai
(d) tas netiek lietots atbilstoši uzņēmuma lietošanas instrukcijai.

Iepriekš minētais ir vienīgais un ekskluzīvais tiesiskās aizsardzības līdzeklis izstrādājuma darbības traucējuma vai defekta gadījumā. Aspen Medical Products, LLC saskaņā ar šo vai jebkuru netieši izteiktu garantiju neatbild par tiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem. Šī garantija aizstāj visas citas tieši vai netieši izteiktas garantijas, tostarp garantiju par piemērotību pārdošanai vai konkrētam mērķim vai lietojumam, kā arī visus uzņēmuma pienākumus vai atbildību par zaudējumiem, kas rodas izstrādājuma lietošanas rezultātā vai saistībā ar to; uzņēmums no tiem atsakās un tos izslēdz.

Šī garantija piešķir jums konkrētas juridiskas tiesības. Jums var būt arī citas tiesības, kas dažādās vietās atšķiras.

Pilnvaroto izplatītāju saraksts jūsu apvidū pieejams pēc pieprasījuma.