


DRWB - Plaukstas locītavas ortoze ar D veida gredzeniem

LV PLĀUKSTAS LOCĪTAVAS UN PLĀUKSTAS ORTOZE

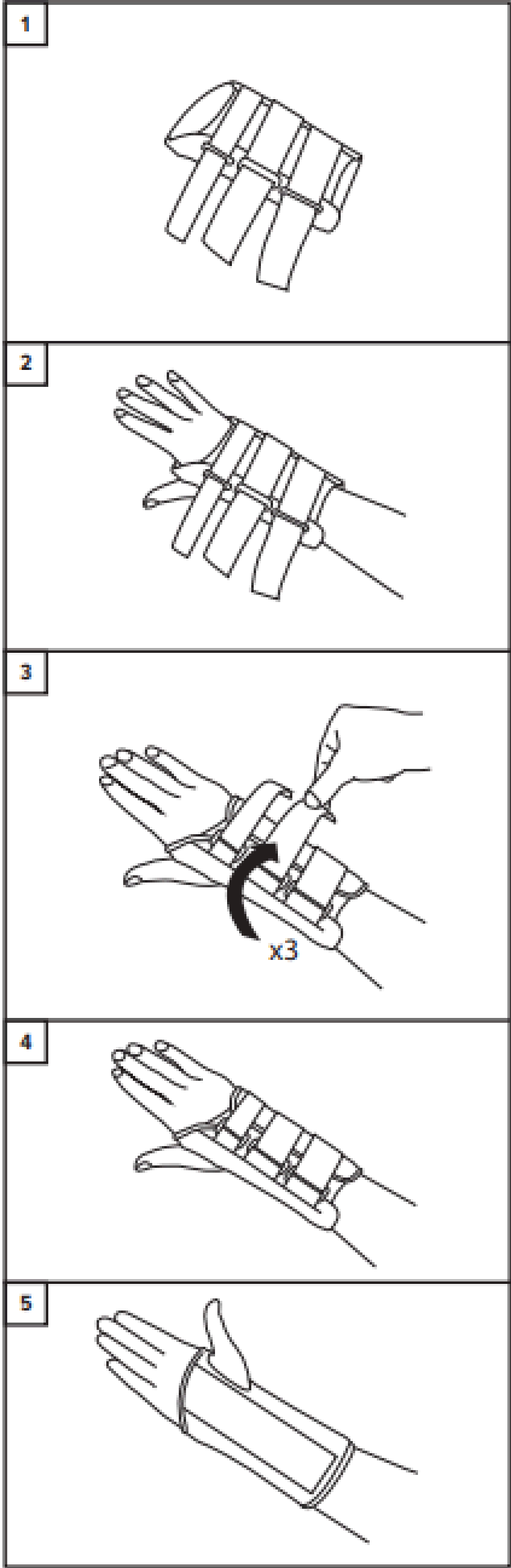

LATVIEŠU VALODA

Izstrādājuma apraksts

Plaukstas locītavas ortoze imobilizācijai un atbalstam. Regulējama šina palīdz imobilizēt plaukstas locītavu. Viegli uzvelkama konstrukcija ar aizdares siksnām un D veida gredzeniem.

Lietošana (skatiet attēlus)

1. Atveriet līplentes aizdari un pilnībā izklājiet ortozi.
2. Ievietojiet roku ortozi.
3. Aizveriet līplentes aizdares ar D veida gredzeniem ap plaukstu locītavu.
4. Nepievelciēt siksnas pārāk cieši. Ja nepieciešams, pielāgojiet piegulšanu komfortam, pārliecinoties, ka ortozi atrodas pareizā pozīcijā.
5. Ortozes uzlikšana ir pabeigta.

Lietošanas indikācijas

Nodrošina plaukstu locītavas imobilizāciju un atbalstu dažādu traumu un saslimšanu gadījumā, kā arī pirms un pēc operācijas, piemēram:

- stabilu lūzumu gadījumā;
- saišu un muskuļu sastiepumu gadījumā;
- mīksto audu traumu un saslimšanu gadījumā;
- artrīta gadījumā;
- perifēro nervu patoloģiju gadījumā.

Uzvelkamā konstrukcija ar D veida gredzenu aizdarēm atvieglo uzlikšanu, īpaši pacientiem ar ierobežotu roku veiklību.

Kontrindikācijas

- Nelietot uz vaļējām brūcēm.
- Zināma alerģija un/vai paaugstināta jutība pret jebkuru izstrādājuma sastāvā norādīto materiālu.
- Jāievēro piesardzība, nozīmējot pacientiem ar diabētu, asinsvadu mazspēju vai neiropātiju.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

- Ieteicams, lai sākotnējo pielāgošanu veiktu atbilstoši kvalificēts veselības aprūpes speciālists, kurš ņemtu vērā arī lietošanas ilgumu.
- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus.
- Ievērojiet visas norādes, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību.
- Nelietojiet, ja skartajā zonā uzklāti ierīvējamie līdzekļi, ziedes, geli, krēmi vai citas vielas.
- Nenododiet lietošanai citam pacientam: tas rada savstarpējas inficēšanās risku un var ietekmēt izstrādājuma integritāti.
- Regulāri pārbaudiet ādas stāvokli un asinsriti, īpaši pacientiem ar diabētu, asinsvadu darbības traucējumiem un neiroloģiskām saslimšanām.
- Ja rodas nevēlamas reakcijas, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu vai izstrādājuma piegādātāju.
- Ierīces izturību var ietekmēt, piemēram, priekšmeti ar asām malām vai līplentes aizdares bojājumi. Lai to novērstu, līplentes aizdarēm vienmēr jābūt aizvērtām, kad ierīce netiek valkāta vai tiek mazgāta.

Mazgāšana un kopšana

1. Aizveriet visas līplentes siksas.
2. Mazgājiet ortozi ar rokām vēsā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
3. Izskalojiet un žāvējiet izklātu.
4. Neizgrieziet centrifūgā un nežāvējiet veļas žāvētājā.
5. Nekad nelietojiet veļas mīkstinātāju.
6. Pārbaudiet, vai nav nolietojuma vai bojājumu, kas var ietekmēt lietošanu.
7. Periodiski pārbaudiet, vai līplentes aizdares droši turas.

Izstrādājuma materiālu sastāvs

Acetāls, alumīnijs, elastāns, Lycra, neilons,
poliamīds, poliesteris, polipropilēns, poliuretāns,
POM, SBR, spandekss, tērauds, TPU.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiēt oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem.

Pārstrāde un utilizācija

lepakojums un izstrādājuma sastāvdaļas jāpārstrādā vai droši jāutilizē atbilstoši vietējiem vai valsts normatīvajiem aktiem.

Nopietns negadījums

Par jebkuru nopietnu negadījumu ziņojiet ražotājam un tās ES dalībvalsts vai citas valsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvojat.