

SIS - Pleca imobilizators
un rokas turētājs

LV PLECA ORTOZE



MEDICĪNISKA IERĪCE



VIENAM PACIENTAM, ATKĀRTOTAI LIETOŠANAI



UZMANĪBU




Promedics Orthopaedics Ltd.
Port Glasgow Industrial Estate, Gareloch Road, Port Glasgow,
Scotland, UK, PA14 5XH
Tel: +44 (0) 1475 745 400 | Email: enquiries@promedics.co.uk
www.promedics.co.uk



EC

REP

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

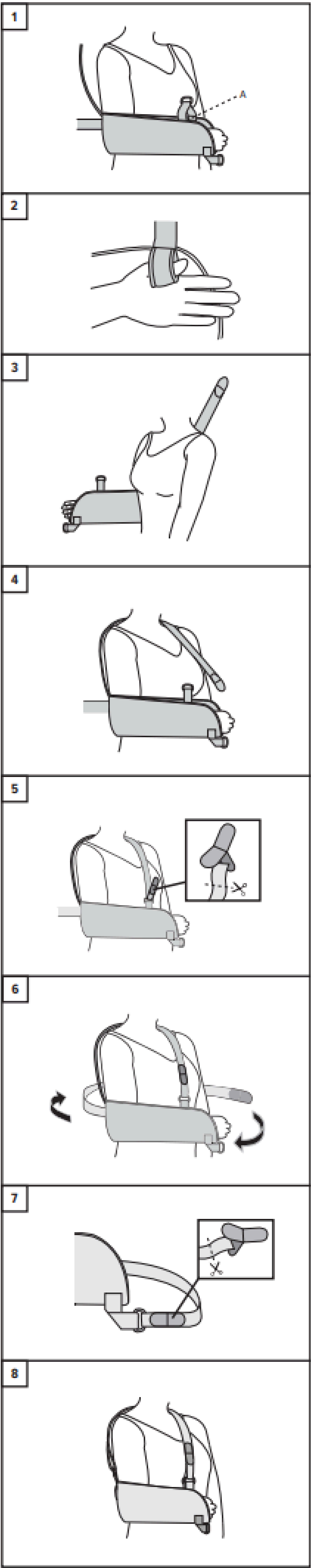

LATVIEŠU VALODA

Izstrādājuma apraksts

Pleca imobilizatoru var izmantot kā rokas turētāju vai pleca imobilizatoru. Tas ir piemērots gan kreisajai, gan labajai rokai.

Lietošana (skatiet attēlus)

1. Ievietojiet roku turētājā un pārļiecinieties, ka elkonis ir droši nostiprināts. Aizveriet līplentes aizdari attēlā norādītajā vietā A.
2. Ja nepieciešams, izmantojiet īkšķim paredzēto cilpu.
3. Virziet pleca siksnu uz augšu pāri mugurai.
4. Pārļieciēt pleca siksnu pāri pretējam plecam. Novietojiet kakla polsteri atbilstošā vietā.
5. Izveriet pleca siksnu caur plastmasas cilpu un nostipriniet vajadzīgajā garumā. Ja nepieciešams, apgrieziet siksnu un pārvietojiet Y veida līplentes uzgali.
6. Aplieciēt imobilizācijas siksnu ap ķermeni.
7. Izveriet to caur plastmasas cilpu, noregulējiet un nostipriniet vajadzīgajā pozīcijā. Ja nepieciešams, apgrieziet siksnu un pārvietojiet Y veida līplentes uzgali.
8. Pārļiecinieties, ka pacientam ir ērti un turētājs nodrošina vajadzīgo atbalstu un imobilizāciju.

Lietošanas indikācijas

Var izmantot dažādu traumu un saslimšanu gadījumā, kad nepieciešama pleca un/vai elkoņa kustību ierobežošana, piemēram:

- mežģījumu gadījumā;
- muskuļu un saišu sastiepumu gadījumā;
- pirms un pēc operācijas;
- rehabilitācijas posmos;
- citu traumu gadījumā;
- pleca nervu pinuma vai perifēro nervu bojājumu gadījumā.

Kontrindikācijas

- Nelieciēt izstrādājumu tiešā saskarē ar bojātu ādu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Ieteicams, lai sākotnējo pielāgošanu veiktu atbilstoši kvalificēts veselības aprūpes speciālists, kurš noteiks arī lietošanas ilgumu.

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus.
- Ievērojiet visas norādes, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību.
- Nelietojiet, ja skartajā zonā uzklāti ierīvējamie līdzekļi, ziedes, geli, krēmi vai citas vielas.
- Nenododiet lietošanai citam pacientam: tas rada savstarpējas inficēšanās risku un var ietekmēt izstrādājuma integritāti.
- Regulāri pārbaudiet ādas stāvokli un asinsriti, īpaši pacientiem ar diabētu, asinsvadu darbības traucējumiem un neiroloģiskām saslimšanām.
- Ja rodas nevēlamas reakcijas, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu vai izstrādājuma piegādātāju.
- Ierīces izturību var ietekmēt, piemēram, priekšmeti ar asām malām vai līplentes aizdares bojājumi. Lai to novērstu, līplentes aizdarēm vienmēr jābūt aizvērtām, kad ierīce netiek valkāta vai tiek mazgāta.

Mazgāšana un kopšana

1. Aizveriet visas līplentes siksnas.
2. Mazgājiet turētāju ar rokām vēsā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
3. Izskalojiet un žāvējiet izklātu.
4. Neizgrieziet centrifūgā un nežāvējiet veļas žāvētājā.
5. Nekad nelietojiet veļas mīkstinātāju.
6. Pārbaudiet, vai nav nolietojuma vai bojājumu, kas var ietekmēt lietošanu.
7. Periodiski pārbaudiet, vai līplentes aizdares droši turas.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem.

Pārstrāde un utilizācija

Iepakojums un izstrādājuma sastāvdaļas jāpārstrādā vai droši jāutilizē atbilstoši vietējiem vai valsts normatīvajiem aktiem.

Nopietns negadījums

Par jebkuru nopietnu negadījumu ziņojiet ražotājam un tās ES dalībvalsts vai citas valsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvojat.