
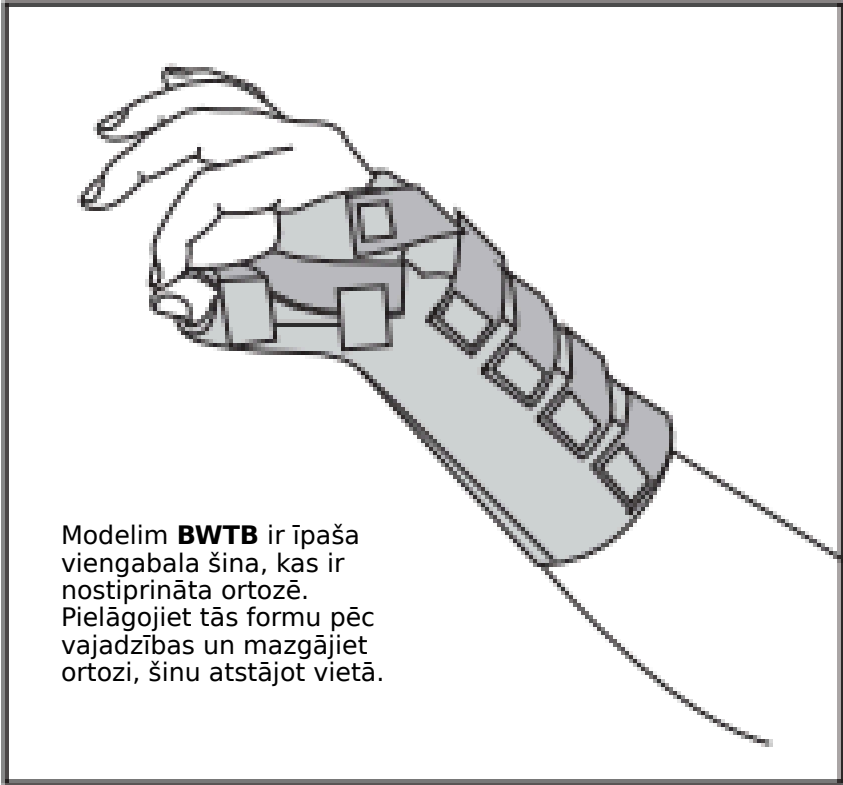


WTB - Plaukstu locītavas un īkšķa ortoze

LV PLĀUKSTAS LOCĪTAVAS UN PLĀUKSTAS ORTOZE

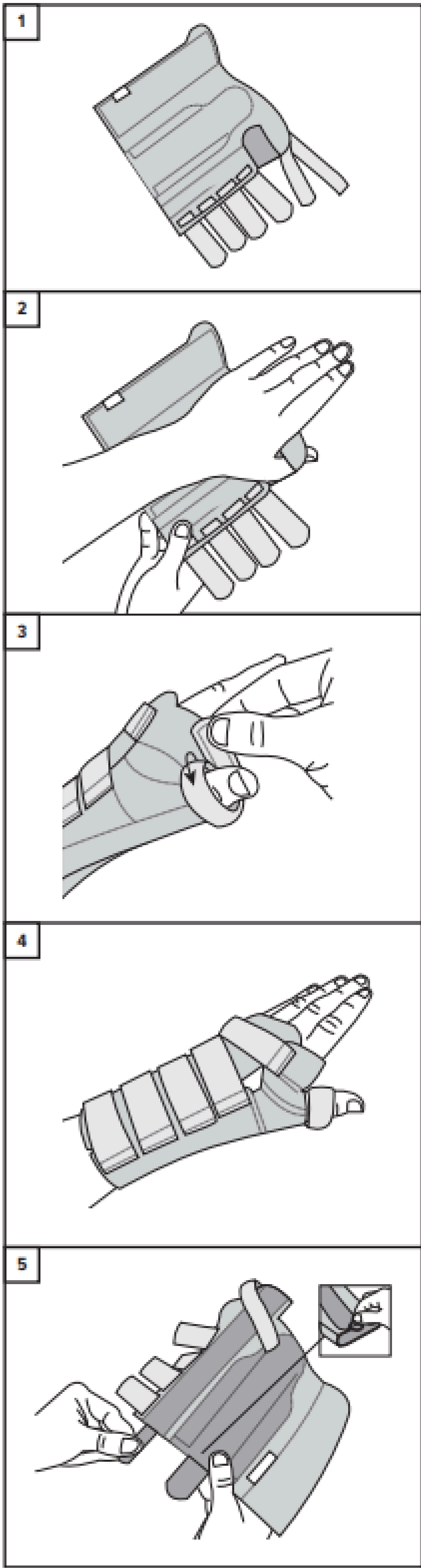

LATVIEŠU VALODA

Izstrādājuma apraksts

Plaukstas locītavas un īkšķa ortoze ar formējamu alumīnija īkšķa šinu, kas stingri notur īkšķi atvilkta stāvoklī (abdukcijā), atbalsta īkšķa metakarpofalangeālo (MP) locītavu un ierobežo kustības karpometakarpālajā (CMC) locītavā.

Lietošana (skatiet attēlus)

1. Atveriet līplentes aizdari un pilnībā izklājiet ortozi.
2. Ievietojiet īkšķi un plaukstu ortozē, kā parādīts attēlā.
3. Aizveriet līplentes aizdares.
4. Droši aizveriet līplentes aizdari ap īkšķi.
5. Nepievelciet siksnas pārāk cieši. Ja nepieciešams, pielāgojiet piegulšanu komfortam, pārliecinoties, ka ortoze atrodas pareizā pozīcijā.
6. Plaukstas locītavas un īkšķa šinās var izņemt, saliekot vajadzīgajā pozīcijā atbilstoši traumai vai saslimšanai un ievietot atpakaļ.

Lietošanas indikācijas

Nodrošina plaukstu locītavas un īkšķa atbalstu
dažādu traumu un saslimšanu gadījumā, kā arī pirms
un pēc operācijas, piemēram:

- artrīta gadījumā;
- saišu un muskuļu sastiepumu gadījumā;
- mīksto audu trauma un saslimšanu gadījumā;
- nestabilitātes gadījumā;
- ārstēšanā pēc lūzuma.

Kontrindikācijas

- Nelietot uz valējām brūcēm.
- Zināma alerģija un/vai paaugstināta jutība pret jebkuru izstrādājuma sastāvā norādīto materiālu.
- Jāievēro piesardzība, nozīmējot pacientiem ar diabētu, asinsvadu mazspēju vai neiropātiju.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Ieteicams, lai sākotnējo pielāgošanu veiktu atbilstoši kvalificēts veselības aprūpes speciālists, kurš noteiks arī lietošanas ilgumu.

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus.
- Ievērojiet visas norādes, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību.
- Nelietojiet, ja skartajā zonā uzklāti ierīvējamie līdzekļi, ziedes, geli, krēmi vai citas vielas.
- Nenododiet lietošanai citam pacientam: tas rada savstarpējas inficēšanās risku un var ietekmēt izstrādājuma integritāti.
- Regulāri pārbaudiet ādas stāvokli un asinsriti, īpaši pacientiem ar diabētu, asinsvadu darbības traucējumiem un neiroloģiskām saslimšanām.
- Ja rodas nevēlamas reakcijas, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu vai izstrādājuma piegādātāju.
- Ierīces izturību var ietekmēt, piemēram, priekšmeti ar asām malām vai liplentes aizdares bojājumi. Lai to novērstu, liplentes aizdarēm vienmēr jābūt aizvērtām, kad ierīce netiek valkāta vai tiek mazgāta.

Mazgāšana un kopšana

1. Aizveriet visas līplentes siksnas un izņemiet metāla šīnu.
2. Mazgājiet ortozi ar rokām vēsā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
3. Izskalojiet un žāvējiet izklātu.
4. Neizgrieziet centrifūgā un nežāvējiet veļas žāvētājā.
5. Nekad nelietojiet veļas mīkstinātāju.
6. Pārbaudiet, vai nav nolietojuma vai bojājumu, kas var ietekmēt lietošanu.
7. Periodiski pārbaudiet, vai līplentes aizdares droši turas.
8. Pirms ortozes atkārtotas lietošanas ievietojiet metāla šīnu atpakaļ. Pārliedzinieties, ka tā ir ievietota pareizā virzienā un pabīdīta zem kabatas malas jeb atlocījumā.

Izstrādājumu saimes materiālu sastāvs

Alumīnijs, hloroprēna gumija, kokvilna, elastāns, elastomērs, neilons, poliamīds, poliesteris, polipropilēns, poliuretāns, PVC, SBR, spandekss, tērauds, TPU, uretāns.

Uzqlabāšana un transportēšana

Uzglabājiēt oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem.

Pārstrāde un utilizācija

lepakojums un izstrādājuma sastāvdaļas jāpārstrādā vai droši jāutilizē atbilstoši vietējiem vai valsts normatīvajiem aktiem.

Nopietns negadījums



Par jebkuru nopietnu negadījumu ziņojiet ražotājam un tās ES dalībvalsts vai citas valsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvojat.



MEDICĪNISKA IERĪCE

**VIENAM PACIENTAM, ATKĀRTOTAI LIETOŠANAI**

UZMANĪBU

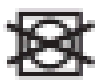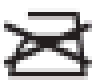

Promedics Orthopaedics Ltd.
Port Glasgow Industrial Estate, Gareloch Road, Port Glasgow,
Scotland, UK, PA14 5XH
Tel: +44 (0) 1475 746 400 | Email: enquiries@promedics.co.uk
www.promedics.co.uk



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands