


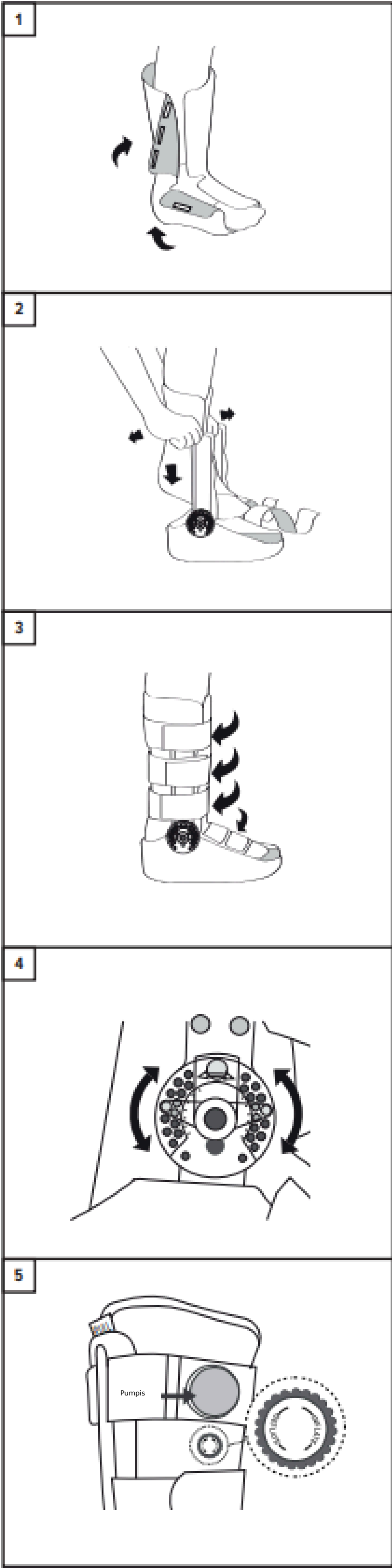

LATVIEŠU VALODA

Izstrādājuma apraksts

Viegla staigāšanas ortoze imobilizācijai ar kustību apjoma regulēšanas šarnīru pēdas noliekšanai uz leju (plantārflleksijai) vai pacelšanai uz augšu (dorsālflleksijai).

Lietošana (skatiet attēlus)

1. Uzliekot ortozi pirmo reizi, atveriet visas siksas un izņemiet oderi. Uzvelciet oderi, pārļiecinoties, ka papēdis tajā ir pilnībā ievietots. Aizveriet līplentes aizdares pēdas un apakšstilba daļā, nodrošinot ciešu piegulšanu.
2. Atvirziet sānu balstus un ievietojiet pēdu ar oderi ortozē tā, lai papēdis piegulētu ortozes aizmugurējai malai. Sānu balstiem jāatrodas pret potītes un apakšstilba vidusdaļu. Piespiediet, lai sānu balsti piestiprinātos pie oderes.
3. Aizveriet siksas, sākot no pirkstiem uz augšu. Tām jābūt stingri pievilkām, taču ne pārāk ciešām.
4. Kustību apjomu (ROM) šarnīru var regulēt ar 7,5° soli gan dorsālflexijai, gan plantārflexijai, maksimālā līdz 45°. Lai izvēlētos vajadzīgo iestatījumu, izvelciet tapas un ievietojiet tās attiecīgajās atverēs. Iestatījumi ir skaidri marķēti. Šarnīru var fiksēt vajadzīgajā leņķī vai iestatīt noteiktu kustību diapazonu. Fiksējot šarnīru izvēlētajā leņķī, ar komplektā iekļauto sešstūra atslēgu jāpievelk sešstūra skrūve.
5. Versija ar gaisu oderi: lai PIEPŪSTU gaisa kameras, pagriežiet regulatoru pozīcijā "INFLATE" un spiediet pumpi. Lai IZLAISTU GAISU, pagriežiet regulatoru pozīcijā "DEFLATE" un izspiediet gaisu no kamerām.

Lietošanas indikācijas

- Rehabilitācija pēc operācijas.
- Stabili mazā lielakaula, veltņa kaula, papēža kaula un potīšu lūzumi.
- Kontrolēta rehabilitācija pēc Ahilleja cīpslas operācijas.

Kontrindikācijas

- Nav paredzēta nestabiliem lūzumiem.
- Nelieciet tieši uz bojātas ādas.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Ieteicams, lai sākotnējo pielāgošanu veiktu atbilstoši kvalificēts veselības aprūpes speciālists, kurš noteiks arī lietošanas ilgumu.

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus.
- Ievērojiet visas norādes, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību.
- Nelietojiet, ja skartajā zonā uzklāti ierīvējamie līdzekļi, ziedes, geli, krēmi vai citas vielas.
- Nenododiet lietošanai citam pacientam: tas rada savstarpējas inficēšanās risku un var ietekmēt izstrādājuma integritāti.
- Regulāri pārbaudiet ādas stāvokli un asinsriti, īpaši pacientiem ar diabētu, asinsvadu darbības traucējumiem un neiroloģiskām saslimšanām.
- Ja rodas nevēlamas reakcijas, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu vai izstrādājuma piegādātāju.
- Ierīces izturību var ietekmēt, piemēram, priekšmeti ar asām malām vai līdentes aizdares bojājumi. Lai to novērstu, līdentes aizdārēm vienmēr jābūt aizvērtām, kad ierīce netiek valkāta vai tiek mazgāta.

Mazgāšana un kopšana

1. Izņemiet oderi no ortozes.
2. Mazgājiet oderi ar rokām vēsā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
3. Izskalojiet un žāvējiet izklātu.
4. Neizgrieziet centrīgajā un nežāvējiet veļas žāvētājā.
5. Nekad nelietojiet veļas mīkstinātāju.
6. Pārbaudiet, vai nav nolietojuma vai bojājumu, kas var ietekmēt lietošanu.
7. Noslaukiet apvalku ar tīru, mitru drānu un saudzīgu mazgāšanas līdzekli un ļaujiet nožūt gaisā.
8. Periodiski pārbaudiet, vai līplentes aizdares droši turas.

Izstrādājumu saimes materiālu sastāvs

Alumīnijs, EVA, stikla šķiedra, niķelis, neilons,
poliamīds, polikarbonāts, poliesteris, polietilēns,
poliolefīns, polipropilēns, poliuretāns, POM,
poliuretāna (PU) putas, tērauds, TPR, TPU.

Uzqlabāšana un transportēšana

Uzglabājiēt oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem.

Pārstrāde un utilizācija

lepakojums un izstrādājuma sastāvdaļas jāpārstrādā vai droši jāutilizē atbilstoši vietējiem vai valsts normatīvajiem aktiem.

Nopietns negadījums

Par jebkuru nopietnu negadījumu ziņojiet ražotājam un tās ES dalībvalsts vai citas valsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvojat.




MEDICĪNISKA IERĪCE

**VIENAM PACIENTAM, ATKĀRTOTAI LIETOŠANAI**

UZMANĪBU



Promedics Orthopaedics Ltd.
Port Glasgow Industrial Estate, Gareloch Road, Port Glasgow,
Scotland, UK, PA14 5XH
Tel: +44 (0) 1475 746 400 | Email: enquiries@promedics.co.uk
www.promedics.co.uk

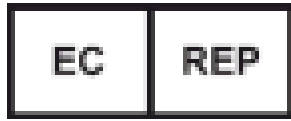

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands