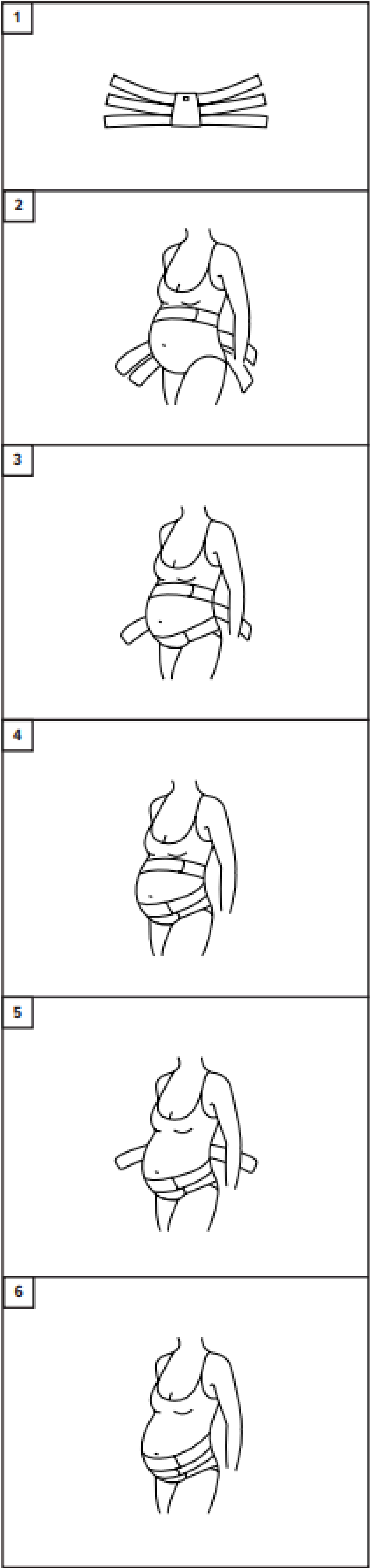




LATVIEŠU VALODA

Izstrādājuma apraksts

Iegurņa nestabilitātes novēršanai paredzēta josta ar vairākām siksnām. Katram siksnu pārim var regulēt spriegojumu, nodrošinot stingrāku fiksāciju kaunuma apvidū un vieglāku spriegojumu zem vēdera. Mazgāšanas norādes attiecas arī uz atbalsta saiti.

Lietošana (skatiet attēlus)

1. Atveriet jostu un novietojiet to uz muguras lejasdaļas. Jostas platajai daļai (etiķete iekšpusē un augšmalā) cieši jāpieguļ muguras izliekumam.
2. Īslaicīgi nostipriniet jostu, pieliekot augšējās siksnas ap vēdera augšdaļu un vaļīgi savienojot tās.
3. Virziet apakšējās siksnas uz leju un uz priekšu zem vēdera apakšdaļas pāri kaunuma kaulam. Pievelciet tik cieši, cik vajadzīgs atbalstam, neradot pārmērīgu spiedienu uz kaunuma simfīzi. Savienojiet siksnas.
4. Tādā pašā veidā aplieciet vidējās siksnas un savienojiet tās tieši virs apakšējā pāra, nedaudz to pārklājot.
5. Vēlreiz pielāgojiet augšējās siksnas, virzot tās uz leju un uz priekšu, lai tās nedaudz pārklātu vidējo pāri. Nenovietojiet augšējās siksnas krūšu kaula līmenī.
6. Attēlā redzams visu siksnu galīgais novietojums: tās savstarpēji pārklājas, nodrošinot pilnvērtīgu iegurņa atbalstu.

Lietošanas indikācijas

Josta paredzēta grūtniecēm. Katram siksnu pārim var regulēt spriegojumu, nodrošinot stingrāku fiksāciju kaunuma apvidū un vieglāku spriegojumu zem vēdera. To var pielāgot stāvēšanai vai sēdēšanai un valkāt virs apģērba. Tā nodrošina stingru atbalstu visapkārt iegurnim, stabili noturot abas krustu kaula un zarnkaula locītavas un kaunuma simfīzi. Ieteicams konsultēties ar ārstu par piemērotākās jostas izvēli un valkāšanas režīmu.

Kontrindikācijas

- Nav piemērota ilgstošai lietošanai.
- Pārliecinieties, ka josta nav pārāk cieša un nespiež.
- Zināma alerģija un/vai paaugstināta jutība pret jebkuru izstrādājuma sastāvā norādīto materiālu.
- Regulāri pārbaudiet ādas stāvokli un asinsriti.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Ieteicams, lai sākotnējo pielāgošanu veiktu atbilstoši kvalificēts veselības aprūpes speciālists, kurš noteiks arī lietošanas ilgumu.

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus.
- Ievērojiet visas norādes, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību.
- Nelietojiet, ja skartajā zonā uzklāti ierīvējamie līdzekļi, ziedes, geli, krēmi vai citas vielas.
- Nenododiet lietošanai citam pacientam: tas rada savstarpējas inficēšanās risku un var ietekmēt izstrādājuma integritāti.
- Regulāri pārbaudiet ādas stāvokli un asinsriti, īpaši pacientiem ar diabētu, asinsvadu darbības traucējumiem un neiroloģiskām saslimšanām.
- Ja rodas nevēlamas reakcijas, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu vai izstrādājuma piegādātāju.
- Ierīces izturību var ietekmēt, piemēram, priekšmeti ar asām malām vai līplentes aizdares bojājumi. Lai to novērstu, līplentes aizdarēm vienmēr jābūt aizvērtām, kad ierīce netiek valkāta vai tiek mazgāta.

Mazgāšana un kopšana

1. Aizveriet visas līplentes siksnas.
2. Mazgājiet ar rokām vēsā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
3. Izskalojiet un žāvējiet izklātu.
4. Neizgrieziet centrifūgā un nežāvējiet veļas žāvētājā.
5. Nekad nelietojiet veļas mīkstinātāju.
6. Pārbaudiet, vai nav nolietojuma vai bojājumu, kas var ietekmēt lietošanu.
7. Periodiski pārbaudiet, vai līplentes aizdares droši turas.

Izstrādājuma materiālu sastāvs

Neilons, poliesteris, elastāns, kokvilna.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem.

Pārstrāde un utilizācija

Iepakojums un izstrādājuma sastāvdaļas jāpārstrādā vai droši jāutilizē atbilstoši vietējiem vai valsts normatīvajiem aktiem.

Nopietns negadījums

Par jebkuru nopietnu negadījumu ziņojiet ražotājam un tās ES dalībvalsts vai citas valsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvojat.

MD

MEDICĪNISKA IERĪCE



VIENAM PACIENTAM, ATKĀRTOTAI LIETOŠANAI



UZMANĪBU





Promedics Orthopaedics Ltd.

Port Glasgow Industrial Estate, Gareloch Road, Port Glasgow,

Scotland, UK, PA14 5XH

Tel: +44 (0) 1475 746 400 | Email: enquiries@promedics.co.uk

www.promedics.co.uk



EC

REP

EMERGO EUROPE

Westervoortsedijk 60,

6827 AT Arnhem

The Netherlands