
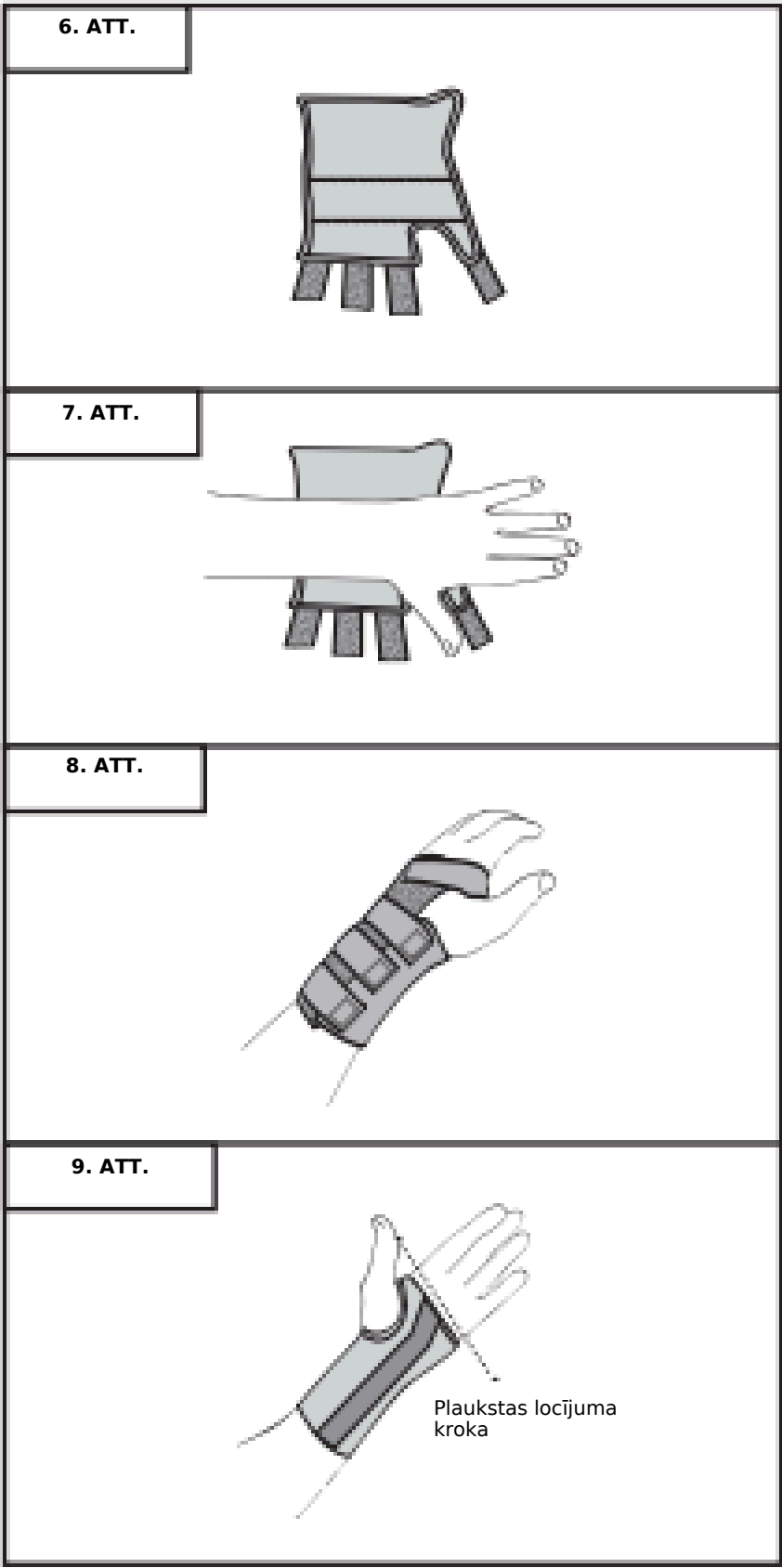


UDS - Ortoze ulnārās deviācijas korekcijai

LV PLĀUKSTAS ORTOZE

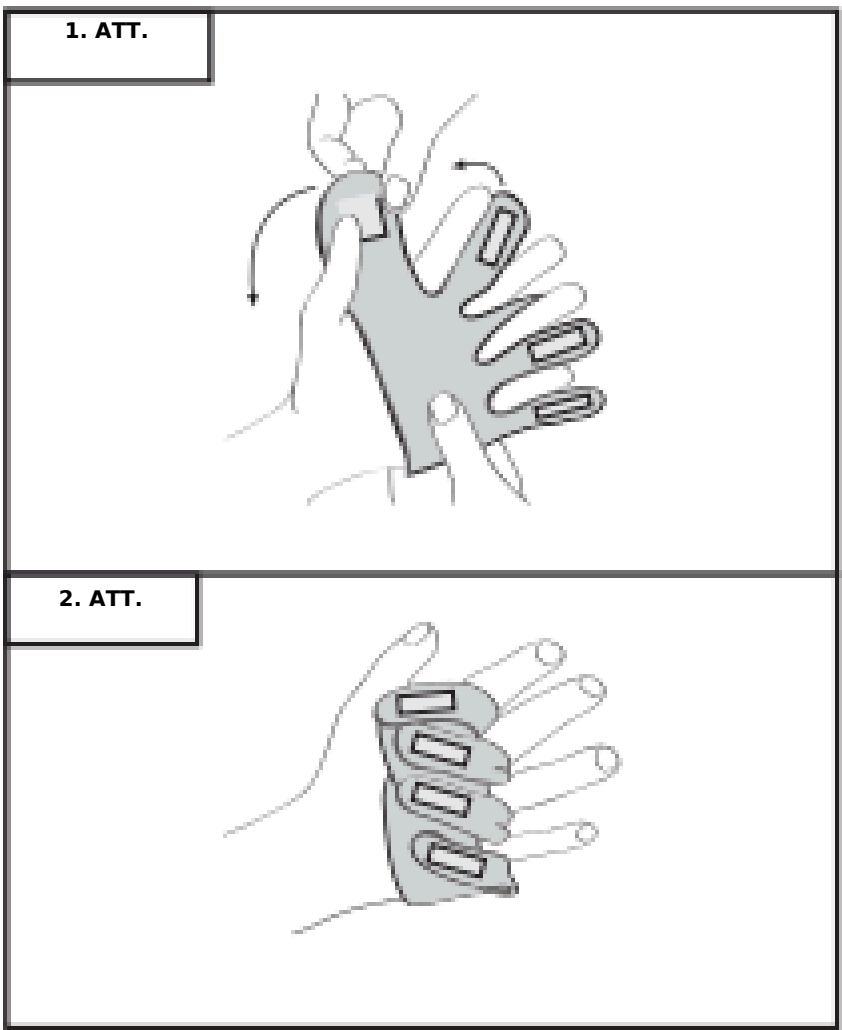

LATVIEŠU VALODA

Izstrādājuma apraksts

Palīdz atbalstīt metakarpofalangeālās (MCP) locītavas un mazināt pirkstu novirzi uz elkoņkaula pusi, saglabājot pirkstu funkcionālu lietošanu.

Lietošana (skatiet 1. un 2. attēlu)

1. Novietojiet ortozes platu vidusdaļu pāri plaukstai, vienu galu izverot caur pirkststarpu. Piestipriniet līplentes āķīšu galu plauksts mugurpusē. Ortozei jāatrodas tieši pirms MCP locītavām, tuvāk plauksts locītavai (1. attēls).

2. Novietojiet pirmo plaukstu puses pagarinājumu starp rādītājpirkstu un vidējo pirkstu (1. attēls). Izveriet pagarinājumu caur rādītājpirksta pirkststarpu, apliecinot ap rādītājpirkstu un velciet slīpi plaukstu spieķkaula malas pēc īkšķa puses virzienā. Ar līplentes āķīšu uzgal nostipriniet to uz ortozes platās daļas.

3. Turpiniet tāpat: aplieciet nākamo pagarinājumu ap nākamo pirkstu un piestipriniet pie iepriekšējā pagarinājuma, katru pārkļāvojot spieķkaula jeb īkšķa puses virzienā. Pēdējo pagarinājumu aplieciet ap mazā pirkstu no mugurpuses un piestipriniet pie iepriekšējā pagarinājuma (2. attēls).

4. Ja nepieciešams, apgrieziet ortozi un siksnas galu.
5. Noņemšana: ja tas nerada diskomfortu, laika
taupīšanai atveriet tikai plaukstas mugurpusēs daļu un
noņemiet ortozi, neatverot pirkstu daļas. Tādējādi tā
būs iepriekš noregulēta nākamajai uzlikšanai bez
būtiskas pielāgošanas.

**Bērnu ortozei ulnārās deviācijas korekcijai
skatiet 6.-9. attēlu.**

Lietošanas indikācijas

Nodrošina atbalstu MCP locītavām un mazina pirkstu novirzi uz elkoņkaula pusi, saglabājot pirkstu funkcionālu lietošanu. Izgatavota no neoprēna, kas nodrošina siltumu un atbalstu. Piemērota, piemēram, reimatoīdā artrīta gadījumā.

Ieteicams konsultēties ar ārstu par piemērotākās ortozes izvēli un valkāšanas režīmu.

Kontrindikācijas

- Nelietot uz valējām brūcēm.
- Zināma alerģija un/vai paaugstināta jutība pret jebkuru izstrādājuma sastāvā norādīto materiālu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Ieteicams, lai sākotnējo pielāgošanu veiktu atbilstoši kvalificēts veselības aprūpes speciālists, kurš noteiks arī lietošanas ilgumu.

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus.
- Ievērojiet visas norādes, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību.
- Nelietojiet, ja skartajā zonā uzklāti ierīvējamie līdzekļi, ziedes, geli, krēmi vai citas vielas.
- Nenododiet lietošanai citam pacientam: tas rada savstarpējas inficēšanās risku un var ietekmēt izstrādājuma integritāti.
- Regulāri pārbaudiet ādas stāvokli un asinsriti, īpaši pacientiem ar diabētu, asinsvadu darbības traucējumiem un neiroloģiskām saslimšanām.
- Ja rodas nevēlamas reakcijas, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu vai izstrādājuma piegādātāju.
- Ierīces izturību var ietekmēt, piemēram, priekšmeti ar asām malām vai līplentes aizdarēs bojājumi. Lai to novērstu, līplentes aizdarēm vienmēr jābūt aizvērtām, kad ierīce netiek valkāta vai tiek mazgāta.

Mazgāšana un kopšana

1. Aizveriet visas līplentes siksas un izņemiet metāla šīnu (skatiet A attēlu).
2. Mazgājiet ortozi ar rokām vēsā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
3. Izskalojiet un žāvējiet izklātu.
4. Neizgrieziet centrifūgā un nežāvējiet veļas žāvētājā.
5. Nekad nelietojiet veļas mīkstinātāju.
6. Pārbaudiet, vai nav nolietojuma vai bojājumu, kas var ietekmēt lietošanu.
7. Periodiski pārbaudiet, vai līplentes aizdares droši turas.
8. Pirms ortozes atkārtotas lietošanas ievietojiet metāla šīnu atpakaļ. Pārliecinieties, ka tā ir ievietota pareizā virzienā un pabīdīta zem kabatas malas jeb atlocījuma (skatiet B attēlu).

Izstrādājumu saimes materiālu sastāvs

Alumīnijs, elastāns, Lycra, neilons, poliamīds, poliesteris, poliuretāns, SBR, spandekss, TPU.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiēt oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā,
sargājot no tiešiem saules stariem.

Pārstrāde un utilizācija

lepakojums un izstrādājuma sastāvdaļas jāpārstrādā vai droši jāutilizē atbilstoši vietējiem vai valsts normatīvajiem aktiem.

Nopietns negadījums

Par jebkuru nopietnu negadījumu ziņojiet ražotājam un tās ES dalībvalsts vai citas valsts kompetentajai iestādei, kurā dzīvojat.

