

ATBILSTĪBU NODROŠINOŠA APKĀRTĒJĀS VIDES VIRSMU DEZINFEKCIJA

Incidin® OxyFoam & OxyWipe


Lietošanai gatavs tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis ar ātras iedarbības H₂O₂™

Inovatīvais Incidin OxyFoam & Incidin OxyWipe sastāvs sniedz priekšrocības, ko nodrošina patentētais (patenta nr. EP1987121) ūdeņraža peroksīda šķīdums ar plaša spektra iedarbību.

Līdzekļiem ir plaša spektra iedarbība pret baktērijām un vīrusiem un, pateicoties straujajam iztvaikošanas ātrumam, uz virsmām nepaliek aktīvās vielas atliekas.

Incidin OxyFoam & OxyWipe priekšrocības:

- ▲ Ātras iedarbības H₂O₂™
- ▲ Atbilstība EN 16615
- ▲ Lieliska materiālu saderība

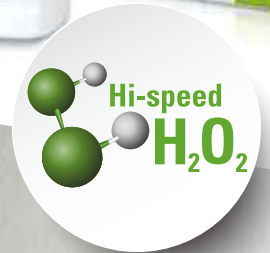

Incidin® OxyFoam & OxyWipe

Lietošanai gatavs līdzeklis ar ātras iedarbības H₂O₂™

15 SEC. Baktericīds
(EN 13727 / 16615)

15 SEC. Virucīds pret apvalkotiem vīrusiem

15 MIN. NORO virucīds

Īpašības	leguvumi
EFEKTĪVS	Plašs iedarbības spektrs Īss iedarbības laiks
DROŠS	
ĒRTS	Vienlaicīgi tīra un dezinficē

MIKROBIOLOĢISKO UN VIRUSOLOĢISKO TESTU REZULTĀTI

NEATŠĶĪDĪTA PRODUKTA IEDARBĪBA	OxyFoam IEDARBĪBAS LAIKS	OxyWipe IEDARBĪBAS LAIKS
Vīrusu dezinfekcija saskaņā ar Vācijas higiēnas asociācijas (VAH) 2015.gada metodi (iesk. EN 1665), netīri apstākļi		
Baktericīds, levurocīds	5 min	15 min
Fungicīds	15 min	15 min
Mikobaktericīds	15 min	60 min
Testēts saskaņā ar RKI 01/2004* ieteikumiem (netīri apstākļi)		
Iedarbība pret apvalkoti vīrusiem sask. ar RKI 01/2004* ieteikumiem	15 sec	30 sec
Adeno*	1 min	15 min
Polyoma SV40*	30 sec	30 sec
Rota*	30 sec	30 sec
Eiropas standarts (tīri un netīri apstākļi)		
EN 13727 (baktericīds)	15 sec	1 min
EN 13624 (levurocīds)	1 min	15 min
EN 13624 (fungicīds)	5 min	15 min
EN 14348 (tuberkulocīds, mikobaktericīds)	5 min	30 min
EN 14476 Adeno	30 sec	1 min
EN 14476 Noro	15 min	60 min (netīri apstākļi)
Eiropas standarts (netīri apstākļi) - 4 lauku tests		
EN 16615 (baktericīds)	15 sec	5 min
EN 16615 (levurocīds)	15 sec	1 min
EN 16615 (fungicīds)	5 min	5 min
EN 16615 (tuberkulocīds, mikobaktericīds)	15 min	60 min

* DWV 2008

INCIDIN OXYFOAM LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



- 1 Apsmidziniet vīrusu no apt. 30 cm attāluma.
- 2 Ar drānu izlīdziniet uzsmidzināto līdzekli tā, lai visa apstrādājamā virsma būtu mitra.
- 3 Laujiet nožūt.



- 1 Uzsmidziniet līdzekli uz tīras drānas.
- 2 Ar drānu uzklājiet līdzekli tā, lai visa apstrādājamā virsma būtu mitra.
- 3 Ļaujiet nožūt.

ECOLAB
DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany
+49 (0) 2173 599 0
www.de.ecolab.eu

CE 0297

Ecolab SIA
Bauskas iela 58a, Rīga,
LV-1004, Latvija,
Tel. +371 670 63 770

EFEKTĪVS.
DROŠS.
ĒRTS.

PIELIETOJUMS

Incidin OxyFoam: Izsmidzi-
nāmās putas medicīnisko ierīču
(t.sk., piemēram, zonžu) vīrusu
un inventāra, un citu vīrusu tīrī-
šanai un dezinfekcijai veselības
aprūpes iestādēs.



Incidin OxyWipe: Salvetes
medicīnisko ierīču (t.sk., piemē-
ram, zonžu) vīrusu un inventāra,
un citu vīrusu tīrīšanai un dezinfekcijai
veselības aprūpes iestādēs.



© BIOZID N-12164

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Incidin OxyFoam: Apsmidziniet vīrusu no
apm. 30cm attāluma vai uzsmidziniet uz tīras
drānas. Pārliecinieties, ka uz ekspozīcijas laiku
visa virsma ir pilnīgi samitrināta. Ir pieļaujama
arī produkta izsmidzināšana uz salvetes un
vīrusmas tīrīšana ar to. Pēc tam ļaujiet vīrusmai
nožūt.

Incidin OxyWipe: Paņemiet vienu salveti.
Bagātīgi samitriniet visu vīrusu. Ļaujiet nožūt,
nav nepieciešams noskalot. Pārliecinieties, ka
visa virsma ir tīkusi samitrināta. Pēc lietošanas
aizveriet iepakojuma vāciņu. Nav paredzēts
invazīvo medicīnas ierīču dezinfekcijai.
Nelietot uz vīrusmām, kas jutīgas pret oksidē-
tājiem, piem., uz marmora, vara vai misiņa.

SASTĀVDAĻAS

100 g satur:

Incidin OxyFoam: 1.5g Ūdeņraža peroksīda
Incidin OxyWipe: 1.0g Ūdeņraža peroksīda
LV28122015/8716

INFORMĀCIJA PASŪTĪTĀJIEM

PRODUKTS	Iepakoju- ma lielums	Produkta kods
Incidin OxyFoam	6 x 750ml	3082160
Incidin OxyWipe	6 x 100 salvetes	3083040

UZGLABĀŠANA

Uzglabājiet produktu oriģinālajā iepakojumā,
temperatūrā, kas zemāka par 25°C vēsā,
sausā vietā. Sargājiet no tiešas saules gaismas
ietekmes.

Glabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas:
Incidin OxyFoam: līdz norādītā derīguma
termiņa beigām
Incidin OxyWipe: 1 mēnesis

LIETOJIET BIOCIDUS UZMANĪGI. PIRMS LIETOŠANAS
VIENMĒR IZLASIET ETIKETI UN INFORMĀCIJU PAR
BIOCĪDU. TĪKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.