

SASNIEGUMS PROFESIONĀLAJĀ VIRSMU DEZINFEKCIJĀ!

Incidin® Pro

Jauns, aldehīdus nesaturošs dezinfekcijas līdzeklis virsmām un medicīnas ierīcēm.

Incidin® Pro ar jauno "SMART-BALANCED" formulu nosaka jaunus standartus profesionālajā virsmu tīrīšanas un dezinfekcijas jomā.



Jūsu Pro - ātrums

Jūsu Pro - efektivitāte

Jūsu Pro - saderība ar virsmām



JAUNUMS!

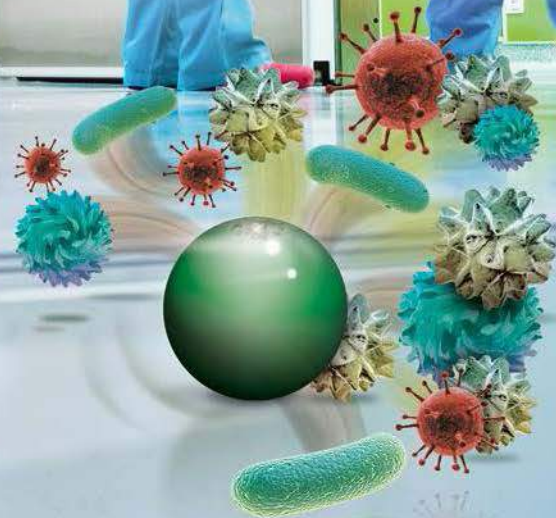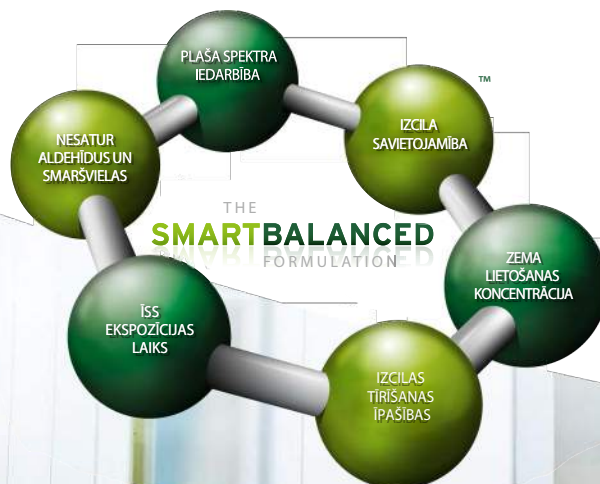

Incidin® Pro

Jauns, aldehīdus nesaturošs dezinfekcijas līdzeklis virsmām un medicīnas ierīcēm.

Mūsu sasniegumi	Jūsu ieguvumi
Plaša spektra iedarbība - pārbaudīts atbilstoši jaunākajiem EN standartiem	Efektīva dezinfekcija un tīršana
Īss ekspozīcijas laiks un zema koncentrācija	Laika un izmaksu ietaupījums
Lieliskas tīršanas īpašības	Virsmu tīršana ar labas saderības produktu
Lieliska saderība ar virsmām	Saderīgs ar metāla, linoleja, PVC, keramikas, gumijas un plastmasas virsmām

IEDARBĪBA	KONCENTRĀCIJA		MINIMĀLAIS EKSPOZĪCIJAS LAIKS (min.)
	%	ml/L	
VAH - saraksts (baktericīds, levurocīds)			
Virsmu dezinfekcija atbilstoši Vācijas Lietišķās Higiēnas Asociācijas (VAH) prasībām, mehāniska tīršana, tīros un netīros apstākļos	0,5 / 1,0	5 / 10	30 / 15
Saskaņā ar Roberta Koha institūta (RKI) vadlinijām 1/2004			
Ierobežoti virucīds (HIV, HBV, HCV)	0,25/ 0,5	2,5 / 5	30 / 15
Eiropas standarti			
EN 13727 (baktericīds, tīros netīros apstākļos)	0,25	2,5	5
EN 13624 (levurocīds, tīros netīros apstākļos)	0,25	2,5	5
EN 14348 (mikobaktericīds)	1,5	15	60
EN 14476 (Norovīruss)*	1,0 / 1,5	10 / 15	60 / 30
Testēšana saskaņā ar DGHM 2001			
Mikobaktericīds	2,0 / 4,0	20 / 40	120 / 60
Testēšana atbilstoši DVV 2008			
Norovīruss (peļu)	1,5	15	30
Rota vīruss	1,0 / 1,5	10 / 15	60 / 5
Adenovīruss	2,0	20	60
Poliomas vīruss SV40	1,5	15	15

* netīros apstākļos

ĀTRS. EFEKTĪVS. SADERĪGS.

PIELIETOJUMS

Profesionāls tīršanas un dezinfekcijas līdzeklis virsmām un medicīnas ierīcēm.

NORĀDĪJUMI

Lietojiet biocīdus uzmanīgi!
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.
Atkritumos nododiet tikai pilnīgi iztīrto un noslēgtu iepakojumu.
Produkta atlikumi: skatīt drošības datu lapu.

SASTĀVS

100 g satur: 10.0 g 2-Fenoksietanolu, 8.0 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīnu, 7.5 g četrāzvīdotā amonija savienojumus, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdus.

INFORMĀCIJA PASŪTĪJUMIEM

Produkts	Iepakojums	Produkta kods
Incidin® Pro Pudele	3 x 2 L	30 769 10
Incidin® Pro Kanna	6 L	30 767 50

LIETOJIET BIOCIDUS UZMANĪGI!
PIRMS LIETOŠANAS VIENMĒRS IZLASĪT ETIĶETI UN INFORMĀCIJU PAR PRODUKTU.

Biocīda inventarizācijas nr. LV: LV05082014/4992

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen, Zurich
www.ecolab.com

Ecolab SIA
Rītausmas iela 11B, Rīga,
LV - 1058, Latvija,
Tel. +371 670 63 770



ECOLAB®