



DEZINFEKCIJAS PUTAS ĶIRURĢISKIEM INSTRUMENTIEM

Aniosyme Prime

PIRMSAPSTRĀDES PUTAS MEDICĪNISKIEM UN ĶIRURĢISKIEM INSTRUMENTIEM

- Formula, kas apvieno divas patentētas efektivitātes koncepcijas
- Nodrošina mitruma līmeni, lai novērstu bioloģiskā materiāla izžūšanu
- Antimikrobu iedarbība 15 minūtēs
- Blīvas putas: instrumenti ir vienmērīgi pārklāti
- Materiālu un vides saderība
- Kontaminētu instrumentu glabāšana putās līdz 72 stundām
- Nesatur hlorīdus - nav kodīgs
- Nesatur aldehīdus - nenotiek proteīnu fiksācija pie instrumentiem
- Atbilst IIb klases medicīnas ierīcei




Aniosyme Prime

PIRMSAPSTRĀDES PUTAS MEDICĪNISKIEM UN KIRURGISKIEM INSTRUMENTIEM


RAKSTUROJUMS

- Trīs-enzīmu komplekss: proteāzes, lipāzes, amilāzes, apvienojumā ar virsmaktīvajām vielām
- Nekorozīvs materiāliem
- Neveido aerosolu, veido putu pārklājumu
- Lietošanai gatavs produkts, ergonomiska putu pistoles forma
- Produkta pH: 8 +/- 0,5
- Palīdz notīrīt traipus skalošanas laikā
- Pierādīta fermentatīvā stabilitāte
- Augsta skalošanas spēja


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

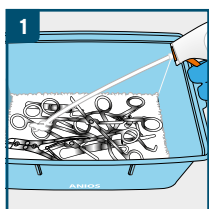

1. Izsmidziniet mērcēšanas vannas dibenu ar Aniosyme Prime un ievietojiet savāktos instrumentus.

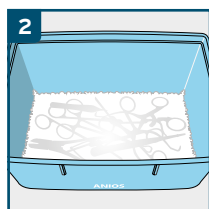

2. Pārsedziet visus instrumentus ar putām.

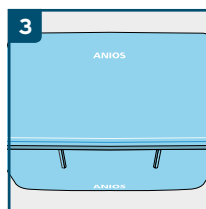

3. Uzlieciet vaku.



4. Pirms automātiskās (ja mašīnai nav skalošanas programma) vai manuālas tīrīšanas skalojiet instrumentu.

MIKROBIOLOĢISKĀ AKTIVITĀTE

PRASĪBA/NOSACĪJUMI	KONTAKTA LAIKS
Baktericīds Saskaņā ar EN 1040, EN 13727, EN 14561 un EN 13727 pret MDRB	15 min
Mikobaktericīds Saskaņā ar EN 14348 un EN 14563 (M. terrae) Saskaņā ar EN 14348 un EN 14563 (M. AVIUM)	30 min 60 min
Raugus iznīcinotājs Saskaņā ar EN 1275, EN 13624 un EN 14562	15 min
Virucidāls Saskaņā ar EN 14476+A1 PRV (HBV aizstājējs) BVDV (HCV surogāts) Herpes vīruss, HIV-1, Vaccinia vīruss	5 min

IEPAKOJUMS

PRODUKTS	IEPAKOJUMS	KODS
Aniosyme Prime	12 x 750ml	3091440



ANIOS
CE 0459
Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes
France

Distributed by:
SIA "Medilink"
Višķu iela 2 k-1, Rīga, LV-1063
67840380, medilink@medilink.lv
www.medicinaspreces.lv

DARBĪBAS JOMA

Medicīnisko un ķirurģisko instrumentu pirmapstrāde ar putām: transportēšanas laikā mitrā režīmā vai netīru instrumentu uzglabāšanas laikā pirms manuālas vai mašīnas tīrīšanas. Produkts uztur pietiekamu mitruma līmeni, lai izvairītos no asins un citu organisko materiālu izžūšanas.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Izsmidziniet mērcēšanas vannas dibenu ar Aniosyme Prime un ievietojiet savāktos instrumentus.
2. Pārsedziet visus instrumentus ar putām.
3. Uzlieciet vaku.
4. Pirms automātiskās (ja mašīnai nav skalošanas programma) vai manuālas tīrīšanas skalojiet instrumentu.

SASTĀVS

Četraizvietotā amonija karbonāts, nejonu virsmaktīvās vielas, fermentu komplekss (proteāze, lipāze, amilāze), sekvēstrēšanas līdzekļi, palīgvielas.

UZGLABĀŠANA

Bīstami – ievērojiet lietošanas piesardzības pasākumus (kas izstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas noteikumiem par ķīmisko produktu klasifikāciju un marķēšanu). Uzglabāšana: no +5°C līdz +35°C.

SERTIFIKĀTI

Medicīnas ierīce. Pilna Aniosyme Prime antimikrobiālā aktivitāte ir iekļauta zinātniskajā dokumentācijā, kas pieejama pēc pieprasījuma.

MEDICĪNAS IERĪČU DROŠA LIETOŠANA

Lūdzu, izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.



TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.

ECOLAB®

www.ecolab.com