



ALLMOBILITY TRADING S.r.l.

Galvenais birojs: Via G. Balla, 4 42124 Reggio Emilia (RE) – ITĀLIJA

Juridiskā adrese: Via Mentana, 150 43100 Parma (PR) - ITĀLIJA

Tālr. 0522-941078

E-pasts: info@allmobility.it

Tīmekļa vietne: www.allmobility.it

"BUFFALO 150" PALIKTNIS

LIETOTĀJA PĀRSĒŠANĀS ATBALSTS



Produkts atbilst direktīvas 2007/47/EK prasībām.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Versija 001-16

SATURS

1. PRODUKTA APRAKSTS.....	3
2. TEHNISKIE PARAMETRI	5
3. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA	6
4. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA.....	7
5. UTILIZĀCIJA.....	9
6. GARANTĪJA - PALĪDZĪBA	9
7. <i>BUFFALO GRIP 150</i> VERSIJA.....	10

1. PRODUKTA APRAKSTS

Šajā instrukcijā aprakstītais produkts ir sintētiskas šķiedras paliktnis ar viegli slīdošu virsmu, kas ļauj lietotājam pārsēties.

Šī konstrukcija ir vienkārši transportējama, tā ir tikai 4 mm bieza un aprīkota ar pārnēsāšanas atveri.


BUFFALO 150 paliktnis ir košā krāsā ar divām gropēm, kas pārsēšanās laikā nodrošina lielāku stabilitāti un maksimālu drošību.

Kompozītā šķiedra nodrošina augstu pretestību un novērš kaitīgo virsmas atslāņošanos, kas citiem materiāliem notiek laika gaitā.

BUFFALO 150 paliktni raksturo lietošanas elastīgums un daudzveidība.

To var vienkārši lietot, lai pārsēstos nelielā attālumā jebkurā telpā, piemēram, guļamistabā, dzīvojamā istabā, virtuvē vai vannas istabā; vai ārpus telpām, piemēram, automobilī, uz sola vai krēsla, izkāptu no ratiņkrēsla vai iesēstos tajā.

Ilustrācijas

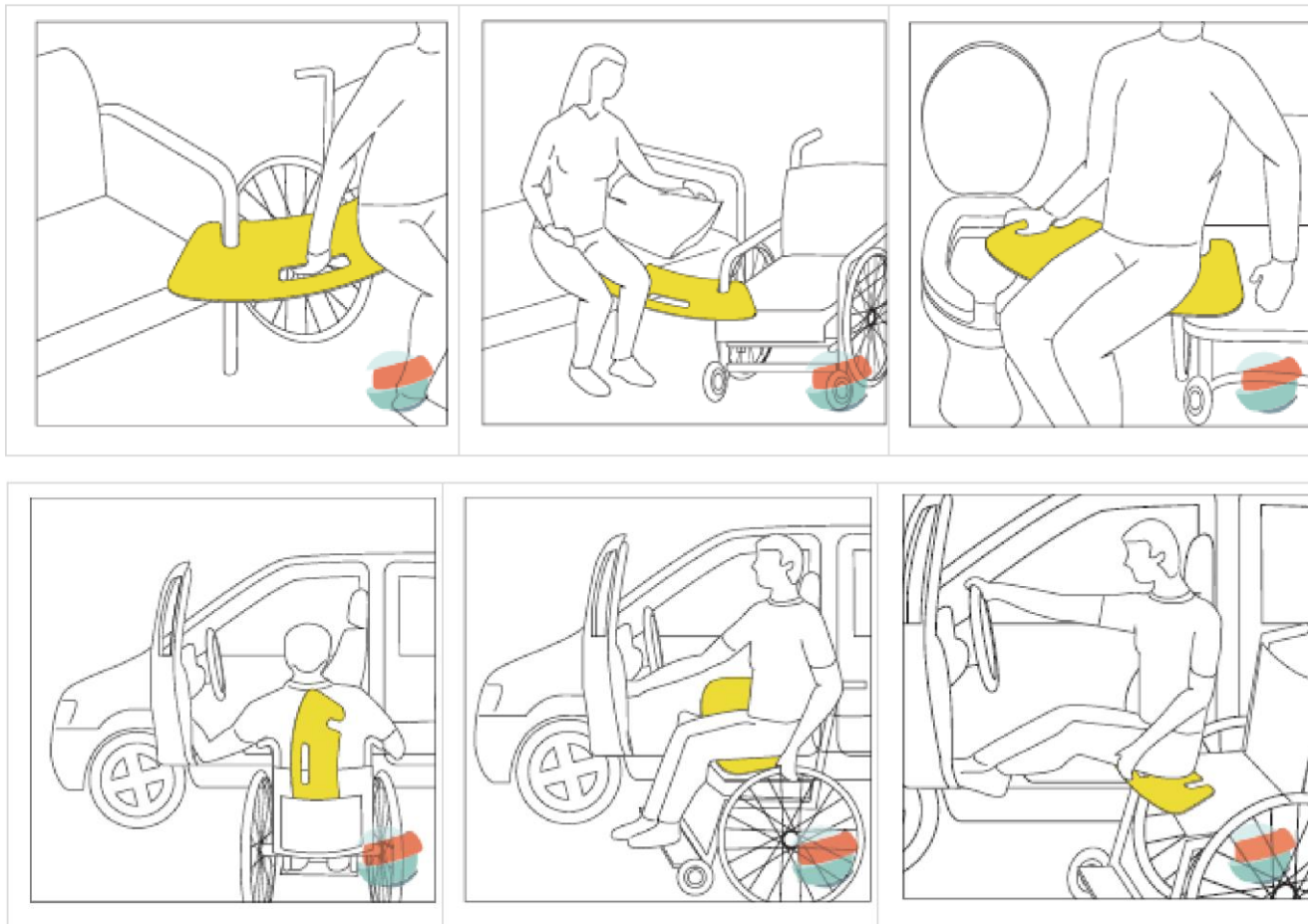



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PĀRVIETOŠANĀS PALIKTNIS - *BUFFALO 150*

Dok. kods:
AII03

25/02/2016 Red. 0
4. no 8 lpp.

2. TEHNISKIE PARAMETRI

"BUFFALO 150" PALIKTNIS

IZMĒRI	SVARS (kg)	NESTSPĒJA (kg)
 77 cm  32,5 cm  0,4 cm <i>GARUMS = 77 cm</i> <i>PLATUMS = 32,5 cm</i> <i>BIEZUMS = 0,4 cm</i>	1,23	150 <i>sadalīta pa 40 cm virsmu, ar</i> <i>25 kg atbalsta svaru malās</i>

GLABĀŠANAS TEMPERATŪRA

PIEĻAUJAMĀS TEMPERATŪRAS DIAPAZONS:

MINIMUMĀLĀ = -5 °C

MAKSIMĀLĀ = +40 °C

3. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Paliktnis ir izstrādāts un izgatavots drošai lietošanai paredzētā veidā, kamēr to izmanto un uzglabā atbilstoši norādījumiem šajā instrukcijā.

Lai samazinātu riska situācijas, lietotājam jāievēro turpmāk minētie galvenie lietošanas un pareizas uzglabāšanas norādījumi.



= PIEVĒRSIET UZMANĪBU!



= AIZLIEGTA DARBĪBA


	Paliktnis ir medicīnisks līdzeklis, lai atvieglotu cilvēka ar īpašām vajadzībām pārsēšanos no ratiņkrēsla citā sēdvietā. LIETOJIET PALIKTNI TIKAI 2. NODAĻĀ APRAKSTĪTAJIEM MĒRĶIEM, NELIETOJIET NEKAM CITAM.
	NELIETOJIET PALIKTNI, JA TAM IR JEBKĀDAS BOJĀJUMU, DEFORMĀCIJAS, PLAISU, NODILUMA, LŪZUMU PAZĪMES.
	NELIETOJIET PALIKTNI, LAI PĀRNĒSĀTU KRAVAS/CILVĒKUS, KURU SVARS PĀRSNIEDZ MAKSIMĀLO PIEĻAUJAMO NESTSPĒJU (150 kg).
	NETĪRIET PALIKTNI AR KORODĒJOŠIEM LĪDZEKĻIEM. VAJAG TIKAI MITRU DRĀNU, MEDICĪNISKO SPIRTU VAI PARASTĀS ZIEPES.
	IZPILDIET LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS UZ PALIKTŅA UN 4. NODAĻĀ.
	PĀRLIECINIETIES, KA NOKĻŪŠANAS VIETA IR IDEĀLI PIEMĒROTA PALIKTŅA PAREIZAM UN STABILAM NOVĒTOJUMAM.
	JA IESPĒJAMS, AIZĀĶĒJIET PALIKTNI AIZ RATIŅKRĒSLA ROKAS BALSTA UN NOKĻŪŠANAS VIETAS BALSTA.
	JA PALIKTŅA UZLĪMES NORĀDĪJUMI IR TIK ĻOTI NODILUŠI, KA VAIRS NAV SALASĀMI, LŪDZIET RAŽOTĀJAM JAUNU KOPIJU.

4. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

BUFFALO 150 paliktnis ir atbalsts, kas paredzēts lietotāja pārvietošanai no ratiņkrēsla citā vietā, piemēram, gultā, dīvānā, automobilī utt.

Tam nav nekāda iepakojuma, tādējādi to iegādājas, lieto, uzglabā un pārnēsā tieši tādu, kāds tas ir.

Zemāk parādīti daži visbiežākā pielietojuma veidi un to veikšana, tas norādīts arī uz piederuma uzlīmes.

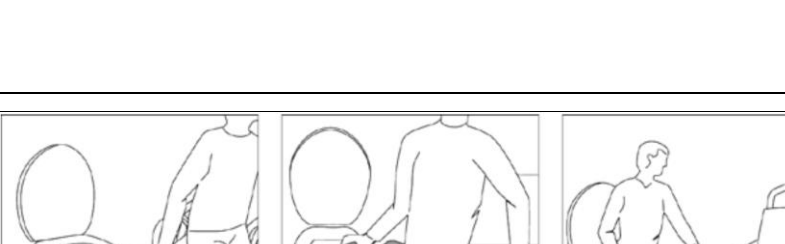	PĀRVIETOŠANĀS UZ AUTOMOBILI Nokļūstiet pēc iespējas tuvāk sēdvietai, nostipriniet paliktni pie ratiņkrēsla rokas balsta un pārliecinieties, ka paliktnis stingri balstās uz sēdvietas.
	PĀRVIETOŠANĀS UZ GULTU Nokļūstiet pēc iespējas tuvāk gultai, nostipriniet paliktni pie ratiņkrēsla rokas balsta un pārliecinieties, ka paliktnis stingri balstās uz matrača.
	PĀRVIETOŠANĀS UZ KRĒSLU/DĪVĀNU Nokļūstiet pēc iespējas tuvāk krēslam/dīvānam, nostipriniet paliktni pie ratiņkrēsla rokas balsta un krēsla/dīvāna rokas atzveltnes (ja iespējams), un pārliecinieties, ka paliktnis stingri balstās uz sēdvietas.
	PĀRVIETOŠANĀS UZ TUALETI Nokļūstiet pēc iespējas tuvāk tualetes podam, nostipriniet paliktni pie ratiņkrēsla rokas balsta un pārliecinieties, ka paliktnis stingri balstās uz poda sēdvietas.

VIENMĒR IZPILDIET NORĀDĪJUMUS 3. NODAĻĀ.



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PĀRVIETOŠANĀS PALIKTNIS - *BUFFALO 150*

Dok. kods:
AII03

25/02/2016 Red. 0
8. no 8 lpp.

5. UTILIZĀCIJA

Kad paliktni vairs nelietosiet, pareizi to utilizējiet, nepiesārņojot vidi.

Izpildiet piederuma lietošanas vietā piemērotos utilizācijas noteikumus (vērsieties pie vietējiem pilnvarotiem atkritumu savākšanas uzņēmumiem).

6. GARANTĪJA - PALĪDZĪBA

Turpmāk norādīti ražotāja **ALLMOBILITY TRADING S.r.l.** piemērotās garantijas vispārīgie noteikumi.

Garantija attiecas uz visiem ražošanas un materiālu defektiem, pienācīgi apstiprinātiem pēc Uzņēmuma ieskata.

Garantija neaptver bojājumus, kurus izraisīja:

- *Normāla nolietošana*
- *Tīri estētisku funkciju daļu kvalitātes pasliktināšanās*
- *Nepilnvarotu personu vai centru veiktais remonts vai pārveidošana*
- *Produkta lietošana neatbilstoši šīs instrukcijas brīdinājumiem*
- *Bojājumi, kurus izraisījusi produkta lietošanai nepiemērota vide, kā arī parādības, kas nav atkarīgas no tā normālas lietošanas.*

Garantija ir spēkā 1 (vienu) gadu pēc iegādes datuma.

Ja radušās problēmas vai vēlaties saņemt informāciju, vērsieties pie ražotāja pirmajā lappusē norādītajās adresēs.

7. BUFFALO GRIP 150 VERSIJA


BUFFALO GRIP 150 versijai (kods All03 pretslīdes uzliktnis) **apakšdaļā ir divas zonas ar spēcīgu saķeri.**

Tas stabilizē paliktņa gala virsmas, kad tās saskaras ar mīkstām daļām, piemēram, krēsla, atzveltnes krēsla, automobiļa sēdekļa polsterējumu vai audumu vai ratiņkrēsla spilvenu.

Tādējādi dažādi lietotāji var pārsēsties atbilstoši savām vēlmēm.

Materiāls ir "polsterējuma pretslīdes uzliktnis" H3408, kas sastāv no 51% poliuretāna un 49% poliestera ar adhezīvu akrila pamatni, 1 mm biezs.

Forma un izmēri (mm) parādīti attēlā.

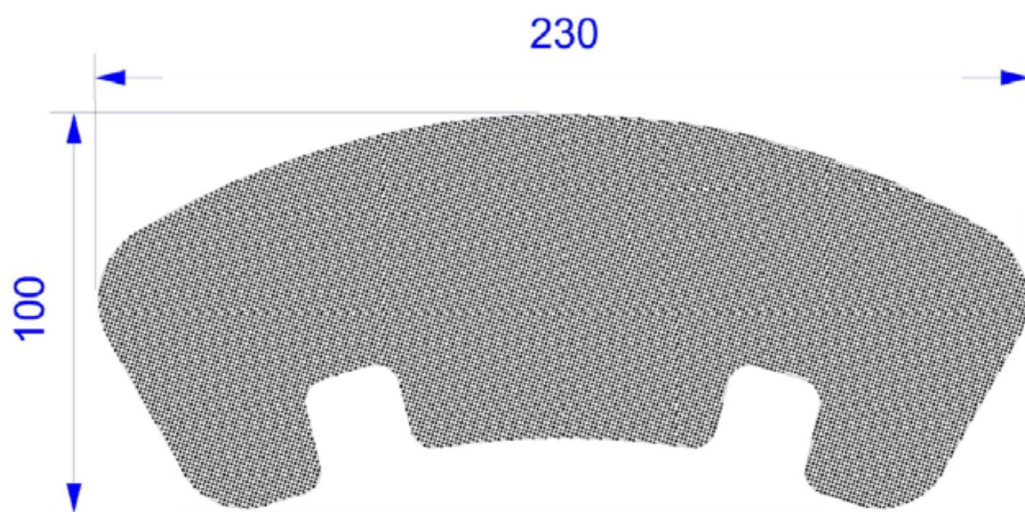

Veicot pārsēšanos, nelietojiet paliktņi ar pretslīdes uzliktni augšpusē (saskaras ar ķermeni).

