
B. Braun brūču aprūpe. Katalogs.

Right. From the start.



Brūču aprūpe

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

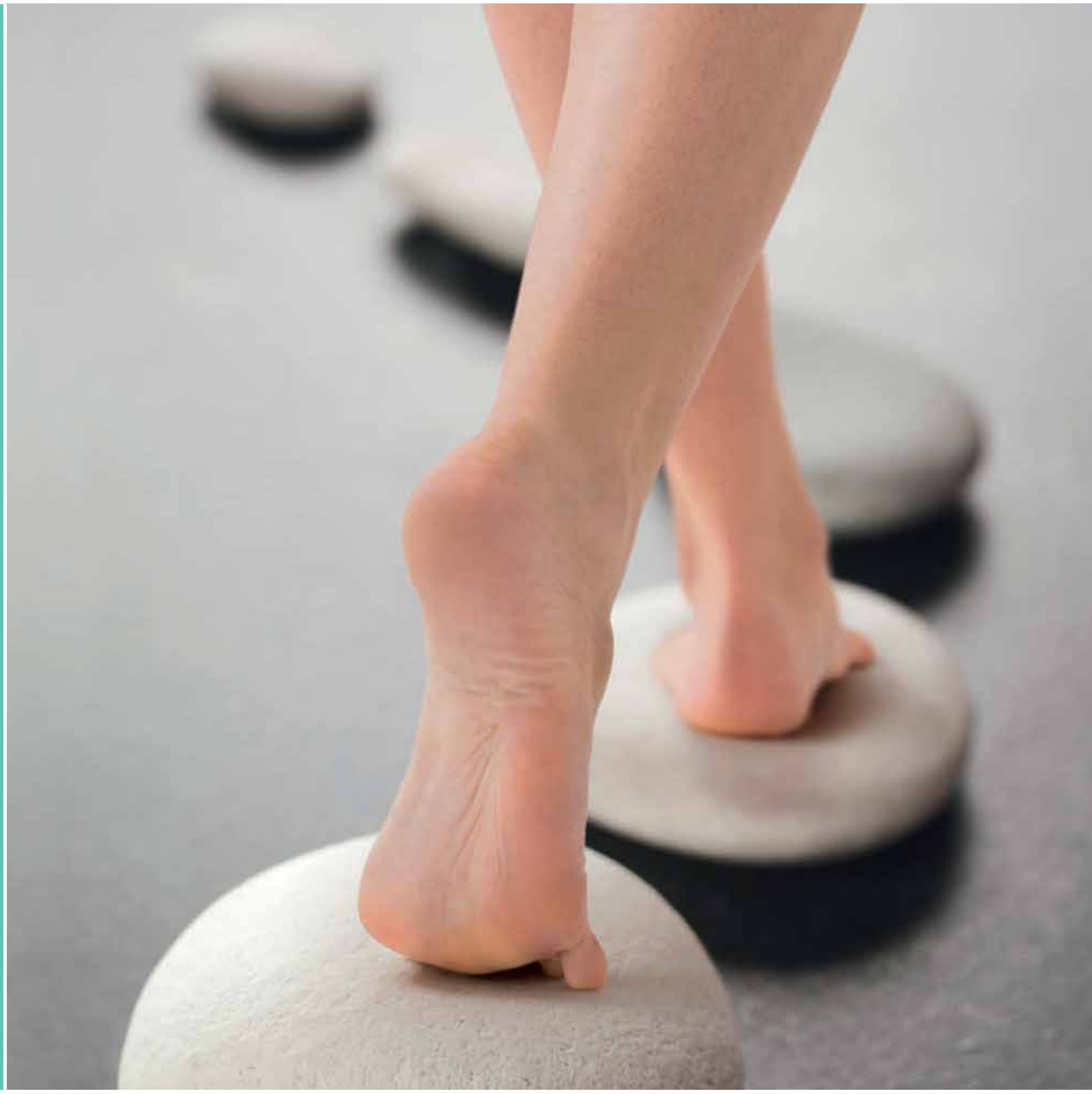

Right. From the start.

B. Braun brūču aprūpe.

Miljoniem cilvēku visā pasaulē cieš no hroniskām brūcēm. Šiem pacientiem ir jāsamierinās ar mēnešiem ilgām sāpēm un samazinātu dzīves kvalitāti. Tāpat viņiem ir nepieciešama ilgstoša aprūpe un ārstēšana. Pacienti ar hroniskām brūcēm un viņu ārstniecības un aprūpes speciālisti visvairāk par visu vēlētos ātru un paliekošu brūces sadzīšanu.

Veiksmīga ārstēšana atkarīga no brūces tīrības pakāpes, brūces pamatnes sagatavošanas, pārsēja izvēles, ārstniecības un aprūpes speciālista pieredzes, kā arī no pacienta stāvokļa.

Brūces pārklājums, baktēriju biofilma, strutas, nekrotiskie audi, detrīts, jo īpaši baktēriju biofilma kavē un nomāc brūces dzīšanu. Detrīta likvidēšana, ko dēvē arī par "detritolīzi", paātrina brūces dzīšanu.


B. Braun ir izstrādājis plašu brūču aprūpes līdzekļu klāstu, kas ļauj optimāli aprūpēt brūci, veicinot un paātrinot endogēno dzīšanu.

B. Braun brūču aprūpes līdzekļi ir paredzēti ikvienam brūču veidam katrā brūces dzīšanas fāzē. Tādi mūsdienīgi risinājumi kā *Prontosan*® brūču skalošanas šķīdums un brūču gels efektīvi likvidē baktēriju biofilmu un sagatavo brūci *Askina*® grupas brūču pārsēju lietošanai, kas veicina audu atjaunošanās procesu.

Šis brūču aprūpes preču katalogs palīdzēs jums atrast optimālu aprūpes plānu katram pacientam un brūces tipam, izvēloties aprūpi, kas ir **„Pareiza. Jau no paša sākuma".**

Brūču aprūpes rokasgrāmata	4
Brūces pamatnes sagatavošana	6
Prontosan® brūču skalošanas šķīdums	8
Prontosan® brūču gels | Brūču gels X	10
Braunol®	12
Prontosan® brūču aerosols	13
Nekrotiskas un fibrinozas brūces	14
Askina® *Gel*	16
Askina® *Sorb*	18
Askina® *Absorb+*	20
Fibrinozas un granulējošas brūces	22
Askina® foam | Foam Cavity | Cavity Strips	24
Askina® Heel	26
Askina® Foam Border | Sacrum | *Askina*® Trachea	28
Granulējošas un epitelizējošas brūces	30
Askina® *SilNet*	32
Askina® *DresSil* | Border | Sacrum	34
Askina® *Transorbent*®	36
Askina® *Transorbent*® Border | Sacrum	
Askina® *Touch*	37
Askina® *THINSite*	38
Askina® *Hydro*	39
Askina® *Biofilm*® *Transparent*	40
Askina® *Derm*	41
Inficētas brūces	42
Askina® *Calgitrol*® *Ag* | *Askina*® *Calgitrol*® *THIN*	44
Askina® *Calgitrol*® Paste	46
Askina® *Carbosorb*	48
Askina® *Pad I Pad S*	49
Askina® Barrier Film | Barrier Cream	50

Brūču aprūpes rokasgrāmata

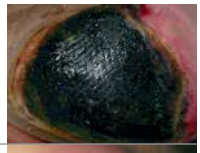Brūces stāvoklis / Brūces dzīšanas fāze		Izdalījumi	Ārstēšanas un aprūpes mērķis	Procedūra / rīcība
● Melna, nekrotiska brūce (neišēmiska) *		Maz	Sauso, nekrotisko audu noņemšana	Brūces mitrināšana ar hidrogelu Mehāniska vai ķirurģiska nekrotisko audu noņemšana
● Sausa, fibrinoza brūce		Maz	Fibrinozo audu noņemšana, Infekcijas profilakse	Ja nepieciešams, mehāniska vai ķirurģiska attīrīšana, brūces tīrīšana, brūces mitrināšana
● Mitra, fibrinoza brūce		Vidēji vai daudz	Fibrinozo audu noņemšana, Izdalījumu kontrole	Ja nepieciešam mehāniska vai ķirurģiska attīrīšana, brūces tīrīšana, mitras brūces vides nodrošināšana, lai uzlabotu autolītisku attīrīšanos
● ● Fibrinoza vai granulējoša brūce		Vidēji vai daudz	Fibrinozo audu noņemšana, Izdalījumu kontrole, Granulācijas veicināšana	Brūces tīrīšana, mitras brūces vides nodrošināšana, lai uzlabotu autolītisku attīrīšanos
● Granulējoša brūce		Vidēji	Izdalījumu kontrole, Granulācijas veicināšana	Brūces tīrīšana, mitras brūces vides nodrošināšana, jaunveidojušos audu un apkārtējās ādas aizsardzība
● Granulējoša vai epitelizējoša brūce		Maz	Atlikušo izdalījumu absorbēšana, Epitelizācijas veicināšana	Brūces tīrīšana, jaunizveidojušos audu un apkārtējās ādas aizsardzība
● Epitelizējoša brūce		Nav	Epitelizācijas veicināšana	Jaunveidojušos audu aizsardzība
● Inficēta brūce		Vidēji līdz daudz	Baktēriju daudzuma samazināšana, Izdalījumu kontrole, Smakas neitralizēšana	Brūces tīrīšana, nepieļaut brūces atkārtotu inficēšanos un novērst apkārtējo baktēriju nokļūšanu brūcē

* perifēro artēriju slimību gadījumā brūci nedrīkst mitrināt

● Riskam pakļauta āda		Nav	1. pakāpes izgulējumu (spiediena čūlu) profilakse	Ādas aprūpe ar tam paredzētiem ādas aprūpes līdzekļiem Novērst bīdes un berzes iedarbību
● Riskam pakļauta āda		Nav	Brūcei apkārt esošās ādas aizsardzība pret bojājumiem, Aizsardzība pret macerāciju	Aizsargāt veselo ādu ap brūci Aizsargāt bojāto ādu

Brūces tīrīšana un brūces pamatnes sagatavošana	Primārais brūces pārsējs		Sekundārais brūces pārsējs	Mainīšanas biežums
	Dziļa brūce	Virspusēja brūce		
	Askina® Gel Hidrogels	Askina® Gel Hidrogels	Askina® SilNet Askina® Derm	Līdz 3 dienām vai pēc nepieciešamības
	Askina® Gel Hidrogels	Askina® Gel Hidrogels	Askina® SilNet Askina® Derm	1 - 3 dienas vai pēc nepieciešamības
Prontosan® brūču skalošanas šķīdums	Askina® Sorb Rope Askina® Foam Cavity Askina® Cavity Strips	Askina® Sorb Askina® Absorb+ Askina® Foam	Askina® Pad Saite, pārsēja fiksators	Katru dienu vai pēc nepieciešamības
Prontosan® brūču gels Prontosan® brūču gels X	Askina® Sorb Rope Askina® Foam Cavity Askina® Cavity Strips	Askina® SilNet Askina® Absorb+ Askina® Foam	Askina® Pad Saite, pārsēja fiksators	1 - 3 dienas vai pēc nepieciešamības
	Askina® Foam Cavity Askina® Cavity Strips	Askina® SilNet Askina® DresSil Askina® Transorbent®	Saite, pārsēja fiksators	1 - 3 dienas vai pēc nepieciešamības
	Askina® Foam Cavity Askina® Cavity Strips	Askina® SilNet Askina® DresSil Askina® Hydro	Saite, pārsēja fiksators	3 - 5 dienas vai pēc nepieciešamības
N/P	N/P	Askina® Biofilm Transparent Askina® Derm	N/P	līdz 7 dienām vai pēc nepieciešamības
Brūces antiseptiska apstrāde ar atbilstošu līdzekli: Braunol®	Askina® Calgitrol® THIN Askina® Calgitrol® paste	Askina® Calgitrol® Ag Askina® Calgitrol® Paste	Askina® Carbosorb Askina® Pad Saite, pārsēja fiksators	Katru dienu vai pēc nepieciešamības

	Ādas aprūpe	Aprūpes biežums
Ūdens un mazgāšanas losjons	Atbilstošs ādas aprūpes līdzeklis	Divas līdz trīs reizes dienā Atbilstoši lietošanas instrukcijai
Ūdens un mazgāšanas losjons	Askina® Barrier Film Askina® Barrier Cream	Vienu reizi 2 - 3 dienās vai pēc nepieciešamības Vienu reizi 2-3 dienās vai pēc nepieciešamības

Tīrīšana. Ātra brūces dzīšana.

Brūces tīrīšana | Brūces pamatnes sagatavošana | Brūces antiseptiska apstrāde



	Hroniskas brūces	Akūtas brūces	1. pakāpes apdegumi	2. pakāpes apdegumi	3. pakāpes apdegumi	4. pakāpes apdegumi	Inficētas brūces		
Prontosan® brūču skalošanas šķīdums	●	●	●	●					) Sterils šķīdums) Novērš biofilmas veidošanos) Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus nekairinošas vielas) Saderīgs ar biežāk izmantojamiem brūču pārsējiem) Var lietot līdz 8 nedēļām pēc pirmās atvēršanas) Nesāpīga brūču aprūpe, pārsēju mitrināšana un maiņa
Prontosan® brūču gels	●	●	●	●					) Sterils hidrogels) Novērš biofilmas veidošanos) Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus nekairinošas vielas) Saderīgs ar biežāk izmantojamiem brūču pārsējiem) Var lietot līdz 8 nedēļām pēc pirmās atvēršanas) Nesāpīga brūču aprūpe
Prontosan® brūču gels X	●	●	●	●	●	●			) Sterils, viskozs hidrogels) Novērš biofilmas veidošanos) Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus nekairinošas vielas) Saderīgs ar biežāk izmantojamiem brūču pārsējiem) Var lietot līdz 8 nedēļām pēc pirmās atvēršanas) Nesāpīga brūču aprūpe
Braunol®	●	●	●	●	●	●	●		) Jodēta povidona ūdens šķīdums ādas un brūču antiseptiskai apstrādei) Ādas dezinfekcijai slimnīcas nodaļā vai operāciju zālē) Ātra iedarbība - 15 sekundēs) Var lietot neatšķaidītu vai atšķaidītu kopā ar biežāk izmantojamiem brūču pārsējiem
Virspusējas brūces un apdegumi									
Prontosan® brūču aerosols	●	●	●						) Nesterils šķīdums) Novērš biofilmas veidošanos) Kavē kontaminācijuar multirezistentiem mikroorganismiem) Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus nekairinošas vielas) Var lietot līdz 12 mēnešiem pēc pirmās atvēršanas) Nesāpīga brūču aprūpe, pārsēju mitrināšana un maiņa

Terminu ”Brūces pamatnes sagatavošana“ pirmo reizi aprakstīja Falanga (2000), un to var definēt kā vispārēju brūces aprūpes plānu, lai veicinātu endogēnu dzīšanu un uzlabotu mūsdienīgu brūču aprūpes līdzekļu efektivitāti. Galvenais uzdevums ir nodrošināt veselu granulācijas audu veidošanos, kas pilnībā aizver brūci.

Pareiza brūces pamatnes sagatavošana hronisku brūču gadījumā ietver šādus pasākumus:

) Baktēriju biomasas samazināšana brūces pamatnē

) Nekrotisko audu un kreveles noņemšana

) Izdalījumu mazināšana

) Šūnu disfunkcijas un izjauktā bioķīmiskā līdzsvara novēršana


Prontosan® brūču skalošanas šķīdums

Šķīdums akūtām, hroniskām un apdegumu brūcēm



- Likvidē un neļauj veidoties biofilmai
- Novērš infekcijas veidošanos
- Samazina dzīšanas laiku
- Nesāpīga brūču aprūpe, pārsēju mitrināšana un maiņa
- Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus nekairinošas vielas.
- Saderīgs ar biežāk izmantojamiem brūču pārsējiem
- Var lietot līdz 8 nedēļām pēc pirmās atvēršanas



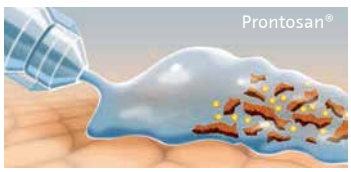

Prontosan® sastāvā ir betaīns un poliheksanīds.

Betaīns mazina biofilmas virsmas spriedzi, tādējādi biofilma mitrinās un kļūst caurlaidīga. Darbības mehānismu pamatā var salīdzināt ar trauku mazgājamās mašīnas mazgāšanas līdzekli.

Poliheksanīds ir pretmikrobu līdzeklis ar plašu biocīdās darbības spektru. Darbības mehānismu var raksturot kā nespecifisku elektrostatisku mijiedarbību ar baktērijas šūnas sieniņu.
Poliheksanīda savienošanās ar baktērijas šūnas sieniņu izraisa baktērijas bioloģiskās struktūras sabrukšanu.

PRONTOSAN®
LIETOŠANA NSBT

Negatīvā spiediena brūču terapijas / The negative presure wound therapy (NSBT/NPWT) skalošanas sistēma nodrošina efektīvāku šķīduma, piemēram, Prontosan® brūču skalošanas šķīduma, piegādi komplicētām brūcēm ar mērķi:

- **novērst infekciju un inficēšanos,**
- **mazināt dzīšanas laiku,**
- **mazināt amputācijas risku.**

UZMANĪBU! Nedrīkst lietot uz hialīna skrimšļiem un aseptiskās locītavu operācijās.








Indikācijas

Prontosan® brūču skalošanas šķīdumu var lietot infekciju profilaksei akūtām, jutīgām un hroniskām brūcēm, kā arī

- traumatiskām brūcēm,
- pēcoperācijas brūcēm,
- hroniskām kāju čūlām (piemēram, venozām, diabētiskās pēdas čūlām un izgulējumiem (spiediena čūlām)),
- 1. un 2. pakāpes apdegumiem.

Pirms lietošanas

- Lai atvērtu flakonu, noņemiet gredzenu un noskrūvējiet vāciņu pulksteņa rādītāja virzienā

Priekšrocības

- Gatavs lietošanai
- Ērta un vienkārša lietošana
- Lieto tieši no ērti saspiežama flakona
- Sastāvā hipoalergēnas un audus nekairinošas vielas
- Var sasildīt līdz ķermeņa temperatūrai
- Var lietot uz jutīgas un kairinātas ādas
- Nav turpmākas brūces piesārņošanas riska
- Var lietot kopā ar biežāk izmantojamiem standarta un mūsdienīgiem brūču pārsējiem
- 1000ml flakons īpaši piemērots brūču aprūpei ar vakuuma metodi



Prontosan®	Tilpums	Daudzums iepakojumā	Artikula numurs
Flakons	40 ml	6	400413
Flakons	350 ml	1	400415
Flakons	1000 ml	1	400446

Sastāvs: 0,1 % poliaminopropilbiguanīds (poliheksanīds)
Betaīna virsmaktīva viela

Prontosan® brūču gels | Prontosan® brūču gels X

Ādas brūču un apdegumu tīrīšanai un mitrināšanai. Biofilmas veidošanās novēršanai.



- Novērš biofilmas veidošanos
- Novērš infekciju un inficēšanos
- Samazina dzīšanas laiku
- Nesāpīga brūču aprūpe un pārsēju maiņa
- Sastāvā labi zināmas hipoalergēnas un audus nekairinošas vielas
- Var lietot kopā ar biežāk izmantojamiem standarta un mūsdienīgiem brūču pārsējiem
- Var lietot līdz 8 nedēļām pēc pirmās atvēršanas


Nekrotiskos audus un kreveles var labi noņemt ar Prontosan® brūču skalošanas šķīdumu, taču vispirms ir jānoņem lielās kreveles, ilgāku laiku nodrošinot brūces mitrināšanu. Šim nolūkam optimālais risinājums ir Prontosan® brūču gels un Prontosan® brūču gels X.


Kurš gels kad jālieto

Prontosan® brūču gels	Prontosan® brūču gels X
30 ml flakons	250 g tūba
Šķidrs	Viskozs
Mazākām, dziļām un šaurām brūcēm, kā arī grūti sasniedzamām brūcēm 1. un 2. pakāpes apdegumu brūcēm	Lielām brūcēm, piemēram, › ulcus cruris, › izgulējumi (spiediena čūlas) Visām apdegumu brūcēm, arī 3. un 4. pakāpes
Ja nepieciešams neliels daudzums	Ja nepieciešams liels daudzums Kad Prontosan® brūču gels ir pārāk šķidrs

NORĀDĪJUMI UN IETEIKUMI

Principā visas brūces vispirms ir jāizskalo un jāiztīra ar Prontosan® brūču skalošanas šķīdumu, Prontosan® gelu un Prontosan® gelu X atstājot brūcē līdz nākamai pārsiešanai. Tā rezultātā tiek nodrošināta ilgstoša iedarbība.

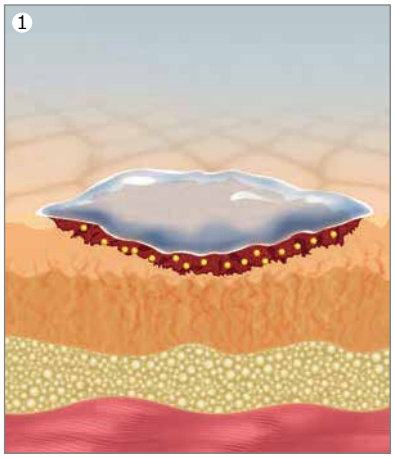

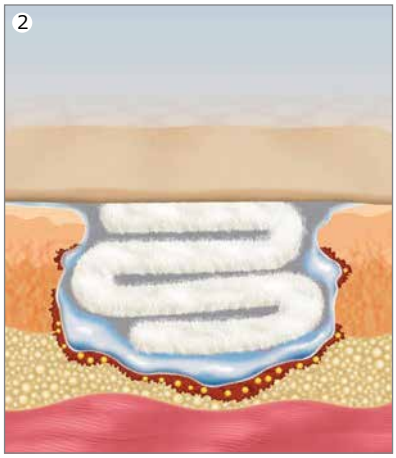

Indikācijas

Ādas brūču un apdegumu tīrīšana, un mitrināšana

- Traumatiskas brūces
- Pēcoperācijas brūces
- Hroniskas kāju čūlas (piemēram, venozas, diabētiskās pēdas čūlas un izgulējumi (spiediena čūlas)
- Termiskas brūces
- Ķīmiski apdegumi (skābju un sārmu radīti)
- Starojuma izraisītas brūces
- Brūču pārsēju mitrināšana

Lietošana

Izvēle starp Prontosan® brūču gelu un Prontosan® brūču gelu X nodrošina optimālu uzklāšanu uz lielām virsmām, kā arī dziļās brūcēs.

Uz plašām brūcēm uzklāj 3 – 4 mm biezu Prontosan® brūču gela X kārtu, ko nosedz ar sekundāro pārsēju.

Dziļās vai tuneļveida brūcēs, brūces dobumos un grūti aizsniedzamās vietās uzklāj 3 – 5 mm biezu Prontosan® brūču gela kārtu un nosedz ar sekundāro pārsēju.

Prontosan® brūču gels







	Tilpums	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Prontosan® brūču gels	30 ml	1	400515
Prontosan® brūču gels X	250 g	1	400508

Sastāvs: 0,1 % poliaminopropilbiguanīds (poliheksanīds), betaīna virsmaktīvā viela, attīrīts ūdens, glicerīns, hidroksietilceluloze

Braunol®

Antiseptisks un dezinfekcijas līdzeklis ādas, gļotādu un brūču aprūpei



RAKSTUROJUMS

- **Brūnā krāsa parāda jau dezinficētos rajonus**
- **Ļoti plašs iedarbības spektrs, var lietot atbilstoši atšķaidītu**
- **Ātra iedarbība 15 sekunžu laikā un ilgstoša darbība**
- **Jodēta povidona šķīdums drošai lietošanai un iedarbībai ar derīguma termiņu 3 gadi (iepakojumi < 500 ml) vai 5 gadi (iepakojumi > 500 ml)**

Starp antiseptiskiem un pretmikrobu līdzekļiem jodētam povidonam joprojām ir sava svarīga vieta ikdienas medicīnā, arī veterinārajā. Jodētam povidonam piemīt plašākais pretmikrobu darbības spektrs, tas ir klīniski ļoti efektīvs un vienlaikus ļoti maztoksisks klīniskajā praksē.
Jaunākajiem joda preparātiem ir augsta klīniskā efektivitāte, bet nav sarežģījumu ar toksicitāti. Pētījumi apliecina, ka jodēta povidona preparāti ir teicami antiseptiski līdzekļi, vērtējot pretmikrobu iedarbību pret MRSA, sēnītēm un vīrusiem, un tas ir labākais antiseptiskais līdzeklis sporu likvidēšanai.

- Antiseptiska gļotādu apstrāde
- Antiseptiska apdeguma brūču tīrīšana
- Antiseptiska brūču apstrāde, ja skarti skrimšļi

Indikācijas

Antiseptiska inficētu ādas brūču apstrāde, piemēram,

- Traumatiskas brūces
- Pēcoperācijas brūces
- Hroniskas ādas čūlas (piemēram, venozas, diabētiskās pēdas čūlas vai izgulējumi (spiediena čūlas)

Braunol®	Tilpums	Skaits iepakojumā
Flakons	100 ml	1
Flakons	1000 ml	1

Sastāvdaļas: 7,5 g jodēta povidona (0,75 g pieejama joda – aktīvās sastāvdaļas) uz 100 g;
nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija jodāts,
makrogola laurilēteris 9 EO (Ph. Eur.), nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens



Prontosan® Brūču aerosols

Virspusēju brūču un apdegumu tīrīšana un mitrināšana un aprūpei



LIETOŠANAS IETEIKUMI

Pirms Prontosan® brūču aerosola lietošanas rūpīgi noskalojiet ziepju, ziežu, eļļu vai citu brūces aprūpes līdzekļu atliekas.

Prontosan® Brūču aerosols veicina ātru brūces sadzīšanu, efektīvi tīrot un mitrinot virspusējas brūces un apdegumus.

Lietošana
Rūpīgi izsmidziniet Prontosan® brūču aerosolu uz visas brūces un ap to. Tā tiek mazināts inficēšanās risks un nodrošināti optimāli dzīšanas apstākļi. Nosedziet brūci ar pārsēju.
Pārsējus ar recekļiem vai krevelēm var mitrināt ar Prontosan® brūču aerosolu, lai tos varētu vieglāk noņemt un šis process būtu nesāpīgs.

Priekšrocības

- Novērš infekciju un brūces inficēšanos
- Veicina brūces dzīšanu
- Kavē rētas veidošanos
- Kavē kontamināciju ar multirezistentiem mikroorganismiem
- Novērš biofilmas veidošanos
- Mazina sāpes
- Nesāpīga brūču aprūpe, pārsēju mitrināšana un maiņa

Indikācijas

Tīrīšanai, skalošanai un mitrināšanai:

- virspusējas akūtas un hroniskas brūces (piemēram, ādas bojājumi, kodumi, plēstas brūces, nobrāzumi, sasitumi, izgulējumi (spiediena čūlas), ulcus cruris, diabētiskās pēdas čūlas),
- virspusēji apdegumi.
  Atvieglo sakaltušu pārsēju noņemšanu.

Prontosan® brūču aerosols	Tilpums	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Flakons ar izsmidzinātāju	75 ml	20	400565

Sastāvs: attīrīts ūdens, betaīna virsmaktīva viela, 0,1 % poliaminopropilbiguanīds (poliheksanīds)



Nekrotisku audu un kreveļu noņemšana. Viegli, efektīvi, nesāpīgi.
Nekrotiskas un fibrinozas brūces





	Sausas, nekrotiskas brūces	Vidēji eksudējošas nekrotiskas brūces	Nekrotiskas brūces ar krevelēm	
				💧 vāji eksudējošas brūces 💧💧 vidēji eksudējošas brūces 💧💧💧 spēcīgi eksudējošas brūces
Askina® Gel	●	●		 💧 › Īpašs aplikators dziļāku brūču un dobumu sasniegšanai › Izcili mitrinošas īpašības › Bezkrāsains – precīzai brūces apstrādei › Ļoti laba stabilitāte – paliek uzklāšanas vietā
Askina® Sorb		●	●	💧💧 › Optimāla pielāgošanās spēja brūcei, uzsūkšanas spēja un gela veidošana › Vertikāla absorbcija › Neizraisa brūces malu macerāciju › Noņemams vienā gabalā › Netraumējoša, nesāpīga pārsēja noņemšana
Askina® Absorb+		●	●	 💧💧 › Labas, ilgstošas uzsūkšanas spējas › Laba noturība (nav “sūkļa efekta”) › Izmantojams kompresijas terapijā › Neizraisa brūces malu macerāciju › Mīksts un elastīgs, arī tad, kad ir uzsūcis brūces izdalījumus

Askina® Gel

Hidrogels (ūdens gels) autolītiskai nekrotisko audu atdalīšanai




- Viegli uzklājams izmantojot vienas rokas tehniku
- Gela struktūra nodrošina ciešu kontaktu ar brūces virsmu, tas nenopil un paliek uzklāšanas vietā
- Īpaši veidots iepakojuma aplikators ļauj gelu ievadīt dziļākos brūces, dobumos, fistulās ...
- Izcila hidrācija: 40% sastāvā esošā ūdens pāriet brūcē
- Bezkrāsains – precīzai brūces aprūpei

Askina® Gel ir bezkrāsains, viskozs, sterils hidrogels. Atkarībā no brūces stāvokļa, Askina® Gel mitrina sausus, nekrotiskus audus, veicinot nekrotisku audu atdalīšanu sausās brūcēs vai absorbē brūces kreveli un izdalījumus, ja to ir maz. Askina® gels nodrošina mitru brūces vidi, kas sekmē dabisku dzīšanu.

Izcila Askina® gela stabilitāte

18 h laikā *Askina®* gels nepārvietojas, ja slīpums ir 90°.

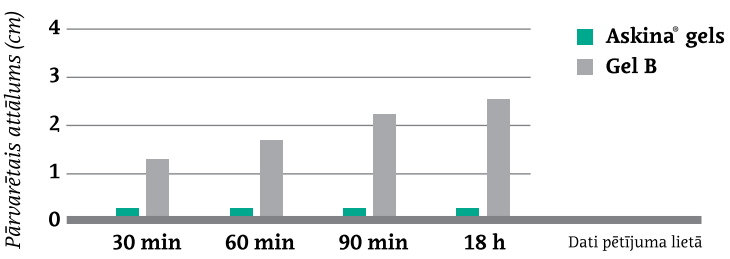

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- **Askina® Gel ir jāuzklāj vismaz 5 mm biezā kārtā**
- **Lietojiet caurspīdīgu poliuretāna plēvi - Askina® Derm -, kā pārsēju, lai nosegtu Askina® Gel**
- **Askina® Gel var atstāt brūcē uz 3 dienām**









① Amputācijas brūce: ir fibrīna un nekrotiski audi. Mehāniska audu atdalīšana ar skalpeli ir ļoti sāpīga, kaut arī tiek lietoti iedarbīgi pretsāpju līdzekļi.

② Askina® Gel uzklāj biezā slānī. Uzklāšana ir viegla un nesāpīga.

③ Tad gelu nosedz ar caurspīdīgu poliuretāna plēvi - Askina® Derm.

④ Pēc vienas nedēļas ārstēšanas, kad Askina® Gel uzklāts 3 reizes, melnos nekrotiskos audus var noņemt un fibrīnu viegli atdalīt. Sāk parādīties granulācijas audi.

Attēlos redzamo ārstēšanu veica Dr. Lazareth no St. Joseph slimnīcas Asinsvadu slimību nodaļas Parīzē, Francijā

Indikācijas

Vāji eksudējošas, kreveļainas vai sausas, nekrotiskas brūces

- Venozas un arteriālas kāju čūlas
- Izgulējumi (spiediena čūlas)
- Diabētiskās pēdas čūlas
- Traumatiskas brūces

Kā darbojas hidrogels?



Hidrogeliem piemīt īpaša spēja pielāgoties videi, un tie var vai nu mitrināt brūci, vai absorbēt izdalījumus. Tie veicina nekrotisko un fibrinozo audu un cita nedzīva materiāla atdalīšanu.

Askina® gels	Iepakojums	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
	15 g	5	001419 S
	15 g	10	001419 N

Sastāvs: attīrīts ūdens, glicerīns, gela veidošanas viela, akrilpolimērs



Askina® Sorb

Augstas absorbcijas alginmāta pārsējs



Ērti un viegli lietojams

Laba uzsūkšanas spēja

Veido mīkstu gelu, ko viegli noņemt kā mīkstu, viengabalainu masu, bez atlikumiem


Vertikāls uzsūkšanas process:
nav sānu noplūdes,
nenotiek brūces malu macerācija,

Netraumējoša pārsēja noņemšana.

Askina® Sorb ir sterils primārais brūces pārsējs no šķiedras, kas satur 85% kalcija alginmāta un 15% karboksimetilcelulozes (KMC).
Saskaroties ar brūces izdalījumiem, alginmāta-KMC šķiedras ātri veido gela formu, apmainoties joniem – kalcija joniem pārsējā un nātrija joniem izdalījumos, un veidojas mīksts mitrs gels, kas veicina dabisku dzīšanu.

Laba, ātra uzsūkšana

Askina® Sorb un populārāko KMC pārsēju uzsūkšanas spējas salīdzinājums*

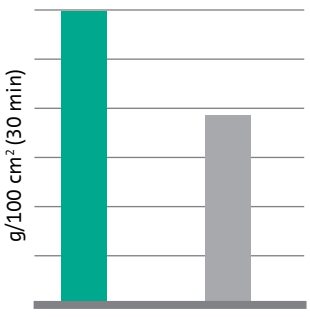

* Ķirurģisko materiālu testēšanas laboratorija. Ziņojums #97/825/1, 1997. gada janvāris


LIETOŠANAS IETEIKUMI

- **Nosegt ar sekundāro pārsēju, piemēram, Askina® Pad, vai ar Askina® Foam, ja brūcē ir daudz izdalījumu**
- **Nostiprināt ar pārsēja fiksatoru vai saiti**







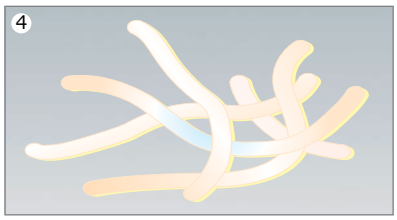

Indikācijas
Brūces ar vidēji daudz vai daudz izdalījiumiem, piemēram,

- izgulējumi (spiediena čulas),
- venozas un arteriālas kāju čūlas,
- diabētiskās pēdas čūlas,
- donora vietas,
- traumatiskas brūces,
- nobrāzumi,
- 2. pakāpes apdegumi,
- pēcoperācijas brūces.

① - ② **Askina® Sorb Flat Rope lietošanas piemēri**
Dziļas brūces, daudz izdalījumu. Pārsēju ievieto tieši dobumā.
Brūci nedrīkst piepildīt pārāk cieši.

③ Pārsēju noņem vienā gabalā, neko neatstājot brūcē.

④ Alginmāta/KMC šķiedru struktūra.



Askina® Sorb	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Pārsējs	6 cm x 6 cm	3	2109S
	6 cm x 6 cm	10	2115S
	6 cm x 6 cm	15	2100S
	10 cm x 10 cm	3	2107S
	10 cm x 10 cm	10	2116S
	10 cm x 10 cm	15	2102S
	15 cm x 15 cm	3	2108S
	15 cm x 15 cm	10	2102S
Flat Rope	2,7 cm x 34 cm	3	2106S
	2,7 cm x 34 cm	10	2105S

Askina® Absorb+


Izcili absorbējošs, nelīpošs brūču pārsējs



- Laba, ilgstoša uzsūkšanas spēja
- Labi aiztur izdalījumus (nav „sūkļa efekta”):
  - var lietot kompresijas terapijā,
  - neizraisa brūces malu macerāciju.
- Pakāpeniska uzsūkšana bez “Gel Lock”
- Paliek mīksts un elastīgs, pat kad ir uzsūcis lielu izdalījumu daudzumu
- Nepielīp brūces kontaktvirsmai
- Nav “sausinošs” kā īpaši absorbējošs materiāls

Askina® Absorb+ ir īpaši uzsūcošs pārsējs, kas var uzsūkt lielu daudzumu brūces izdalījumu un baktēriju.
Tas sastāv no iekšējā polsterējuma no stingrām, ūdeni aizturošām polimēra šķiedrām, kas ievietotas neaustā ārējā pārsēja materiālā.
Saskaroties ar brūces izdalījumiem, šķidrums tiek pārvērsts un noturēts kā mīksts un elastīgs gels, kas palīdz iztīrīt brūci un nodrošināt mitru brūces vidi.

Uzsūkšanas spēja m/m, g

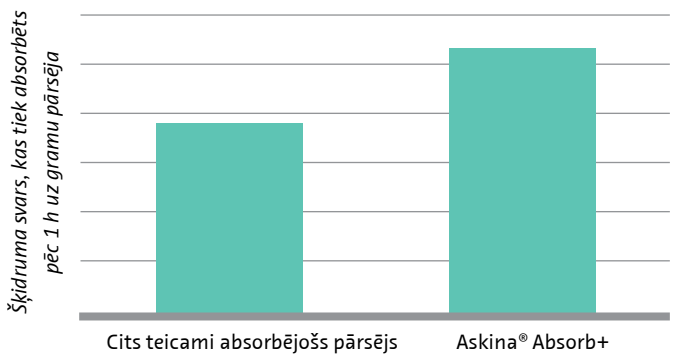



[B. Braun dati pētījuma lietā]

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- **Askina® Absorb+ var lietot kā primāro pārsēju vai likt uz citiem pārsējiem, kad nepieciešama ļoti liela uzsūkšanas spēja**
- **Ja nepieciešams, var nedaudz pamīšus uzklāt vairākus pārsējus, lai pārklātu ļoti lielus brūces laukumus**
- **Dziļas brūces gadījumā nepiepildiet brūci pārāk blīvi, jo pārsējs nedaudz uzbriest, kad uzsūc izdalījumus**



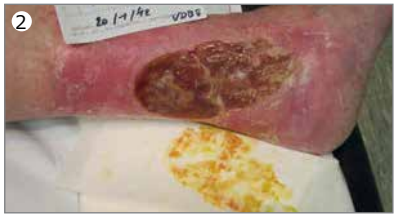

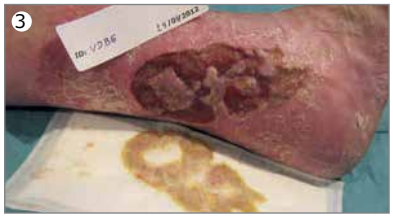



Indikācijas

Brūces ar vidēji vai daudz izdalījumiem, piemēram:

- izgulējumi (spiediena čūlas),
- venozas un arteriālas kāju čūlas,
- diabētiskās pēdas čūlas,
- pirmās un otrās pakāpes apdegumi,
- traumatiskas brūces,
- onkoloģiskas brūces

Klīniskā lietošana: venoza kājas čūla

① Daudz izdalījumu brūcē, apkārtējo audu tūska un apsārtums

② Askina® Absorb+ lietots kompresijas terapijā: tas efektīvi uzsūc un izvada lielu izdalījumu un atmirušo audu daudzumu


③ Vertikāla uzsūkšana, neizraisa brūces malu macerāciju

④ Pēc 12 dienām brūces virsma un apkārtējā tūska būtiski mazinās, veidojas epitelializācijas audi.

Kā tas darbojas

Iekšējais šķiedru polsterējums sastāv no trīs sastāvdaļām, kas izžāvētas kā viens materiāls,

1. Celulozes šķiedra dispersijai un izdalījumu novadīšanai uz sāniem
2. Izcili absorbējoša šķiedra ar lielu uzsūkšanas spēju
3. Divu komponentu šķiedra saistīšanai un stiprībai

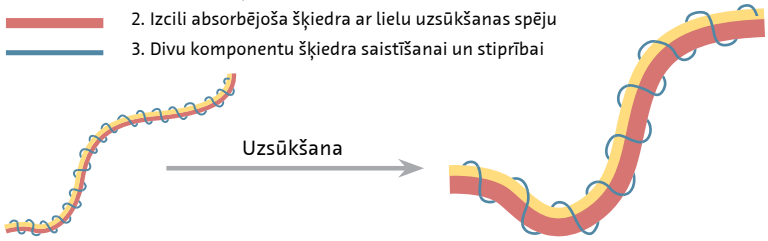

Uzsūkšana notiek pakāpeniski un vienmērīgi, ļaujot uzsūkt un noturēt lielu izdalījumu daudzumu.
Nav "Gel Lock" efekta: sastāvā nav pulvera, tāpēc ap daļiņām neveidojas gels, kas kavētu turpmāku absorbciju un radītu sausu vidi daļiņu iekšpusē.

Askina® Absorb+



Cits teicami absorbējošs pārsējs



Piesūcināts pārsējs

- Zems
- Mīksts un elastīgs
- Augsts
- Ciets, nav elastīgs



Askina® Sorb+	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
	10 x 10 cm	10	3331010
	10 x 20 cm	10	3331210
	20 x 20 cm	5	3332005

Efektīva izdalījumu kontrole.
Fibrinozas un granulējošas brūces



Virspusējas brūces	Izgulējumi (spiediena čūlas)	Arteriālas un venozas kāju čūlas	Diabētiskās pēdas čūlas	Ķirurģiskas brūces	Traumatiskas brūces	2. pakāpes apdegumi	Traheostomijas | Drenāžas vietas	maz eksudējošas brūces vidēji eksudējošas brūces spēcīgi eksudējošas brūces
Askina® Foam	●	●	●	●	●	●		) Izcila brūces izdalījumu uzsūkšanas spēja) Ekonomiski efektīvs: pārsējs nav bieži jāmaina) Mīksts un ērts) Noslēgtas malas: mazs nospiedumu atstāšanas risks) Nepielīp brūcei) Netraumējoša, nesāpīga pārsiešana) Vizuāla brūces izdalījumu uzsūkšanas kontrole
Askina® Heel papēžiem	●		●	●	●	●		) Gatavs lietošanai, nav nepieciešama fiksācijas ierīce) Inovatīvs anatomisks pārsējs, kas pārklāj potīti) Spiedienu mazinošas putas: palīdz novērst 1. pakāpes izgulējumus (spiediena čūlas)) Teicama aizsardzība pret bīdi un berzi
Askina® Foam Border	●	●	●	●	●	●		) Viegli uzklājams, nav nepieciešama fiksācija) Īpaši pielāgots grūti sasniedzamiem pārsiešanas rajoniem) Stingra fiksācija pateicoties līpošai malai) Gaisa un ūdens tvaikus caurlaidīgs ārējais slānis) Teicama aizsardzība pret bīdi un berzi
Askina® Foam Sacrum krustu rajonam	●			●	●	●		) Forma pielāgota krustu rajonam) Piemērots ādas aizsardzībai pacientiem ar inkontinenci
Askina® Trachea							●	) Īpaši veidota atvere precīzi aptver traheostomas un drenāžas vietas) Var izmantot visu veidu caurulēm un stomām
Dobas un tuneļveida brūces								
Askina® Foam Cavity dobām brūcēm	●			●	●			) Piemērots dažādu dobu brūču aprūpei) Izcila izdalījumu uzsūkšanas spēja) Netraumējoša pārsēja maiņa
Askina® Cavity Strips lentas dobām brūcēm	●		●	●	●			) Ērti ievietojamas brūcē) Piemērotas lietošanai mazos dobumos un tuneļveida brūcēs

Askina® Foam | Askina® Foam Cavity | Askina® Cavity Strips

Hidrofili putu pārsēji




- Izcilas brūces izdalījumus kontrolējošas īpašības
- Ekonomiski efektīvs: pārsējs nav bieži jāmaina
- Nodrošina mitru vidi brūcē
- Nepielīp brūcei; netraumējoša pārsēja maiņa
- Vizuāla brūces izdalījumu uzsūkšanas kontrole
- Neatstāj nospieduma pēdas, izmantojot zem kompresijas terapijas līdzekļiem
- Askina® Foam Cavity dobām brūcēm ir ļoti izturīgs: viegli un vienmērīgi noņemams, neatstāj daļiņas

Askina® Foam

ir divslāņu nepielīpošs putu pārsējs, kas sastāv no

- mīksta, hidrofila poliuretāna putu slāņa, kas ir gaisu caurlaidīgs un ar izcilu šķidruma uzsūkšanas spēju (199 g / 100 cm2);
- plānas, caurspīdīgas poliuretāna aizsargplēvītes, kas ir ūdens necaurlaidīga un baktēriju rezistenta

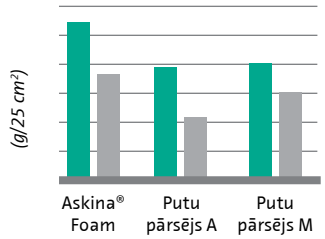

■ Uzsūkšana (1 h) ■ Aizturēšana (24 h)

Askina® Foam uzsūkšanas spēja ir viena no lielākajām starp tirgū esošajiem izstrādājumiem.

Izcilā spēja aizturēt šķidrumu padara to par ideālu līdzekli lietošanai zem kompresijas pārsējiem.

Dati pētījuma lietā

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- **Askina® Foam var nofiksēt ar pārsēja fiksatoru vai saiti, vai ar kompresijas saiti**
- **Askina® Foam var lietot arī kā sekundāro pārsēju spēcīgi eksudējošām brūcēm kombinācijā ar Askina® Sorb, vai kā sekundāro pārsēju dziļām brūcēm, kas piepildītas ar Askina® Sorb Rope vai Askina® Foam Cavity**









① Askina® Foam, lietota spēcīgi eksudējošai, līdzenai brūcei: vizuāla brūces eksudāta uzsūkšanas kontrole.

② Tiek uzsūkts liels eksudāta daudzums: vertikāla absorbcija bez brūces malu macerācijas.

③ ④ Kombinēta Askina® Foam Cavity, ko izmanto dziļu, spēcīgi eksudējošu brūču aizpildīšanai, un Askina® Foam, ko izmanto kā papildu absorbējošu pārsēju, lietošana.

Indikācijas Askina® Foam lietošanai

Mēreni vai spēcīgi eksudējošas brūces:

- 1. - 4. pakāpes izgulējumi
- Venozas un arteriālas kāju čūlas
- Diabētiskās pēdas čūlas
- 1. un 2. pakāpes apdegumi
- Traumatiskas brūces

Indikācijas Askina® Foam Cavity lietošanai

- Dziļām, dobām un spēcīgi eksudējošām brūcēm


Indikācijas Askina® Cavity Strips lietošanai

- Nelielas dobas, mēreni vai spēcīgi eksudējošas brūces
- Tuneļveida brūces

Askina® Foam Cavity un Askina® Cavity Strips

izgatavotas no tāda paša putu materiāla kā Askina® Foam, bet bez poliuretāna aizsargplēvītes. To specifiskā forma, lielā uzsūkšanas spēja un rezistence padara tos par ideālu pārsēju dziļām, spēcīgi eksudējošām brūcēm, kā arī tuneļveida un maziem brūču dobumiem (Askina® Cavity Strips).

Inovatīvs pārsēja dizains

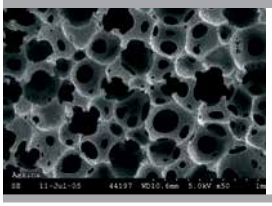

Īpašā Askina® Foam vaļēju šūnu struktūra nodrošina ātru un vertikālu eksudāta uzsūkšanu bez riska, ka jaunveidotie granulācijas audi ieaugs





	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Askina® Foam	5 cm x 7 cm	10	7240710
	10 cm x 10 cm	10	7241010
	10 cm x 20 cm	10	7241210
	20 cm x 20 cm	5	7242005
Askina® Foam Cavity	2,5 cm x 40 cm	10	7244010
Askina® Cavity Strips	2,5 cm x 40 cm	10	7246010

Askina® Heel papēžiem

Anatomiski veidots hidrocelulārs papēža pārsējs



Koncepcija “gatavs lietošanai”, nav nepieciešama fiksācijas ierīce

Anatomiska forma, kas pārsedz potīti

Spiedienu mazinošs putu materiāls, palīdz novērst 1. pakāpes izgulējumus (spiediena čūlas)


Teicama aizsardzība pret bīdi un berzi

Askina® Heel ir anatomiski veidots, divu slāņu, nelīpošs putu pārsējs, kas sastāv no papēža kapes ar stiprinājuma putu materiāla lentu un divām pašlīpošām stiprinājuma lentēm, kas notur pārsēju vietā pat kustību laikā. Askina® Heel pārsējs pieejams arī kā Askina® Heel XL, kura virsmas laukums ir par 33% lielāks.

Askina® Heel nodrošina mitru vidi brūcē, kas veicina dabisku dzīšanu

Izcila Askina® Heel uzsūkšanas spēja
Askina® Heel un divu citu ražotāju pārsēju uzsūkšanas spēja tika vērtēta nosakot šķidruma daudzumu, ko uzsūca 5 x 5 cm pārsēja paraugs.

Dati pētījuma lietā

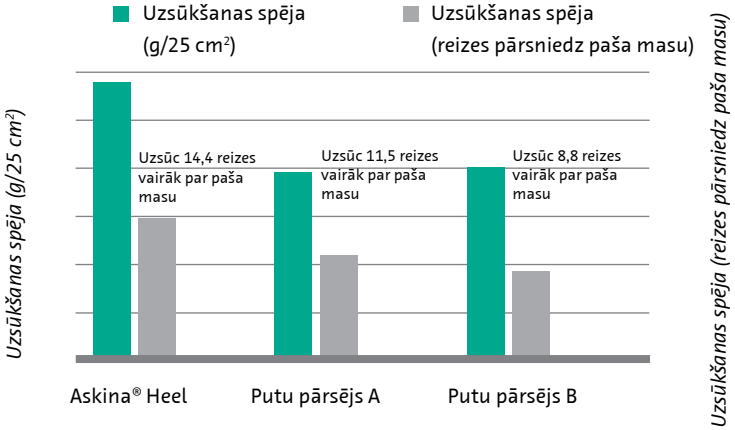

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- **Pašlīpošās stiprinājuma lentes var atvērt un aizvērt atkārtoti, lai nodrošinātu, ka pārsējs ir nostiprināts droši un ērti**
- **Brūci var ērti apskatīt, neradot neērtības pacientam**









Indikācijas

Mēreni vai spēcīgi eksudējošu, daļēja vai pilna dziļuma papēža brūču aprūpe

- 1. - 4. pakāpes izgulējumi (spiediena čūlas)
- Diabētiskās pēdas čūlas
- Ķirurģiska ārstēšana
- 1. un 2. pakāpes apdegumi

Kā uzlikt Askina® Heel

① Uzlieciet pašlīpošās stiprinājuma lentas katrā Askina® Heel pusē


② Rūpīgi uzlieciet pārsēju uz papēža un nostipriniet to ar stiprinājuma lentu

③ Novietojiet Askina® Heel pareizi: potīte ir pārklāta


④ Pārsēju var nofiksēt arī ar kompresijas zeķi

Spiedienu mazinošas putas: novērš izgulējumus (spiediena čūlas)


Spiediena sadalījuma karte rāda, ka Askina® Heel nozīmīgi mazina spiedienu uz papēža rajonu, mazinot maksimālo spiedienu un izkliedējot spiedienu vienmērīgāk.
Šī karte iegūta, nosakot spiedienu vairākos punktos uz papēdim līdzīgas virsmas
(PSI = spiediena intensitāte).

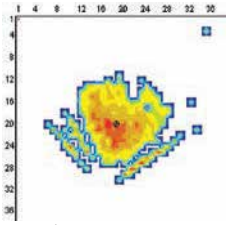


Pārsējs A
Vidējais spiediens = 1,3 psi
Maksimālais spiediens = 1,8 psi

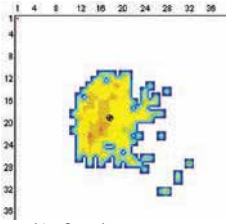

Askina® Heel
Vidējais spiediens = 1,3 psi
Maksimālais spiediens = 1,6psi

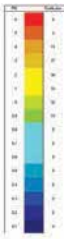

Dati pētījuma lietā

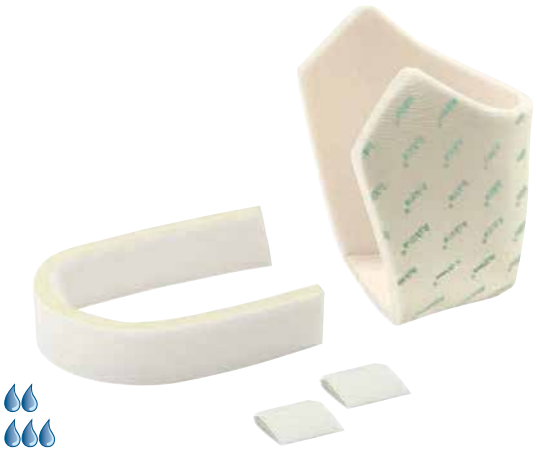

	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Askina® Heel	virsma = 225 cm²	3	7240103
	virsma = 225 cm²	5	7240105
Askina® Heel XL	virsma = 305 cm²	10	7240210

Askina® Foam Border I Askina® Foam Sacrum I Askina® Trachea

Hidrofili putu pārsēji



- Īpaši piemērots grūti pārsienamiem rajoniem
- Izcila uzsūkšanas un izdalījumu aiztures spēja
- Netraumējošs līmvielas sastāvs: viegla uzklāšana, netraumējoša noņemšana
- Ērts ārējais slānis, izcila gaisa un ūdens tvaiku caurlaidība
- Vizuāla izdalījumu uzsūkšanas kontrole
- Laba aizsardzība pret bīdi un berzi

Askina® Foam Border un **Askina® Foam Sacrum** ir hidrofili putu pārsēji, izgatavoti no poliuretāna putām, kas saskaras ar brūces virsmu. Izcila uzsūkšanas spēja un tvaiku caurlaidība. Pret ūdeni un baktērijām rezistents poliuretāna plēvītes ārējais slānis, kas atrodas pa putu perimetru, veidojot līpošu malu.

Askina® Foam Border ir kvadrātveida, divu slāņu putu pārsējs, kas īpaši piemērots grūti pārsienamiem rajoniem.

Askina® Foam Sacrum ir trīsstūra forma, kas piemērota krustu rajonam. Tas piemērots arī ādas bojājumu profilaksei inkontinences vai izgulējumu (spiediena čūlu) gadījumā.

LIETOŠANAS IETEIKUMI

Askina® Foam Border

- **Viegli lietojams, nav nepieciešama papildu nostiprināšana**
- **Ideāls grūti pārsienamiem rajoniem, piemēram, elkoņiem, ceļgaliem, potītēm**

Askina® Foam Sacrum

- **Var lietot arī izgulējumu (spiediena čūlu) profilaksei un ādas aizsardzībai pacientiem ar inkontinenci**









Askina® Foam Border lietošanas indikācijas

Mēreni eksudējošas brūces

- 1. - 4. pakāpes izgulējumi,
- venozas un arteriālas kāju čūlas,
- diabētiskās pēdas čūlas,
- 1. un 2. pakāpes apdegumi,
- traumatiskas brūces.

Askina® Foam Sacrum lietošanas indikācijas

- Mēreni eksudējošas brūces krustu rajonā







Lietošanas piemēri

① ② Askina® Foam Border, lietota grūti pārsienamā rajonā: traumatiska brūce uz elkoņa

③ Askina® Foam Border lietošana uz mēreni eksudējošas brūces apakšdelmā

④ Askina® Foam Sacrum, lietotas uz izgulējuma (spiediena čūlas) krustu rajonā



Askina® Trachea

Askina® Trachea ir hidrofils putu pārsējs ar apaļu atveri, kas veidota, lai precīzi aptvertu traheostomas caurulīti, drenu vai stomu.

Askina® Foam	Izmērs: viss pārsējs I putu daļa	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Border	16 cm x 16 cm | 10 cm x 10 cm	10	7231610
	16 cm x 26 cm | 10 cm x 20 cm	10	7236610
	26 cm x 26 cm | 20 cm x 20 cm	5	7232605
Sacrum	18 cm x 20 cm | 14 cm x 16 cm	5	7228205
Askina® Trachea	9,5 cm x 8,5 cm	10	7248510

Vienkārši, droši un maigi.
Granulējošas un epitelizējošas brūces



Silikona tehnoloģija
vāji eksudējoša brūce
vidēji eksudējoša brūce
spēcīgi eksudējoša brūce

		Izgulējumi (spiediena čūlas)	Arteriālas un venozas kāju čūlas	Diabētiskās pēdas čūlas	Ķirurģiskas brūces	Traumatiskas brūces	2. pakāpes apdegumi	Virspusējas akūtas brūces	Ādas transplantācijas rajoni		
Askina® SilNet	●	●	●	●	●	●	●	●	●		) Nelīpošs: aizsargā trauslos granulācijas audus) Netraumējoša noņemšana) Nodrošina vertikālu izdalījumu izvadīšanu cauri pārsējam) Mīksts un elastīgs) Piemērots kombinācijā ar topikāli lietojamiem līdzekļiem / vakuuma terapiju
Askina® DresSil	●	●	●	●	●	●	●	●			) Ātri novada eksudātu uz sāniem) Teicama šķidruma kontrole) Droši pielīp pie apkārtējās ādas) Netraumējoša, nesāpīga noņemšana) Mīksts un elastīgs
Askina® DresSil Border	●	●	●	●	●	●	●	●			) Viegli uzliekams – nav nepieciešama sekundāra nostiprināšana) Droša fiksācija pateicoties līpošai malai) Pielāgojas ķermeņa formai) Ūdensizturīgs, var mazgāties dušā
Askina® DresSil Sacrum krustu rajonam	●	●			●	●	●				) Anatomiska forma, kas pielāgota krustu rajonam) Laba aizsardzība pret izgulējumiem (spiediena čūlām) un macerāciju) Ūdensizturīgs, var mazgāties dušā
Askina® Transorbent®		●	●	●	●	●	●				) Teicama uzsūkšanas spēja) Nepielīp pie brūces virsmas) "Polstera" efekts pateicoties poliuretāna putām) Nav macerācijas) Iespējams izgriezt, individuāli pielāgojot lielumu un formu
Askina® Touch		●	●	●	●	●	●	●			) Ērta lietošana) Nelīp: nepielīp audiem ap brūci) Viegla, nesāpīga un netraumējoša pārsēja noņemšana
Askina® Transorbent® Border		●	●	●	●	●	●				) Droša fiksācija pateicoties līpošai malai) Piemērots grūti pārsienamiem rajoniem
Askina® Transorbent® Sacrum krustu rajonam		●			●	●	●				) Trīsstūrveida forma teicami piemērota krustu rajonam
Askina® THINSite		●	●	●	●	●	●				) Ļoti plāns (1 mm): ļoti elastīgs, ideāli piemērots sarežģītiem anatomiskiem ķermeņa rajoniem) Īpaši uzsūcošs) Sabalansēta līmvielas formula: ērta uzlikšana
Askina® Hydro		●	●		●	●	●				) Spēcīga un ilgstoša uzsūkšanas spēja) Neatstāj pārsēja paliekas brūces pamatnē) Neitralizē brūces smaku
Askina® Biofilm Transparent		●	●		●	●	●				) Efektīvi uzsūc izdalījumus) Plāna plēvīte, kas pieguļ jebkurām ķermeņa formām) Caurspīdīgs: ļauj vizuāli kontrolēt brūci) Viegli izmantojams) Ūdensizturīgs, var mazgāties dušā
Askina® Derm		●	●	●	●	●	●				) Ērta un viegla izmantošana) Augsta mitruma tvaiku caurlaidības pakāpe) Netraumatiska pārsēja noņemšana) Šķidrumus un baktērijas necaurlaidīgs) Caurspīdīgs: ļauj vizuāli kontrolēt brūci

Askina® SilNet

Mīksta silikona kontaktslānis brūcei



- Nelīpošs: aizsargā trauslos granulācijas audus
- Netraumējoša pārsēja maiņa
- Mīksts un elastīgs
- Saderīgs ar brūču aprūpes līdzekļiem
- Ļauj eksudātam izdalīties cauri pārsējam
- Hipoalergēns

Askina® SilNet izgatavots no elastīga, neausta materiāla, kas no abām pusēm pārklāts ar mīkstu silikonu.

To lieto kā slāni, kas saskaras ar brūci. Tas pielāgojas brūces virsmai un droši pielīp apkārtējai ādai.

Brūces vieta ir pasargāta no mehāniskiem bojājumiem pārsiešanas laikā. Askina® SilNet lietošana tādējādi mazina traumu, kas saistīta ar pārsiešanu.


LIETOŠANAS IETEIKUMI Askina® SilNet var lietot kombinācijā ar sekundāro pārsēju

- Askina® Foam
- Askina® Heel
- Askina® Pad







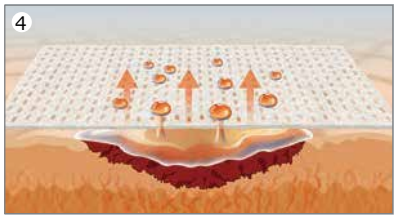

Indikācijas

- Iegriezumi un nobrāzumi
- Ādas plaisas
- Traumatiskas brūces
- 1. un 2. pakāpes apdegumi
- Ādas transplantu nostiprināšana
- Donora vietas
- Ķirurģiskas brūces
- Plēstas ādas brūces


① Noņemiet caurspīdīgo slāni.

② Uzlieciet Askina® SilNet uz brūces virsmas un uzmanīgi noņemiet zilo kārtu.

③ Uzlieciet piemērotu absorbējošu sekundāro pārsēju, piemēram, Askina® Foam.

④ Askina® SilNet darbības mehānisms: porainā struktūra nodrošina vertikālu eksudāta izdalīšanos sekundārajā absorbējošajā pārsējā bez macerācijas riska.

Mīksts silikona pārsējs
Askina® SilNet izgatavots no mīksta silikona, kas nodrošina labu fiksāciju, netraumējot epidermas šūnas noņemšanas brīdī – atšķirībā no parastajiem akrila plāksteriem.

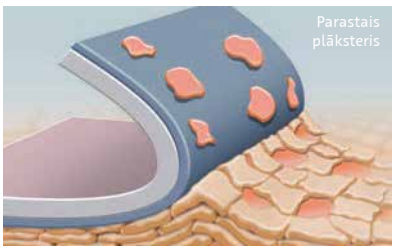





Askina® SilNet	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
	5 cm x 7,5 cm	10	5195710
	5 cm x 7,5 cm	3	5195703
	10 cm x 7,5 cm	10	5197510
	10 cm x 7,5 cm	3	5197503
	10 cm x 18 cm	10	5191810
	10 cm x 18 cm	3	5191803
	20 cm x 30 cm	5	5192305

Askina® DresSil I Askina® DresSil Border I Askina® DresSil Sacrum krustu rajonam


Putu pārsēji ar mīkstu silikona kontaktslāni brūcei



- Pielīp maigi un droši
- Minimāla trauma pārsiešanas laikā
- Teicama uzsūkšanas spēja
- Ērta lietošana
- Labi pieguļ grūti pārsienamiem rajoniem un ķermeņa formām
- Iespējams izgriezt nepieciešamo formu
- Palielina komfortu pacientam
- Hipoalergēns

Askina® DresSil ir pašlīpošs putu pārsējs ar mīkstu silikona kontaktslāni brūcei vienā pusē un tvaikus caurlaidošu, ūdens izturīgu plēvīti otrā pusē. Tas apvieno putu uzsūkšanas spēju un silikona kontaktslāņa mīksto pielipšanu.

Askina® DresSil struktūra

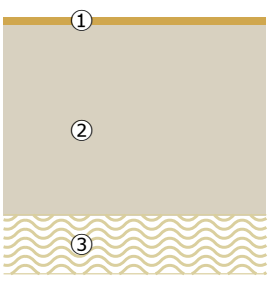

1. Poliuretāna aizsargplēvīte
Ļoti labi elpojošs
Aiztur baktērijas un ūdeni

2. Hidrofils putu slānis
Mīksts un elastīgs
Teicamas uzsūkšanas spējas

3. Silikona līpošais slānis
Labi pielīp apkārtējai ādai, noņemšana ir netraumējoša
Silikona slānis ir perforēts, lai eksudāts varētu izdalīties cauri putu slānim

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- **Askina® DresSil var lietot zem kompresijas pārsējiem**
- **Askina® DresSil var lietot arī kā palīglīdzekli ādas bojājumu profilaksei**
- **Askina® DresSil Border ļauj pacientam mazgāties dušā**









① Brūce epitelizācijas fāzē

mērķis: aizsargāt jaunizveidotos audus un netraumējoši noņemt pārsēju

② Optimāla izdalījumu kontrole

③ Divu dienu laikā brūce ir pilnīgi epitelizējusies

④ Sadzijusi brūce ar ļoti apmierinošu kosmētisko rezultātu

Indikācijas

- Izgulējumi (spiediena čūlas)
- Venozas kāju čūlas
- Arteriālas kāju čūlas
- Diabētiskās pēdas čūlas
- Traumatiskas brūces
- Ķirurģiskas brūces
- 1. un 2. pakāpes apdegumi
- Donora vietas
- Ādas bojājumi

Askina® DresSil Border ir tāda pati struktūra kā Askina® DresSil un papildus ir 1,5 cm līpoša mala lielākai drošībai pārsēja izmantošanas laikā.
Tas ir īpaši pielāgots grūti pārsienamiem vai kustīgiem ķermeņa rajoniem (ceļgaliem, elkoņiem, ādas krokām).

Lietošanas piemēri







Askina® DresSil Border pieejama arī krustu rajonam īpaši pielāgotā formā – Askina® DresSil Sacrum krustu rajonam.







	Izmērs: viss pārsējs I putu daļa	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Askina® DresSil	5 cm x 7 cm	3 | 10	5295703 | 5295710
	10 cm x 10 cm	3 | 10	5291003 | 5291010
	15 cm x 15 cm	3 | 10	5291503 | 5291510
	10 cm x 20 cm	3 | 10	5291203 | 5291210
	20 cm x 20 cm	5	5292005
Askina® DresSil Border	7,5 cm x 7,5 cm | 4,5 cm x 4,5 cm	3 | 10	5397503 | 5397510
	10 cm x 10 cm | 7 cm x 7 cm	3 | 10	5391003 | 5391010
	15 cm x 15 cm | 12 cm x 12 cm	3 | 10	5391503 | 5391510
	15 cm x 20 cm | 12 cm x 17 cm	3 | 10	5395203 | 5395210
	20 cm x 20 cm | 17 cm x 17 cm	5	5392005
Askina® DresSil Sacrum krustu rajonam	16 cm x 17,5 cm | 13 cm x 14,5 cm	5	5491605

Askina® Transorbent®

Putu pārsējs ar sausu hidrogela slāni




Randomizētā salīdzinājuma pētījumā* ar 120 pacientiem, kuriem bija izgulējumi (spiediena čūlas), Askina® Transorbent® vidēji par 57% labāk samazināja brūces virsmu, salīdzinot ar hidrokoloīdu pārsēju.

Transorbent® sausā hidrogela tehnoloģija ir patentēts dizains, kas nodrošina unikālu absorbciju. Tas spēj novadīt šķidrumu prom no brūces, noturēt to un izvadīt lieko mitrumu.

- Teicama uzsūkšanas spēja
- Nepielīp brūces virsmai
- "Polstera efekts" pateicoties poliuretāna putām
- Nav macerācijas
- Iespējams izgriezt, individuāli pielāgojot lielumu un formu

Askina® Transorbent® struktūra

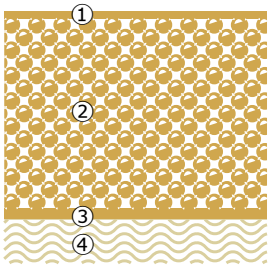


1. Plāns poliuretāna slānis
Nelaiž cauri šķidrumus un baktērijas, bet laiž cauri tvaikus.
2. Putu slānis
Nodrošina mitruma tvaiku izvadi, padarot pārsēju ērti gludu un elastīgu.
3. Sauss hidrogela slānis
Absorbē brūces izdalījumus un nodrošina mitru vidi dzīšanai.
Liekais eksudāts iztvaiko cauri putām un virsējiem slāņiem.
4. Līpošais slānis
Pielīp pie neskartās un sausās apkārtējās ādas, bet nepielīp pie brūces virsmas.

Askina® Transorbent®	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
	5 cm x 7 cm	10	0072786 R
	10 cm x 10 cm	5	0072789 U
	15 cm x 15 cm	5	0072790 V
	20 cm x 20 cm	5	0072791 W

Indikācijas

- Izgulējumi (spiediena čūlas)
- Venozas kāju čūlas
- Arteriālas kāju čūlas
- Diabētiskās pēdas čūlas
- Traumatiskas brūces
- Ķirurģiskas brūces
- 1. un 2. pakāpes apdegumi
- Palīglīdzeklis ādas bojājumu profilaksei

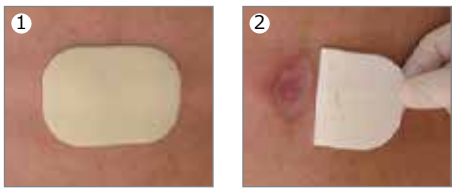

Askina® Transorbent® lietošanas piemēri

① ② 2. pakāpes izgulējumi uz skriemeļiem kahektiskam pacientam.



* Askina® Transorbent® un hidrokolīda pārsēja ar putu slāni īpašību, lietojamības un efektivitātes brūču dziedēšanā salīdzinājums un vērtējums Marie Brown-Etris et al; Results presented at the 5th European Conference in Wound Management Harrogate, 21 – 24 November 1995

Askina® Transorbent® Border | Sacrum krustu rajonam | Askina® Touch

Putu pārsējs ar sausu hidrogela slāni un līpošu vai nelīpošu malu



Trasorbent® Border un Trasorbent® Sacrum krustu rajonam ir tādi paši pārsēja slāņi un priekšrocības kā Askina® Transorbent®. Līpošā poliuretāna mala pastiprina lipšanas kvalitāti, palielinot drošību pārsēja izmantošanas laikā.

Askina® Transorbent® Border
Īpaši piemērots grūti pārsienamiem ķermeņa rajoniem.

Askina Transorbent® Sacrum krustu rajonam
Trīsstūrveida forma piemērota lietošanai krustu rajonā.

Askina® Touch
Struktūra ir tāda pati kā Askina® Transorbent®, bet Askina® Touch nelīp. Tas ir īpaši piemērots brūcēm ar jutīgu laukumu ap brūci.

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- Askina® Transorbent® Border var droši lietot dušā

Askina® Transorbent® Sacrum krustu rajonam



- Labi līpošās malas nodrošina ādas aizsardzību pret ķermeņa šķidrumiem
- Putu slāņa "polstera" efekts palīdz novērst izgulējumus (spiediena čūlas)







Askina® Transorbent®	Izmērs: viss pārsējs I putu daļa	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Border	9 cm x 14 cm | 5 cm x 10 cm	5	0072705B
	9 cm x 14 cm | 5 cm x 10 cm	10	0072706B
	14 cm x 14 cm | 10 cm x 10 cm	5	0072710C
	17 cm x 17 cm | 13 cm x 13 cm	5	0072715D
	24 cm x 24 cm | 20 cm x 20 cm	5	0072720E
Askina® Transorbent® Sacrum krustu rajonam	16 cm x 18 cm | 12 cm x 14 cm	3	0072795Z
	18 cm x 20 cm | 15 cm x 16,5 cm	5	0072792X
	18 cm x 20 cm | 15 cm x 16,5 cm	10	0072799X
Askina® Touch	10 cm x 10 cm	10	7261002
	10 cm x 15 cm	5	7261501
	15 cm x 15 cm	5	7262252
	15 cm x 15 cm	10	7262253
	20 cm x 20 cm	5	7264001

Askina® THINSite®

Plāns, uzsūcošs pārsējs ar sausā hidrogela tehnoloģiju



LIETOŠANAS IETEIKUMI

- **Askina® THINSite® pārsējus uzliek ar izmantojot bez pieskaršanās sistēmu**
- **Pārsēju var izgriezt jebkurā lielumā un formā**
- **To var arī lietot ādas ap stomu aprūpei**

Askina® THINSite® ir īpaši plāns un ļoti elastīgs brūču pārsējs, kas nodrošina visas bieza pārsēja uzsūkšanas spējas vienā elastīgā formā.
Progresīvais sausā hidrogela sastāvs nodrošina kontrolētu uzsūkšanu un ļoti labu šķidruma kontroli ilgstošālaika periodā.

- Piemērots anatomiski sarežģītiem ķermeņa rajoniem
- Mazina bīdi un berzi pacienta kustību laikā
- Ļauj vizuāli kontrolēt uzsūktos izdalījumus
- Droši nostiprinās, tomēr viegli noņemams no maigas ādas, nebojājot audus un neatstājot līmes atliekas

Indikācijas

- Izgulējumi (spiediena čūlas)
- Venozas kāju čūlas
- Arteriālas kāju čūlas
- Pēcoperāciju brūces
- Nelieli nobrāzumi un bojājumi

Askina® THINSite®	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
	10 cm x 10 cm	5	0072889U
	10 cm x 10 cm	10	0072888T
	10 cm x 10 cm	16	0072885P
	15 cm x 15 cm	5	0072890V
	15 cm x 15 cm	10	0072894V
	20 cm x 20 cm	5	0072891W



Askina® Hydro

Hidrokoloīds pārsējs



Askina® Hydro ir jaunas paaudzes hidrokoloīds pārsējs ar īpaši spēcīgu un ilgstošu uzsūkšanas spēju. Tā sastāvā ir ceļtekas miziņas daļiņas, kas pastiprina uzsūkšanas spēju, saista brūces baktērijas un mazina nepatīkamo aromātu.

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- Askina® Hydro var lietot 5 - 7 dienas
- Nozīmīgi mazina nepatīkamo aromātu

Indikācijas

Vidēji un spēcīgi eksudējošu brūču aprūpe:

- Izgulējumi (spiediena čūlas)
- Venozas kāju čūlas
- Arteriālas kāju čūlas
- Donora vietas
- Nobrāzumi
- 1. un 2. pakāpes apdegumi

Askina® Hydro	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
	10 cm x 10 cm	5	F72048
	10 cm x 10 cm	10	F72041
	15 cm x 15 cm	5	F72044
	15 cm x 15 cm	10	F72045
	20 cm x 20 cm	5	F72046
	20 cm x 20 cm	10	F72047



Askina® Biofilm® Transparent

Caurspīdīgs hidrokoloīds pārsējs



LIETOŠANAS IETEIKUMI

- **Askina® Biofilm® Transparent var izmantot līdz 7 dienām**

Askina® Biofilm® Transparent ir plāns, sterils, caurspīdīgs hidrokoloīds pārsējs brūču aprūpei ar spēju uzsūkt atlikušos izdalījumus.

- Plāns pārsējs, izmantojams visām ķermeņa formām
- Caurspīdīgs, ļauj vizuāli kontrolēt brūci
- Viegli lietojams
- Ūdensizturīgs, var mazgāties dušā

Sastāvs

- Nātrija karboksimetilceluloze
- Poliizobutilēns
- Poliuretāna plēvīte

Indikācijas

Maz eksudējošu brūču aprūpei

- Virspusējas hroniskas brūces: izgulējumi (spiediena čūlas), kāju čūlas
- Virspusējas akūtas brūces: 1. un 2. pakāpes apdegumi, nobrāzumi
- Pēcoperācijas brūces

Askina® Biofilm® Transparent	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
	10 cm x 10 cm	10	F72090
	15 cm x 15 cm	5	F72091
	15 cm x 15 cm	10	F72097
	5 cm x 20 cm	10	F72095
	20 cm x 20 cm	5	F72092
	20 cm x 20 cm	10	F72098



Askina® Derm

Poliuretāna plēves pārsējs



Askina® Derm ir sterils, caurspīdīgs poliuretāna plēves pārsējs. Tas ir daļēji caurlaidīgs un piemērots jaunizveidotas ādas aizsardzībai. Kavē kreveles veidošanos.

- Saglabā brūcē mitru vidi
- Viegli izmantojams
- Plēve ar augstu mitruma tvaiku caurlaidības pakāpi (MTCP / MVTR)
- Netraumatiska, viegla noņemšana
- Nelaiž cauri šķidrumus un baktērijas
- Caurspīdīga: ļauj vizuāli kontrolēt brūci

Inovatīva uzklāšanas sistēma



1 Noņemiet apdrukāto papīru no pārsēja līpošās puses.



2 Uzlieciet pārsēju pāri brūcei ar līpošajām daļām brūces virzienā. Viegli uzspiediet uz pārsēja, kad tas saskāries ar brūci.



3 Lēnām noplēsiet loksnītes un maigi piespiediet pārējo pārsēju uz apkārtējās sausās ādas.



4 Noņemiet plastikāta aizsargmateriālu, noplēšot loksnītes bultiņu virzienā.

Askina® Derm	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
	4,4 cm x 4,4 cm	10	F72029
	6 cm x 7 cm	5	F72031
	6 cm x 7 cm	10	F72032
	6 cm x 7 cm	100	F72033
	10 cm x 12 cm	5	F72034
	10 cm x 12 cm	10	F72035
	10 cm x 12 cm	50	F72036
	10 cm x 12 cm	10	F72037
	15 cm x 20 cm	10	F72038
	30 cm x 20 cm	10	F72039


LIETOŠANAS IETEIKUMI

- **Var izmantot aizsardzībai pret ādas bojājumiem berzes vai nepārtrauktas mitruma iedarbības radītiem bojājumiem**
- **Var izmantot i.v. katetru nostiprināšanai vai kā sekundāro pārsēju**

Indikācijas

Aizsargā sausas brūces, piemēram,

- 1. pakāpes izgulējumi (spiediena čūlas)
- Donora vietas
- Nelielus nobrāzumus
- 1. pakāpes apdegumus
- Ķirurģiskas brūces
- Plēstas ādas brūces

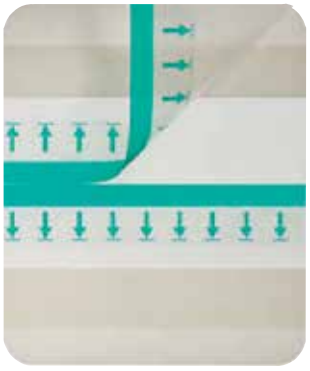



Ātra un ilgstoša pretmikrobu darbība.
Inficētas brūces

	Izgulējumi (spiediena čūlas)	Arteriālas un venozas kāju čūlas	Diabētiskās pēdas čūlas	2. pakāpes apdegumi	Donora vietas	Ādas transplanti

vāji eksudējošas brūces
vidēji eksudējošas brūces
spēcīgi eksudējošas brūces

Askina® Calgitrol® Ag	•	•	•	•	•	•		) Tūlītēja un pastāvīga sudraba izdalīšanās) Nav nepieciešama aktivācija, sudraba joni ir gatavi izmantošani) Darbojas 7 dienas) Neatstāj traipus) Teicama izdalījumu uzsūkšana
Askina® Calgitrol® THIN	•	•	•	•	•	•		) Tūlītēja un pastāvīga sudraba izdalīšanās) Nav nepieciešama aktivācija, sudraba joni ir gatavi izmantošanai) Darbojas 7 dienas) Neatstāj traipus) Piemērots dziļām un grūti pārsienamām brūcēm
Askina® Calgitrol® Paste	•	•	•	•	•	•		) Teicams un ciešs pastas kontakts ar brūces pamatni) 100% sudraba jonu, darbojas pret plašu mikroorganismu spektru, arī MRSA) Nav nepieciešama aktivācija) Saglabā brūcē mitru vidi) Viegli noņemama, vienkārši noskalojot) Neatstāj traipus
Askina® Carbosorb	•	•	•	•	•	•		) Absorbē brūces baktērijas un vielas ar nepatīkamu smaku) Visu veidu brūcēm ar nepatīkamu aromātu) Lietojams kā sekundārais pārsējs



Askina® Calgitrol® Ag I Askina® Calgitrol® THIN

Sudraba alginmāta pārsēji




- Augsta efektivitāte
- Nav nepieciešama aktivācija: gatavs lietošanai
- Darbojas tūlīt – baktēriju daudzums nozīmīgi mazinās pirmajās 30 minūtēs
- Darbojas pret plašu mikroorganismu spektru, arī pret MRSA
- Ilgstoša pretmikrobu darbība – līdz 7 dienām
- Netraumatiska noņemšana
- Neatstāj traipus

Askina® Calgitrol® patentētās matricas sastāvs apvieno kalcija alginātu un sudraba alginātu ar 10% saistīta ūdens. Saskaroties ar izdalījumiem, alginmāta matrica veido mīkstu gelu, ļaujot atbrīvoties sudraba joniem.

Askina® Calgitrol® Ag ir tehnoloģiski progresīvs brūču pārsējs, kas apvieno sudraba jonu barjeras efektivitāti ar kalcija algināta un poliuretāna putu uzsūkšanas spējām.


Askina® Calgitrol® THIN ir plāna sudraba alginmāta matrica. Mīksts un elastīgs, tas labi pieguļ dziļām un grūti pārsienamām brūcēm. Lietojams kopā ar uzsūcošu sekundāro pārsēju, piemēram, Askina® Foam.

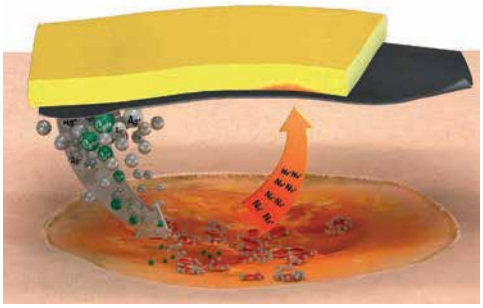

Askina® Calgitrol® Ag pārsēju darbības mehānisms

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- Uzlieciet pārsēju ar sudraba matricu (tumši pelēko virsmu) pret brūci
- Nostipriniet ar piemērotu pārsēja fiksatoru
- Pēc pārsēja noņemšanas rūpīgi iztīriet no brūces visas Askina® Calgitrol® Ag /Askina® Calgitrol® THIN paliekas

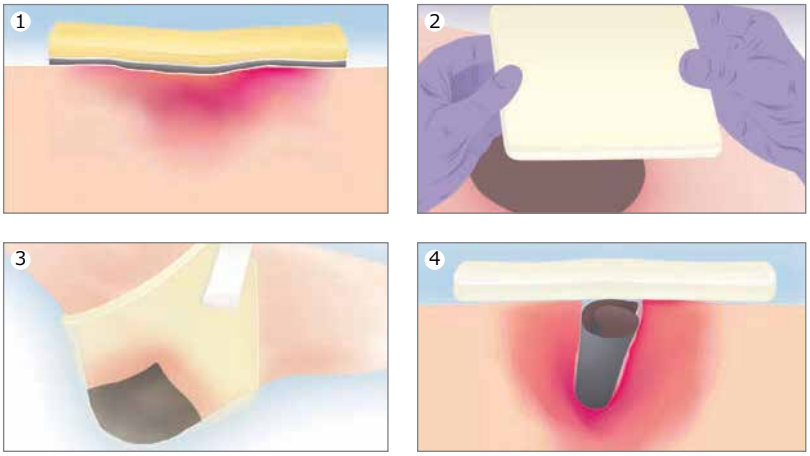

Indikācijas

Inficētas vai stipri kolonizētas, vidēji vai spēcīgi eksudējošas brūces:

- 1. - 4. pakāpes izgulējumi (spiediena čūlas)
- Venozas un arteriālas kāju čūlas
- Diabētiskās pēdas čūlas
- 2. pakāpes apdegumi
- Traumatiskas brūces
- Donora vietas




Lietošanas piemēri

① Askina® Calgitrol® Ag lietošana uz līdzenas brūces

② Askina Calgitrol® THIN, lietots uz līdzenas brūces ar neregulāru virsmu kopā ar Askina® Foam kā sekundāro pārsēju

③ Askina Calgitrol® THIN lietošana uz papēža brūces apvienojumā ar Askina® Heel papēža pārsēju

④ Askina Calgitrol® THIN piemērots arī dobām brūcēm

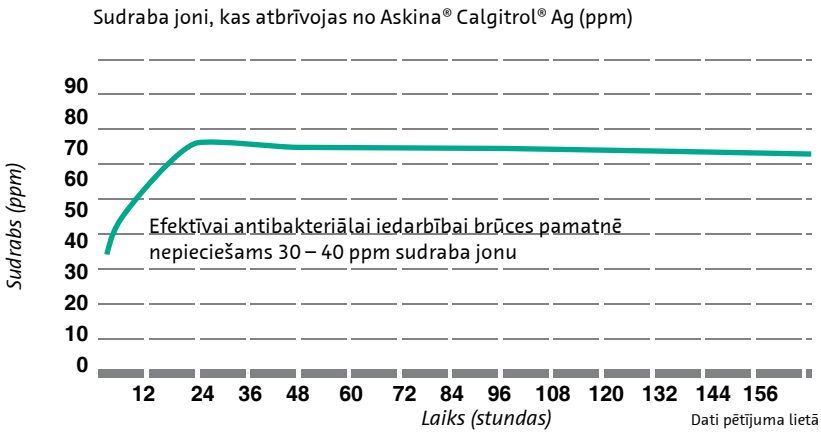

	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Askina® Calgitrol® Ag	10 cm x 10 cm	3 | 10	6211003 | 6211010
	15 cm x 15 cm	3 | 10	6211503 | 6211510
	20 cm x 20 cm	10	6212010
Askina® Calgitrol® THIN	5 cm x 5 cm	10	6205510
	10 cm x 10 cm	10	6201010
	10 cm x 20 cm	10	6202110
	20 cm x 20 cm	10	6202010
	20 cm x 40 cm	3	6202403
	30 cm x 30 cm	3	6203003
	40 cm x 40 cm	3	6204003

Askina® Calgitrol® Paste


Sudraba alginmāta brūču pasta



- Teicams un ciešs pastas kontakts ar brūces pamatni
- 100% sudraba jonu, kas darbojas pret plašu mikroorganismu spektru, arī MRSA
- Nav nepieciešama aktivācija
- Ilgstoša, kontrolēta izdalīšanās, kas nodrošina ilgstošu antibakteriālu aizsardzību
- Saglabā brūcē mitru vidi
- Viegli noņemama, vienkārši noskalojot
- Neatstāj traipus

Matricai uzsūcot mitrumu, alginmāta struktūra kļūst mīksta un piebriest, kas veicina kontrolētu un vienmērīgu sudraba jonu iekļūšanu brūcē.

Askina® Calgitrol® Paste ir pasta, kas sastāv no tādas pašas sudraba jonu alginmāta matricas kā Askina® Calgitrol® Ag pārsējs. Izteiktā elastība ļauj sudraba jonu algināta matricai labāk un ciešāk saskarties ar brūces pamatni, kas ir īpaši svarīgi grūti ārstējamu brūču, piemēram, tuneļveida un dobu brūču, gadījumā, kas bieži ir pacientiem ar otrās pakāpes apdegumiem un diabētiskās pēdas čūlām.

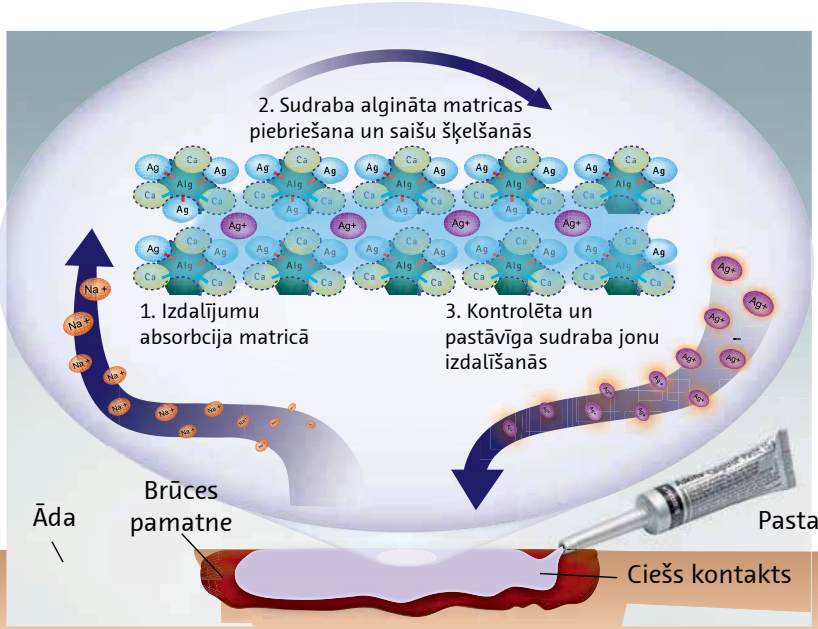

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- Pirms lietošanas sakratiet tūbu
- Uzklājiet biezu pastas kārtu uz visas virsmas
- Aplikators ļauj viegli iespiest brūces tunelī vai mazos dobumos
- Uz lielām virsmām pastu var viegli izlīdzināt ar rokām (cimdos)
- Nesāpīga un viegla noņemšana, vienkārši noskalojot









Indikācijas

Eksudējošu vidēji dziļu līdz dziļu brūču ārstēšana:

- 1. - 4. pakāpes izgulējumi
- Venozas un arteriālas čūlas
- Neiropātiskas čūlas
- Otrās pakāpes apdegumi

Inficētu brūču aprūpe tikai ārstniecības personas uzraudzībā

Kā lietot Askina® Calgitrol® Paste

① Piepildiet brūci ar Askina® Calgitrol® Paste (cukura diabēta pacients ar neregulāras formas brūci uz kreisās pēdas)


② Pilnīgi pārklājiet brūces virsmu. Askina® Calgitrol® Paste ir viegli uzklāt, un tā paliek brūcē.

③ Nosedziet ar piemērotu sekundāro pārsēju.

④ Nostipriniet ar pārsēja fiksatoru.

Baktēriju iznīcināšanas līknes

Log (CFU) samazinājums

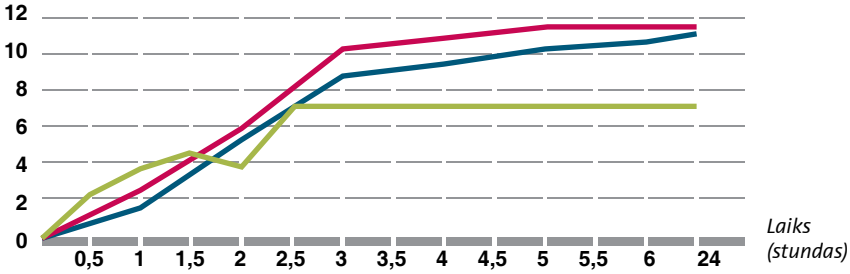

Escherichia coli NCIMB 12416; 8,6 Log samazinājums 3 stundās

Pseudomonas aeruginosa NCIMB 8626; 10,2 Log samazinājums 3 stundās

Meticilīn rezistenti Staphylococcus aureus (MRSA, ATCC BAA-44);

6,4 Log samazinājums 3 stundās

CFU: kolonijas veidojošās vienības. B. Braun, ziņojumi HOSP283A un HOSP303, 2009

Askina® Calgitrol® Paste	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
	15 g	5	6241505
	15 g	10	6241510



Askina® Carbosorb

Ogles pārsējs



Askina® Carbosorb ir labi piegulošs, sterils brūču pārsējas ar biezu absorbējošu slāni no neaustas viskozes un aktivētās ogles auduma slāni baktēriju un smaku absorbcijai.

Askina® Carbosorb ir ierobežota uzsūkšanas spēja: to var lietot vienu pašu uz vāji eksudējošām un nepatīkami smakojošām brūcēm vai apvienojumā ar citiem uzsūcošiem pārsējiem uz vidēji vai spēcīgi eksudējošām un nepatīkami smakojošām brūcēm.

LIETOŠANAS IETEIKUMI

- **Pārsēju var nostiprināt ar īpašām zeķēm brūcēm uz kājām vai ar elastīgām saitēm / zeķēm vai pārsēju fiksatoriem**

Indikācijas

Askina® Carbosorb var lietot vāji vai spēcīgi eksudējošu, virspusēju vai dziļu hronisku brūču aprūpei, īpaši tad, ja ir infekcija un/vai nepatīkams aromāts.

- Venozas kāju čūlas
- Arteriālas kāju čūlas
- Izgulējumi (spiediena čūlas)
- Inficētas un/vai smakojošas ķirurģiskas vai traumatoloģiskas brūces

Askina® Carbosorb	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
	10 cm x 10 cm	10	9025006
	10 cm x 10 cm	12	9025070
	10 cm x 20 cm	10	9025014
	10 cm x 20 cm	12	9025078



Askina® Pad | Askina® Pad S

Uzsūcošs neausta materiāla pārsējs



LIETOŠANAS IETEIKUMI

Askina® Pad var lietot kā sekundāro pārsēju kopā ar citiem Askina® pārsējiem:

Askina® gel, Askina® Sorb, Askina® Cavity, Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol THIN, ...

Askina® Pad ir sterils, nelīpošs, labi uzsūcošs kompreses tipa pārsējs visa veida eksudējošu brūču aprūpei.

Askina® Pad S ir sterils, nelīpošs, labi uzsūcošs, iešķelts kompreses tipa pārsējs drenāžas cauruļu un barošanas zonžu aprūpei. Tam ir centrālā atvere, kas ir piemērota lietošanai ar caurulītēm līdz 11 mm diametrā, un iegriezums, ko aptīt ap caurulīti.


Askina® Pad lietošanas indikācijas

- Uzsūcošs pārsējs traumatiskām, dermatoloģiskām vai ķirurģiskām brūcēm
- Sekundārs pārsējs lietošanai kopā ar dažādiem citiem pārsējiem, arī uz inficētām brūcēm

Askina® Pad S lietošanas indikācijas

- Uzsūcošs pārsējs drenāžas vietām, ap katetriem, barošanas zondēm, suprapubiskiem katetriem u. c.

Trīs kārtu sistēma

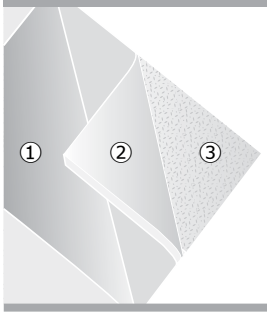

1. **Ūdeni atgrūdošs pamatmateriāls**
2. **Dabiskas šķiedras kokvilna ar lielu uzsūkšanas spēju**
3. **Pie brūces nelīpošs slānis (poliestera tīkliņš)**

Askina® Pad	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Pad	5 cm x 5 cm	25	9024000
	5 cm x 5 cm	100	9024018
	10 cm x 10 cm	10	9024026
	10 cm x 10 cm	100	9024034
	20 cm x 10 cm	100	9024042
Pad S	5 cm x 5 cm	30	9024050
	7,5 cm x 7,5 cm	30	9024069
	Centrālās atveres diametrs: 4,1 – 11 mm 9. – 30. izmēra katetriem		





Askina® Barrier Film | Askina® Barrier Cream

Gaisu caurlaidīga ādas barjera | Aizsargājoša un mitrinoša barjera



Askina® Barrier Film ir ātri žūstoša, caurspīdīga, gaisu caurlaidīga ādas barjera, ko lieto nebojātas vai bojātas ādas aizsardzībai pret urīnu, izkārnījumiem, pārsējiem, traumām un berzi. Tā ir pilnīgi nekairinoša.

- Ātri izžūst < 30 s
- Caurspīdīga: ļauj vizuāli kontrolēt
- Izmaksu efektīva: 3 dienu aizsardzību
- Viegli noņemama
- Uzlabo pārsēju un pārsēju fiksatoru lipšanu
- Nemazina inkontinences līdzekļu efektivitāti
- Nemazina stomas kopšanas līdzekļu lipšanu

Askina® Barrier Cream darbojas kā ilgstoša aizsargbarjera uz ādas pacientiem, kuriem ir nesaturēšana un āda pakļauta kairinošajai urīna un izkārnījumu iedarbībai. Tas efektīvi mitrina ļoti sausu ādu un var tikt lietots arī ādas aizsardzībai, kad vien rodas ādas bojājuma risks ilgstošas saskares dēļ ar ķermeņa šķidrumiem.

- Efektīva ar nesaturēšanu saistītu ādas bojājumu profilakse
- Ļoti koncentrēts: mazs daudzums pārklās lielu virsmu
- Nemazina inkontinences līdzekļu uzsūkšanas spēju
- Nemazina fiksācijas plāksteru un pārsēju lipšanu
- Noturīgs pret nomazgāšanu; nav jāuzklāj bieži

	Izmērs	Skaits iepakojumā	Artikula numurs
Askina® Barrier Film			
Aerosola flakons	28 ml	1	4002801
	28 ml	12	4002812
Putu aplikators	1 ml	5	4000105
	1 ml	25	4000125
Askina® Barrier Cream			
Tūba	28 g	1	4112801
	28 g	12	4112812
Tūba	92 g	1	4119201
	92 g	12	4119212

LIETOŠANAS IETEIKUMI

Askina® Barrier Film

- **Turot aerosola sprauslu 10 – 15 cm no ādas, nospiediet aerosola sprauslu un izsmidziniet līdzenu plēvīti pāri nepieciešamajam ādas rajonam**
- **Ļaujiet plēvītei nožūt 30 sekundes**

Askina® Barrier Cream

- **Pirms uzklāšanas rūpīgi nosusiniet ādu**
- **Uzklājiet Askina® Barrier Cream plānā kārtiņā uz bojātā ādas rajona**
- **Bieži tīrot ādu, var būt atkārtoti jāuzklāj vienu reizi dienā**

Askina® Barrier Film lietošanas indikācijas

- Berzes vai mitruma izraisītu ādas bojājumu profilakse
- Riskam pakļautas ādas macerācijas un nobrāzuma profilakse
- Jaunizveidotas ādas aizsardzība pret sekundāru bojājumu

Askina® Barrier Cream lietošanas indikācijas

Askina® Barrier Cream ir piemērots lietošanai uz nebojātas ādas.
Askina® Barrier Cream darbojas kā aizsargkrēms un mitruma barjera:

- pret macerāciju, ko izraisa ķermeņa šķidrumu nesaturēšana
- lai aizsargātu jutīgu, trauslu un ļoti sausu ādu, arī ap brūcēm



Saīsinātais zāļu apraksts

Braunol® 75mg/g uz ādas lietojams šķīdums

Bezrecepšu zāles
Aktīvā viela: jodēts povidons

Sastāvs
100 g šķīduma ir: 7,5 g jodēta povidona (Povidonum iodinatum) ar 10% pieejamā joda saturu, kas atbilst 0,75g joda 100 g šķīduma.
Citas sastāvdaļas: nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija jodāts, makrogola 9 laurilēteris, nātrija hidroksīds, attīrīts ūdens.

Terapeitiskās indikācijas
Vienreizējai lietošanai:
Ārīgi neskartas ādas dezinfekcijai un gļotādu antiseptikai, piemēram, pirms ķirurģiskas operācijas, biopsijas, injekcijas, punkcijas, asins parauga paņemšanas un urīnpūšļa katetrizācijas.
Atkārtotai lietošanai ierobežotā laikā:
Antiseptiska brūču (piemēram, izgulējumu, kāju čūlu), apdegumu, ādas infekciju un superinfekciju ārstēšana.
Higiēniskai un ķirurģiskai roku dezinfekcijai.

Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret jodu vai citām palīgvielām.
Hipertireoze vai citas vairogdziedzera slimības.
Dermatitis herpetiformis sindroms.
Pirms un pēc ārstēšanas ar radioaktīvo jodu (līdz terapijas beigām)

Nevēlamās blakusparādības
Ādas un zemādas audu bojājumi:
Ļoti reti: paaugstinātas jutības reakcijas kontaktalerģijas veidā.
Imūnās sistēmas traucējumi:
Ļoti reti: anafilaktiskas reakcijas.
Endokrīnās sistēmas traucējumi:
Nozīmīga joda daudzuma uzņemšana iespējama gadījumos, kad Braunol® ilgstoši lieto uz plašām brūcēm un apdegumiem.
Loti reti: predisponētiem pacientiem var būt joda izraisīts hipertireodisms.
Biežums nav zināms: Pēc liela jodēta povidona daudzuma uzsūkšanās (piemēram, ārstējot apdegumus) aprakstīti elektrolītu līdzsvara un seruma osmolaritātes traucējumi, nieru mazspēja un smaga metaboliska acidoze

Iepakojuma veids un saturs
Polietilēna pudeles ar saturu 30 ml, 100 ml, 1000 ml
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Sīkāka informācija pilnajā zāļu aprakstā.

Teksta pēdējās pārskatīšanas datums
04 / 2010

Zāļu ražotājs
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen
Vācija

Prontosan® ražotājs:

B.Braun Medical AG | Seesatz 17 | CH-6204 | Sempach | Switzerland

Askina® ražotājs:

B.Braun Hospicare Ltd. | Collooney | Co. Sligo | Ireland

Kontaktinformācija:

B.Braun Medical SIA | Ūdeļu iela 16 | Rīga, LV – 1064
Tālrunis: 67919549 | Bezmaksas tālrunis: 80009009
E-pasts: bbraun@parks.lv
www.bbraun.com | www.woundcare-bbraun.com